



940 Professional IC Vario ONE/SeS/Prep 3

2.940.1430

Le 940 Professional IC Vario ONE/SeS/Prep 3 est l'appareil CI intelligent avec suppression séquentielle combiné à une préparation des échantillons inline Metrohm comme la neutralisation inline ou la suppression des cations inline. On peut utiliser un 800 Dosino pour la régénération du supprimeur. L'appareil peut être utilisé avec n'importe quelles méthodes de séparation et de détection.

Domaines d'application typiques :

- Déterminations d'anions avec suppression séquentielle après neutralisation inline
- Analyse de traces en ligne avec neutralisation inline et MiPCT-ME suivant
- Analyse d'anions après élimination des cations dans les échantillons à haute concentration de métaux de transition comme p. ex. les bains galvaniques

Contenu de la livraison 2.940.1430

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Le 940 Professional IC Vario ONE/SeS/Prep 3 est l'appareil CI intelligent avec suppression séquentielle combiné à une préparation des échantillons inline Metrohm comme la neutralisation inline ou la suppression des cations inline. On peut utiliser un 800 Dosino pour la régénération du suppresseur. L'appareil peut être utilisé avec n'importe quelles méthodes de séparation et de détection.



Domaines d'application typiques :

- Déterminations d'anions avec suppression séquentielle après neutralisation inline
- Analyse de traces en ligne avec neutralisation inline et MiPCT-ME suivant
- Analyse d'anions après élimination des cations dans les échantillons à haute concentration de métaux de transition comme p. ex. les bains galvaniques

Kit d'accessoires de base pour un Professional IC Vario ou un Compact IC Flex.



Kit d'accessoires pour module ONE (pompe CI avec injecteur) pour les appareils Professional IC Vario et Compact IC Flex.



1 STK

6.5000.020

Kit d'accessoires : Vario/Flex SeS

Kit d'accessoires pour suppression séquentielle (SeS) pour les appareils Professional IC Vario et Compact IC Flex. Sans rotor pour supprimeur.



2 STK

6.1602.150

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16", pour les solutions auxiliaires MSM et pour la préparation des échantillons inline de Metrohm.



2 STK

6.1608.020

Flacon 1000 mL, GL 45

Flacon pour solutions auxiliaires.



1 STK

6.1803.020

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 5 m

Pour tous les appareils CI



2 STK

6.1826.360

Tuyau pour pompe péristaltique LFL (blanc/blanc), 3 fixations

Pour Passeurs d'échantillons



1 STK

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



1 STK

6.2744.040

Couplage 2 x UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16 in. Pour appareils CI



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK




2 STK

6.2744.180

Pièce de connexion pour tuyau de pompage avec
arrêt de sureté et filtre

Pour la connexion d'un tuyau de pompage et un capillaire avec filtre
intégré

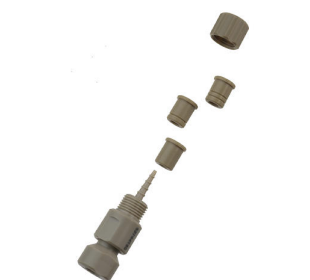

1 STK

6.2835.010

Pièce de connexion du module SPM et MSM

Pièce de connexion universelle pour MSM sur les appareils Professional IC
Vario et Compact Flex, ainsi que pour le module SPM et MSM-HC. Avec
tuyaux d'entrée et de sortie.



1 STK

6.2755.000

Cassette de tuyau

Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact
CI, Processeur d'échantillons CI



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.850.9010	IC Conductivity Detector Détecteur de conductivité haute performance compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Excellente constance de la température, tout le traitement du signal au sein du bloc de détecteur protégé et DSP – Digital Signal Processing – de la dernière génération garantissent une précision de mesure optimale. Grâce à la plage de travail dynamique, aucun changement de plage n'est nécessaire (même automatique). 
2.850.9110	IC Amperometric Detector Détecteur ampérométrique compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Ses quatre modes de mesure (DC, PAD, flexIPAD et CV) autorisent une excellente sélectivité ainsi qu'un excellent rapport signal /bruit et la grande rapidité de la disponibilité de mesure ; toutes ces caractéristiques garantissent l'extrême précision de la mesure. 
2.800.0010	800 Dosino Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attachant (150 cm). 
2.800.0020	800 Dosino Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de distribution intelligentes. Avec câble intégré (longueur 0,65 m). 

Le 858 Professional Sample Processor traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique au 850 Professional IC System soit par un 800 Dosino.



Le 858 Professional Sample Processor – Pump traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique bidirectionnelle à deux voies intégrée soit par un 800 Dosino.



Le 858 Professional Sample Processor – Pump – Injector traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique bidirectionnelle à deux voies intégrée soit par un 800 Dosino. Une vanne d'injection à six voies est en plus disponible pour la préparation des échantillons.



Le 863 Compact IC Autosampler est l'auxiliaire par excellence pour l'analyse de routine. Il permet d'automatiser les chromatographes ioniques les plus divers de la gamme Metrohm.



Le 889 IC Sample Center est un autosampler robuste pour haute sortie d'échantillons et optimisé pour les besoins du laboratoire analytique moderne. Il fonctionne suivant le principe x-y-z et un système de dosage à haute résolution pour une injection d'échantillons précise. Un système d'aiguille jumelée permet l'usage de récipients avec couvercles et septa. Une vanne d'injection PEEK complète le système d'automatisation du 889 IC Sample Center. C'est la solution d'automatisation la plus indiquée si vous avez très peu d'échantillon disponible.



Le 889 IC Sample Center – cool est la solution d'automatisation appropriée, si vous avez très peu d'échantillon. Au-delà du 889 IC Sample Center, il dispose en plus d'une fonction de réfrigération, ce qui en fait le passeur d'échantillons idéal pour les échantillons utiles en biochimie ou instables thermiquement.



Le 919 IC Autosampler plus satisfait les exigences des laboratoires ayant un nombre moyen d'échantillons à traiter. Il permet l'automatisation de tous les systèmes de chromatographie ionique de Metrohm.



Le 941 Eluent Production Module fabrique automatiquement un éluant. Il permet de travailler en continu sans aucune intervention manuelle et garantit des temps de rétention stables. Il se combine avec tous les appareils CI de Metrohm et est contrôlé par MagIC Net.



Le 815 Robotic Soliprep for LC est un système complet pour la préparation entièrement automatique d'échantillons devant être dissous, homogénéisés, dilués ou filtrés avant la détermination. Suite à la préparation, les échantillons sont directement transférés dans l'injecteur du chromatographe.

Se compose de :

- 1 x 815 Robotic USB Sample Processor XL
- 1 x 136 Polytron avec alimentation
- 1 x 772 Pump Unit
- 2 x 786 Swing Head
- 2 x 800 Dosino



Le 942 Extension Module Vario Prep 2 est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il multiplie les possibilités de la préparation des échantillons inline et du LQH dans les systèmes Professional IC Vario.

Applications typiques

- Dialyse inline dans les systèmes Vario à deux canaux
- Dialyse inline dans les systèmes sans passeur d'échantillons
- Techniques de coupe et avec arbre de colonne



Le 942 Extension Module Vario HPG est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il permet l'apport d'un autre éluant dans un système à gradient haute pression Professional IC Vario.

Applications typiques

- Systèmes à gradient haute pression avec quatre éluants au maximum



Le 942 Extension Module Vario LQH est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il étend les possibilités de la préparation des échantillons inline Metrohm « MISP » et du LQH et ouvre la voie de la surveillance en ligne à un système Professional IC.

Applications typiques :

- Préparation étendue des échantillons inline
- Surveillance en ligne
- Dilution sans passeur d'échantillons
- Réactions de dérivation d'échantillon entièrement automatiques



Le 942 Extension Module Vario ChS/PP est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il permet d'intégrer une suppression chimique complète avec soit une pompe péristaltique pour la régénération du supprimeur soit la neutralisation inline ou la suppression des cations inline dans un système Professional IC Vario.

Applications typiques :

- Suppression chimique pour le 2^{me} canal d'analyse
- Neutralisation inline ou suppression des cations inline



Le 942 Extension Module Vario SeS/PP est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il permet d'intégrer une suppression séquentielle complète avec une pompe péristaltique pour la régénération du supprimeur dans un système Professional IC Vario.

Applications typiques :

- Suppression séquentielle pour un canal d'analyse supplémentaire



Le 942 Extension Module Vario ONE/Deg est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il permet l'installation d'un autre canal d'analyse CI dans un système Professional IC Vario.

Applications typiques :

- Analyse en parallèle d'anions et de cations avec gradient basse pression
- Analyse en parallèle d'anions et de cations avec neutralisation inline
- Canal d'analyse supplémentaire avec détecteur UV/VIS ou ampérométrie



Le 943 Professional Reactor Vario est un réacteur chauffable spécialement étudié pour la dérivation pré- et post-colonne. Il se caractérise par sa robustesse, sa rapidité de chauffe et la possibilité d'obtenir des réactions jusqu'à 150 °C.



Le 943 Professional Thermostat Vario est un four à colonne autonome prévu pour deux colonnes d'une longueur maximale de 150 mm. Il se caractérise par sa rapidité de chauffe et la possibilité d'exploiter deux colonnes de séparation jusqu'à 80 °C.



Détecteur intelligent autonome, équipé d'un détecteur de conductivité haute performance, le IC Conductivity Detector. Pour utiliser avec les appareils CI intelligents ou en tant que détecteur de conductivité autonome.



2.945.0020

945 Professional Detector Vario – Amperometry

Détecteur intelligent et autonome équipé du détecteur IC Amperometric Detector. Il fait preuve d'une excellente sélectivité du fait de ses quatre modes de mesure : DC, PAD, flexIPAD et CV. L'excellent rapport signal /bruit et la disponibilité pour la mesure garantissent une très haute précision de la mesure. Pour utiliser avec les appareils CI intelligents ou en tant que détecteur autonome.



2.945.0030

945 Professional Detector Vario – Conductivity & Amperometry

Détecteur intelligent et autonome équipé du détecteur de conductivité haute performance IC Conductivity Detector et du IC Amperometric Detector, avec les quatre modes de mesure : DC, PAD, flexIPAD et CV. Pour utiliser avec les appareils CI intelligents ou en tant que détecteur autonome ampérométrique et conductimétrique.



6.2832.000

Rotor MSM A

Rotor pour supprimeur pour tous les appareils CI avec MSM (Module Supprimeur Metrohm)



6.2842.000

Rotor MSM-HC A

Rotor de supprimeur pour tous les instruments CI avec MSM-HC (Metrohm Suppressor Module à haute capacité)



6.2842.020 Manchon adaptateur, MSM

Grâce au manchon adaptateur, il est possible d'installer dans le boîtier de rotor aussi bien le rotor MSM A que le rotor MSM-LC A.



6.2844.000 Rotor MSM-LC A

Rotor de supprimeur pour utilisation avec colonnes de séparation de 2 mm.



6.2824.130 Tête de pompe macro en PEEK

Tête de pompe macro pour appareils Professional IC



6.2617.040 Outil pour joint de piston Macro

Pour retirer et monter le joint de piston dans toutes les têtes de pompe Macro



6.2741.040

Joint de piston PE/PTFE Macro

Pour toutes les têtes de pompe Macro



6.2835.000

Rotor SPM A

Rotor pour préparation d'échantillons inline avec échange de cations



6.2842.200

Rotor MSM-HC C

Rotor de suppresseur pour tous les instruments CI avec moteur MSM-HC (Metrohm Suppressor Module à haute capacité) pour la suppression des cations.




6.2755.000

Cassette de tuyau

Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI



Jeu d'accessoires pour le montage d'un Dosino pour la régénération automatique du Metrohm Suppressor Module (MSM).

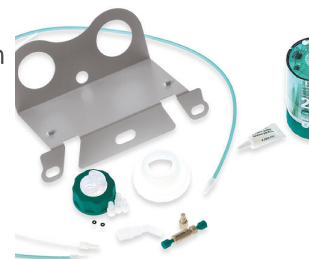

Le 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW, un détecteur intelligent de longueurs d'onde multiples, permet une quantification sûre et fiable des substances actives dans le domaine ultraviolet ou visible. Huit longueurs d'onde peuvent être sélectionnées au maximum. La détection s'effectue à l'aide d'un réseau de diodes.



Le 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW, un détecteur intelligent à longueur d'onde unique, permet une quantification sûre et fiable des substances actives dans le domaine ultraviolet ou visible. Une longueur d'onde peut être sélectionnée.



Support de flacons supplémentaire pour les appareils Professional IC.



Le 889 IC Sample Center Basic est un passeur d'échantillons robuste pour débit d'échantillons élevé et optimisé pour les besoins du laboratoire analytique moderne. Il fonctionne selon le principe x-y-z. Un système d'aiguille jumelée permet l'usage de récipients avec couvercles et septa.

Le transfert d'échantillon a lieu soit avec une pompe péristaltique dans le système CI soit avec un 800 Dosino, par exemple sous application de la technique d'injection intelligente Partial-Loop.

Pris en charge avec MagIC Net 4.1 et supérieur.



Le 889 IC Sample Center Basic – cool est la solution d'automatisation appropriée, si vous avez très peu d'échantillon. Par rapport au 889 IC Sample Center Basic, il dispose en plus d'une fonction de réfrigération, ce qui en fait le passeur d'échantillons idéal pour les échantillons utiles en biochimie ou instables thermiquement.

Le transfert d'échantillon a lieu soit avec une pompe péristaltique dans le système CI soit avec un 800 Dosino, par exemple sous application de la technique d'injection intelligente Partial-Loop.

Pris en charge avec MagIC Net 4.1 et supérieur.



Logiciel professionnel de chromatographie de Metrohm pour le contrôle de tous les systèmes Professional IC intelligents, des appareils Compact IC et leurs périphériques, de tous les détecteurs et des différents passeurs d'échantillons, du 800 Dosino, du 771 Compact Interface, etc. Le logiciel assure le contrôle, permet d'enregistrer, d'évaluer et de contrôler les données, ainsi que de générer les rapports d'analyses par chromatographie ionique.



Interface utilisateur graphique pour les opérations de routine, logiciels complets de base de données, développement de méthodes, configuration et commande de système manuelle ; administration des utilisateurs très flexible, opérations de bases de données performantes, fonctions d'exportation de données complètes, générateur de rapports configurable individuellement, commande et contrôle des différents composants du système et des résultats de chromatographie ionique.

MagIC Net Professional satisfait totalement à la directive FDA 21 CFR Part 11 ainsi qu'aux BPL.

MagIC Net est disponible dans 15 langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, chinois traditionnel, français, italien, espagnol, portugais, bulgare, tchèque, hongrois, japonais, coréen, russe, slovaque

Dans cette version, l'interface utilisateur graphique a été modernisée, ce qui améliore entre autres la mise à l'échelle et la netteté de l'interface utilisateur sur les écrans 4K.

1 licence

L'installation et les documents sont fournis sur une clé USB.

Logiciel de chromatographie compatible client/serveur de Metrohm pour le contrôle de tous les systèmes Professional IC intelligents, des appareils Compact IC et leurs périphériques, de tous les détecteurs et des différents passeurs d'échantillons, du 800 Dosino, du 771 Compact Interface, etc. Le logiciel assure le contrôle, permet d'enregistrer, d'évaluer et de contrôler les données, ainsi que de générer les rapports d'analyses par chromatographie ionique.

Les données et méthodes sont sauvegardées de manière centralisée sur le serveur.

Interface utilisateur graphique pour les opérations de routine, logiciels complets de base de données, développement de méthodes, configuration et commande de système manuelle ; administration des utilisateurs très flexible, opérations de bases de données performantes, fonctions d'exportation de données complètes, générateur de rapports configurable individuellement, commande et contrôle des différents composants du système et des résultats de chromatographie ionique.

MagIC Net Multi satisfait totalement à la directive FDA 21 CFR Part 11 ainsi qu'aux BPL.

MagIC Net est disponible dans 15 langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, chinois traditionnel, français, italien, espagnol, portugais, bulgare, tchèque, hongrois, japonais, coréen, russe, slovaque

Dans cette version, l'interface utilisateur graphique a été modernisée, ce qui améliore entre autres la mise à l'échelle et la netteté de l'interface utilisateur sur les écrans 4K.

La performance des systèmes client-serveur avec serveurs hors du réseau interne de l'entreprise a été améliorée.

Version client/serveur avec 3 licences



Le 948 Continuous IC Module permet de fabriquer des éluants d'hydroxyde de manière automatisée. Cet appareil peut préparer des éluants isocratiques ainsi que réaliser des gradients.

Le 948 Continuous IC Module, CEP est constitué des composants suivants :

- 948 Continuous IC Module
- Eluent Producer Cartridge (EPC, 6.02850.200)
- Trap continu des anions (CT, 6.02850.100)
- Dégazeur haute pression (H-DEG, 6.02850.000)



Exemples de méthodes selon le manuel 948 Continuous IC Module.

Rotor de supprimeur à haute capacité pour les éluants d'hydroxyde pour tous les appareils CI avec MSM-HC (Metrohm Suppressor Module à haute capacité).

