



Autolab IMP

3500003360

L'Autolab IMP est un potentiostat/galvanostat compact doté d'une fonctionnalité EIS. Les spécifications globales de l'Autolab IMP (conformité ± 10 V tension mesurée/appliquée, courant mesuré/appliqué ± 100 mA, plage de fréquence EIS de 10 μ Hz à 1 MHz et intégrateur analogique inclus) en font l'appareil idéal pour tout laboratoire éducatif, ainsi que pour démarrer tout projet d'électrochimie.

Autolab IMP est contrôlé et livré avec le puissant logiciel NOVA, qui comprend une bibliothèque de procédures « Principes fondamentaux de l'électrochimie » dédiée, facilitant ainsi le processus d'enseignement de l'électrochimie. Les entrées/sorties analogiques et numériques sont disponibles pour contrôler les accessoires Autolab et les appareils externes.

Contenu de la livraison 3500003360

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

CABLE.PWR

Câble d'alimentation


Câble d'alimentation standard pour instruments et accessoires Autolab.



1 STK

CELLCBL.M101. Câble de cellule
204


Câble de cellule standard, 1,5 m, avec connexion pour contre-électrode (CE), électrode de référence (RE), électrode de détection (S), électrode de travail (WE) et terre pour M101/M204/PGSTAT204.

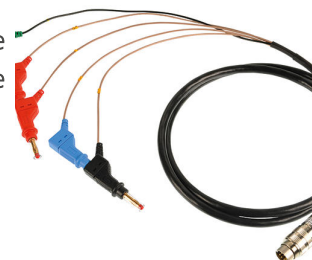

1 STK

AUT.DUMCELL.S Cellule fictive Autolab

Cellule fictive pour test d'instrument.

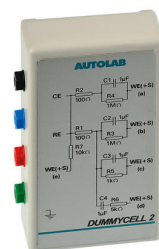

1 STK

CBL.USB

Câble USB standard

Câble USB standard pour appareils Autolab.




Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

CBL.MONIT.MAC.204.S	Câble de moniteur pour M101/M204/PGSTAT204
---------------------	--

Câble de moniteur pour M101/M204/PGSTAT204, fournissant des connexions pour des sorties analogiques (E_{out} , i_{out} et V_{out}) et l'entrée (V_{in}).

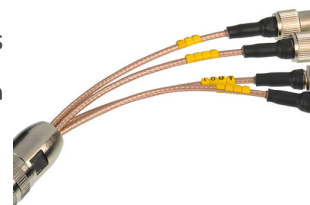

ALL.CLIP.BLACK	Pince crocodile noire
----------------	-----------------------

Une pince crocodile noire à connecter sur les électrodes dans la cellule électrochimique.



ALL.CLIP.RED	Pince crocodile rouge
--------------	-----------------------

Une pince crocodile rouge à connecter sur les électrodes dans la cellule électrochimique.



AUT204.CASE	Mallette de transport pour le PGSTAT204
-------------	---

La mallette de transport PGSTAT204 est conçue pour ranger ou transporter l'Autolab PGSTAT204 et ses composants de manière pratique. La mallette de transport pour le PGSTAT204 peut contenir le PGSTAT204, son câble d'alimentation, la cellule fictive, le câble de la cellule et celui du moniteur, le manuel de prise en main de NOVA et le CD d'installation de NOVA.



IME663.101.S Interface pour la potence Metrohm 663 VA Stand

Interface pour la potence Metrohm 663 VA Stand

