



Porotrode avec PT1000 (plug U)

6.00235.600

Électrode pH combinée avec capteur de température Pt1000 intégré pour des mesures pH ou des titrages dans :

des échantillons contenant des protéines (aliments, échantillons biologiques)

des échantillons très sales

des échantillons visqueux

Le diaphragme capillaire spécialement développé et l'électrolyte de référence porolyte (6.2318.010) permettent d'obtenir une performance optimale dans des solutions contenant des protéines. À conserver dans une solution de conservation.

Contenu de la livraison 6.00235.600

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk

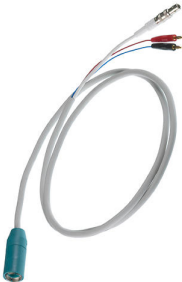
6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.600	Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F 2x2 mm B, 1 m Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).	
6.2104.610	Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F + 2x2 mm B, 2 m Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).	
6.2318.010	Porolyte 50 mL Électrolyte de référence Porolyte pour électrodes 6.0235.200 Porotrode et 6.00235.600 Porotrode avec Pt1000. Remplace 6.2318.000 Porolyte 50 mL.	

Il n'est possible de garantir des résultats de mesure fiables sur le long terme que si la membrane en verre de mesure du pH et le diaphragme reçoivent des soins préventifs réguliers. Le nettoyage par attaque avec des produits chimiques toxiques ou un traitement mécanique du diaphragme n'est pas seulement compliqué et cher, il provoque aussi un vieillissement prématuré de l'électrode de verre de mesure du pH.

La solution de nettoyage a été mise au point pour assurer un nettoyage doux et simple des électrodes de verre de mesure du pH. Une application régulière peut considérablement prolonger la durée de vie du produit.

Cette solution de nettoyage fait également partie du kit pHit.

