



Titrode Ag avec revêtement d'AgCl

6.00430.100CL

Électrode annulaire en argent combinée à membrane de verre pH comme électrode de référence. L'anneau en argent est revêtu de chlorure (AgCl) pour une sensibilité accrue et une meilleure limite de sensibilité.

Cette électrode ne nécessitant aucune maintenance convient aux titrages par précipitation en cas de valeur pH constante (nitrate d'argent comme titrant), par ex. de :

- Chlorure, bromure, iodure
- Sulfures
- Sulfure d'hydrogène
- Mercaptans
- Cyanures

Cette électrode est conservée dans l'eau distillée.

Contenu de la livraison 6.00430.100CL

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk

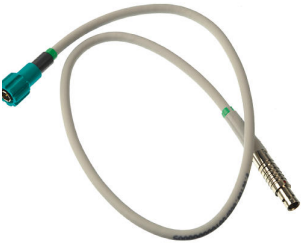
6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	
6.02104.000	Câble d'électrode, tête enfichable G / fiche P, 0,55 m Câble pour le raccordement d'une électrode analogique (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	
6.02104.010	Câble d'électrode, tête enfichable G / fiche P, 1,5 m Câble pour le raccordement d'une électrode analogique (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	