



## Électrode annulaire Ag combinée

6.00450.100

Électrode annulaire d'argent combinée munie d'un diaphragme rodé fixe.

Cette électrode convient aux titrages par précipitation en cas de valeur pH variable (nitrate d'argent comme titrant), par ex. de :

- Chlorure, bromure, iodure
- Sulfures
- Sulfure d'hydrogène
- Mercaptans
- Cyanures

Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination et l'anneau en argent scellé est résistant aux acides fortement concentrés et aux solutions salines.

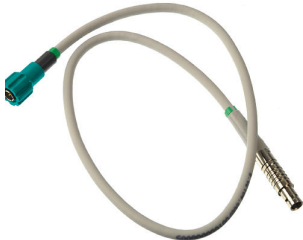
Du  $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$  est utilisé en tant qu'électrolyte de référence et pour la conservation.

En fonction de l'utilisation, il est recommandé d'utiliser une électrode annulaire en argent avec revêtement (d'AgBr, AgCl ou Ag<sub>2</sub>S), qui peut être commandée en conséquence.

## Contenu de la livraison 6.00450.100

| Qt.     | Order no.  | Description                                                                                                                          |                                                                                      |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 Stk | 6.1236.050 | Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm<br>Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.                  |   |
| 100 Stk | 6.2008.040 | Récipient de conservation<br>Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units. |  |

## Accessoires optionnels

| Order no.   | Description                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2104.020  | Câble d'électrode / 1 m / F<br><br>Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.                                         |    |
| 6.2310.010  | Électrolyte KNO <sub>3</sub> -1 mol/L 250 mL<br><br>Solution d'électrolyte KNO <sub>3</sub> 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)                      |    |
| 6.02104.000 | Câble d'électrode, tête enfichable G / fiche P, 0,55 m<br><br>Câble pour le raccordement d'une électrode analogique (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS. |  |
| 6.02104.010 | Câble d'électrode, tête enfichable G / fiche P, 1,5 m<br><br>Câble pour le raccordement d'une électrode analogique (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.  |  |