



Électrode annulaire Ag combinée avec revêtement d'AgCl

6.00450.100CL

Électrode annulaire d'argent combinée munie d'un diaphragme rodé fixe.

L'anneau en argent scellé est résistant aux acides fortement concentrés et aux solutions salines, et revêtu de chlorure (AgCl) pour une sensibilité accrue et une meilleure limite de sensibilité.

Cette électrode convient aux titrages par précipitation en cas de valeur pH variable (nitrate d'argent comme titrant), par ex. de :

- Chlorure, bromure, iodure
- Sulfures
- Sulfure d'hydrogène
- Mercaptans
- Cyanures

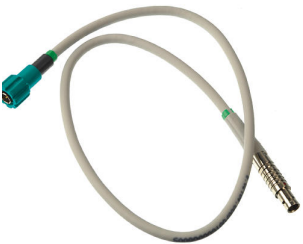
Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination.

Du $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ est utilisé en tant qu'électrolyte de référence et pour la conservation.

Contenu de la livraison 6.00450.100CL

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.
		
100 Stk	6.2008.040	Récipient de conservation Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.
		

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	
6.02104.000	Câble d'électrode, tête enfichable G / fiche P, 0,55 m Câble pour le raccordement d'une électrode analogique (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	
6.2310.010	Électrolyte KNO ₃ -1 mol/L 250 mL Solution d'électrolyte KNO ₃ 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)	
6.02104.010	Câble d'électrode, tête enfichable G / fiche P, 1,5 m Câble pour le raccordement d'une électrode analogique (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	