



Électrode annulaire Ag combinée avec revêtement d'Ag₂S

6.00450.100S

Électrode annulaire d'argent combinée munie d'un diaphragme rodé fixe.

L'anneau en argent scellé est résistant aux acides fortement concentrés et aux solutions salines, et est revêtu de sulfure (Ag₂S) pour une sensibilité accrue et une meilleure limite de sensibilité.

Cette électrode convient aux titrages par précipitation en cas de valeur pH variable (nitrate d'argent comme titrant), par ex. de :

- Chlorure, bromure, iodure
- Sulfures
- Sulfure d'hydrogène
- Mercaptans
- Cyanures

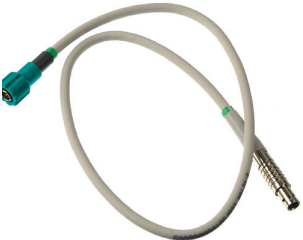
Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination.

Du $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ est utilisé en tant qu'électrolyte de référence et pour la conservation.

Contenu de la livraison 6.00450.100S

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.
		
100 Stk	6.2008.040	Réceptacle de conservation Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.
		

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	
6.2310.010	Électrolyte KNO ₃ -1 mol/L 250 mL Solution d'électrolyte KNO ₃ 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)	
6.02104.000	Câble d'électrode, tête enfichable G / fiche P, 0,55 m Câble pour le raccordement d'une électrode analogique (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	
6.02104.010	Câble d'électrode, tête enfichable G / fiche P, 1,5 m Câble pour le raccordement d'une électrode analogique (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	