



Metrosep Carb 2 - 100/2,0

6.01090.210

La colonne CI Metrosep Carb 2 - 100/2,0 est le modèle microbore court des colonnes Metrosep Carb 2. Elle convient particulièrement à la détermination des hydrates de carbone en utilisant des éluants alcalins et la détection ampérométrique pulsée. La colonne d'échange d'anions de haute capacité est basée sur un copolymère styrène/divinylbenzène. Elle est stable dans la gamme de pH = 0–14 et sépare le glucose, le fructose et le sucrose. Elle convient en outre à l'analyse de certains alcools de sucre et des oligosaccharides. Le modèle 100 mm de la colonne de séparation Metrosep Carb 2 permet d'obtenir de courtes durées d'analyse.

Cette colonne convient particulièrement au couplage CI-SM du fait du faible débit d'éluant.

Contenu de la livraison 6.01090.210

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

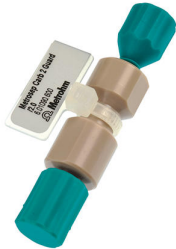
6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01090.600	Metrosep Carb 2 Guard/2,0	
	La précolonne microbore Metrosep Carb 2 Guard/2,0 élimine les contaminations de manière efficace et protège la colonne analytique de séparation. Cette précolonne est conçue pour avoir une influence négligeable sur la séparation chromatographique.	
6.01806.000	Capillaire PEEK 0,18 mm d.i. / 2 m	
	Pour une utilisation dans un trajet d'écoulement sous haute pression, p. ex. comme capillaire de préchauffage pour les colonnes Metrosep Carb 2 en version 2 mm (6.01090.2x0).	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0	
	Colonne Trap pour l'élimination de contaminations de borate dans les éluants. La Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4,0 est principalement utilisée pour l'analyse des glucides avec des éluants d'hydroxyde.	
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4,0	
	Colonne piège pour l'élimination de traces de carbonate dans les éluants d'hydroxyde.	