



Syntrode avec Pt1000 (longueur 36,8 cm)

6.0248.600

Électrode pH combinée avec capteur de température Pt1000 intégré, longueur d'insertion de 28,8 cm. Cette électrode est idéale en particulier pour :

- une utilisation en synthèse et dans les bioréacteurs, par ex. pour les titrages STAT
- une utilisation à température élevée
- des mesures sur de longues périodes

Grâce à son diaphragme rodé fixe, cette électrode est insensible à la contamination et elle dispose en outre d'un récipient de réserve pour l'électrolyte de référence.

Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation.

Alternative : électrolyte de référence pour mesures à $T > 80^\circ \text{C}$: solution Idrolyte, conservation dans l'Idrolyte.

Contenu de la livraison 6.0248.600

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk

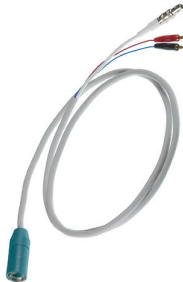
6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2325.000	Kit pH Kit de maintenance pour les électrodes pH Le kit contient: • 50 mL solution de nettoyage • 50 mL solution de KCl 3M • 50 mL solution de conservation • 2 tubes de stockage • Manuel d'utilisation	
6.2308.020	Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)	
6.2308.040	Idrolyte (250 mL) Idrolyte (pour électrode 6.0224.100 et Unitrode à $T > 80^\circ \text{C}$)	
6.2104.600	Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F 2x2 mm B, 1 m Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).	

6.2104.610

Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F + 2x2 mm B, 2 m

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).



6.2103.150

Adaptateur rouge fiche 4 mm / fiche 2 mm

Adaptateur pour la connexion d'électrodes avec fiche de 2 mm aux appareils disposant d'une douille de 4 mm (prise banane)



6.2323.000

Solution de conservation

Solution de conservation pour toutes les électrodes de verre pH combinées avec électrolyte de référence $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$



6.2325.100

Solution de nettoyage 3 x 50 mL

Il n'est possible de garantir des résultats de mesure fiables sur le long terme que si la membrane en verre de mesure du pH et le diaphragme reçoivent des soins préventifs réguliers. Le nettoyage par attaque avec des produits chimiques toxiques ou un traitement mécanique du diaphragme n'est pas seulement compliqué et cher, il provoque aussi un vieillissement prématuré de l'électrode de verre de mesure du pH.

La solution de nettoyage a été mise au point pour assurer un nettoyage doux et simple des électrodes de verre de mesure du pH. Une application régulière peut considérablement prolonger la durée de vie du produit.

Cette solution de nettoyage fait également partie du kit pHit.

