


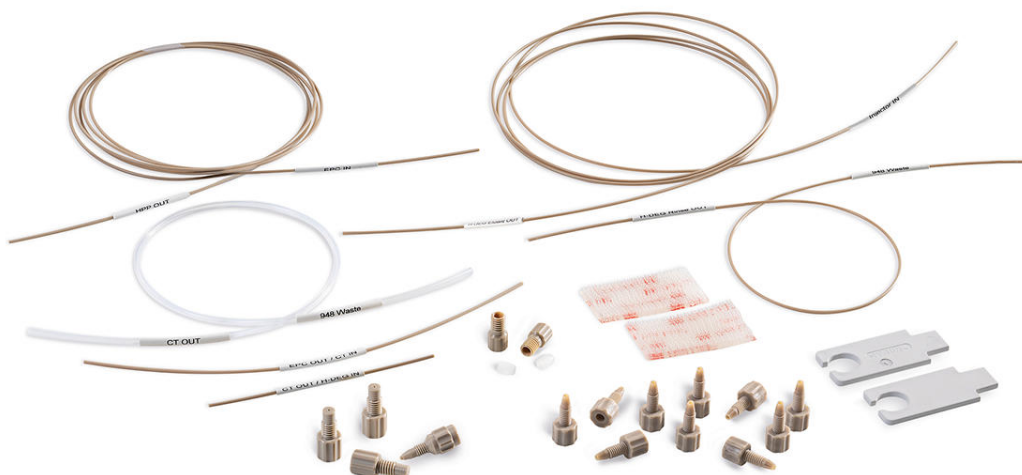

Kit d'accessoires : CEP

6.05000.300

Kit d'accessoires pour l'installation du 948 Continuous IC Module, CEP

Contenu de la livraison 6.05000.300

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.01805.470	Tuyau FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 500 mm, CT OUT

Un tuyau FEP reliant la sortie du Continuous Anion Trap au Waste Collector du chromatographe ionique.




1 STK

6.01831.010

Capillaire PEEK, 0,25 mm, HPP OUT

Un capillaire PEEK reliant la pompe haute pression du chromatographe ionique avec l'Eluent Producer Cartridge (EPC) du 948 Continuous IC Module, CEP.

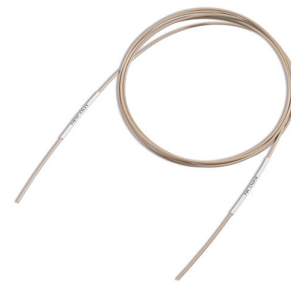

1 STK

6.01831.020

Capillaire PEEK, 0,25 mm, EPC OUT

Un capillaire PEEK reliant l'Eluent Producer Cartridge (EPC) avec le Continuous Trap (CT) du 948 Continuous IC Module, CEP.



1 STK

6.01831.030

Capillaire PEEK, 0,25 mm, CT OUT

Un capillaire PEEK reliant le Continuous Trap (CT) avec le High-Pressure Degasser (H-DEG) du 948 Continuous IC Module, CEP.




1 STK

6.01831.040

Capillaire PEEK, 0,25 mm, H-DEG OUT

Un capillaire PEEK reliant le High-Pressure Degasser (H-DEG) du 948 Continuous IC Module, CEP avec l'injecteur du chromatographe ionique.

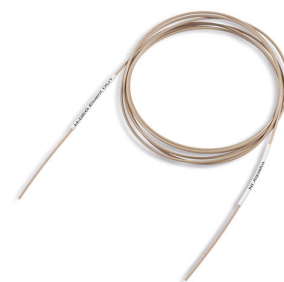

1 STK

6.01831.050

Capillaire PEEK, 0,25 mm, H-DEG Rinse

Un capillaire PEEK reliant le High-Pressure Degasser (H-DEG) du 948 Continuous IC Module, CEP avec le Waste Collector du chromatographe ionique.



1 STK

6.2053.030

Sangle de fixation pour 6.2744.340, 25 x 50 mm

Sangle de fixation pour équipement CI gradient Dosino



2 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.



1 STK

6.2744.200

Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne

Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)

