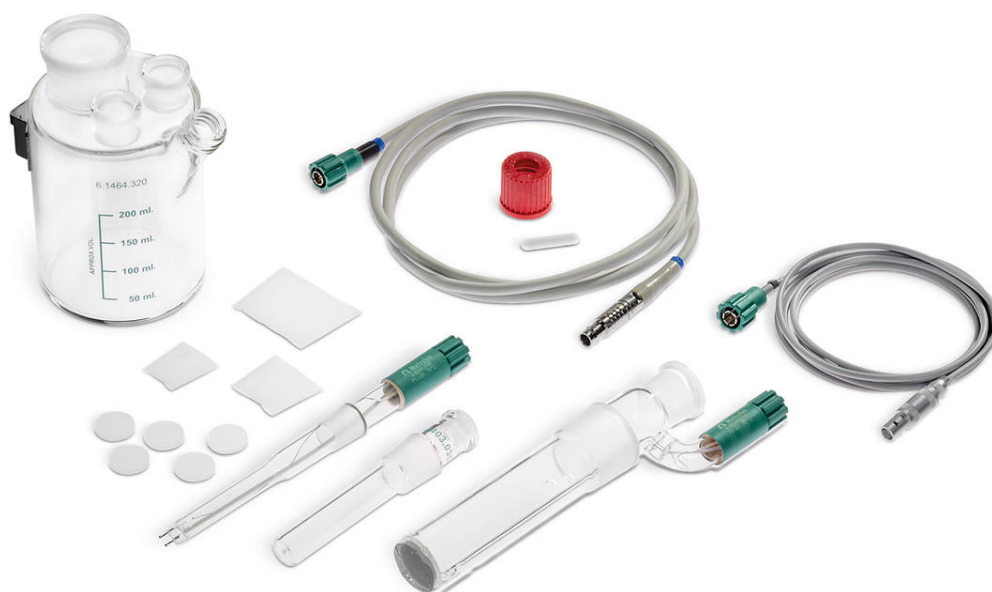




Équipement KFC pour OMNIS Oven Module avec électrode génératrice et diaphragme

6.05406.060

Jeu d'accessoires complet pour titrages coulométriques Karl Fischer avec une électrode génératrice avec diaphragme sur un OMNIS Oven Module

Contenu de la livraison 6.05406.060

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Électrode génératrice avec diaphragme pour les titrages coulométriques Karl Fischer, rodage normalisé 29/22. Cette électrode possède un connecteur du câble coudé vers le haut qui simplifie leur protection et le maniement en cas d'utilisation du four OMNIS Sample Robot. Cette électrode génératrice convient spécialement aux applications suivantes :

- Échantillons à teneur en eau absolue très faible 50 ppm
- Détermination coulométrique de la teneur en eau dans les échantillons huileux
- Applications utilisant des réactifs de cétone
- Applications utilisant des réactifs peu conducteurs (ajout de chloroforme, xylène > 10 %)



Câble pour le raccordement d'une électrode analogique polarisable (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.



Électrode indicatrice utilisée pour le titrage coulométrique Karl Fischer.



Pour les coulomètres KF.



1 STK

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pièces

Lot de 5 pièces.



1 STK

6.1464.320

Vase de titrage KF 80-250 mL / coulométrie



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2104.630

Câble d'électrode / 1,5 m / H

Avec fiche H, pour la liaison Électrode génératrice - Coulomètre



1 STK

6.2701.040

Fermeture à vis GL 18 avec orifice

En PBT. Avec orifice pour septum 6.1448.020. Pour la cellule sans diaphragme 6.5405.000 et les récipients de titrage 6.1464.32X et 6.1465.320.



1 STK

6.2713.000

Joint PTFE RN14

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 14.



1 STK

6.2713.010

Joint PTFE RN29

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 29.



1 STK

6.2713.020

Joint PTFE RN19

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 19.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2811.000	Tamis moléculaire Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.	
6.2811.010	Tamis moléculaire (US) Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer. Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).	