



Équipement KFT pour Eco KF Titrator avec Polytron

6.05610.060

Jeu d'accessoires complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer avec Polytron

Contenu de la livraison 6.05610.060

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.00346.100	Double électrode annulaire Pt pour la volumétrie
Électrode indicatrice utilisée pour le titrage Karl Fischer, laquelle est plus robuste et plus facile à nettoyer que l'électrode à tige classique en platine (6.0338.100) grâce à ses deux anneaux en platine scellés.		



1 STK

6.01406.010

Tube d'adsorption avec couvercle

Tube d'adsorption avec couvercle pour titreur Karl Fischer OMNIS volumétrique



1 STK

6.01406.250

Réipient de titrage 50 – 150 mL

Réipient de titrage 50 – 150 mL avec fermeture à vis pour une utilisation avec couvercle de réipient de titrage 6014050X0.



1 STK

6.01408.010

Jeu de joints d'étanchéité pour la cellule de titrage Karl Fischer

Jeu de joints d'étanchéité complet, pour 6.05609.000 et 6.05609.010.



1 STK

6.01543.120

Seringue anti-diffusion

Pointe de burette avec vanne anti-diffusion, adaptée au titreur OMNIS Karl Fischer.



3 STK

6.02709.010

Bouchon

Bouchon en plastique, pour le titreur OMNIS Karl Fischer 2.1001.4220.



1 STK

6.02709.020

Bouchon à septum

Bouchon à septum en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



2 STK

6.02709.030

Embout fileté

Embout fileté en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



1 STK

6.02801.000

Ouate pour le tube d'adsorption

Tampon d'ouate en coton (4 unités), pour le tube d'adsorption OMNIS 601406010.



2 STK 6.1448.010 Septum 12 mm, 5 pièces
Lot de 5 pièces.



2 STK 6.2816.020 Seringue 10 mL avec raccord Luer
Pour différentes applications de CI et VA.



2 STK 6.2816.030 Aiguille avec connecteur Luer

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.



1 STK 6.2104.020 Câble d'électrode / 1 m / F
Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



1 STK

6.01405.060

Couvercle de récipient de titrage Eco destiné aux
récipients de titrage 601406XXX pour Polytron

Couvercle de récipient de titrage destiné au titrage volumétrique Karl
Fischer avec un Eco KF Titrator et Polytron




1 STK

6.02008.030

Support pour broyeur pour titreur Eco

Support pour broyeur permettant de fixer le Polytron, pour le couvercle
de récipient de titrage 601405060

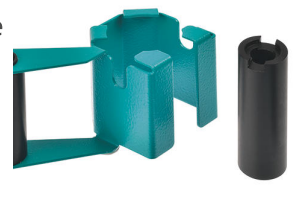

1 STK

6.02709.050

Douille de guidage

Pour fixer le Polytron dans la partie supérieure du récipient de titrage
601405040.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.02709.040	Bouchon de fermeture	
	Bouchon de fermeture pour couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	
6.02711.000	Cuillère à pâte	
	Pour une utilisation lors de déterminations de la teneur en eau Karl Fischer de substances pâteuses telles que miel, produits cosmétiques, graisses ou différents produits laitiers.	
	La cuillère à pâte facilite l'ajout d'échantillons visqueux. Elle se manipule aussi facilement que n'importe quelle autre spatule et permet l'ajout pratique, rapide et sans perte de pâtes dans le récipient de titrage Karl Fischer.	
	Pour dissoudre rapidement et entièrement les échantillons visqueux, nous recommandons par ailleurs l'utilisation d'un homogénéisateur.	
	Compatible avec couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	
2.136.0100	Polytron PT 1300 D	
	Polytron PT 1300 D - version Metrohm	
	Homogénéisateur pouvant être commandé directement par le logiciel OMNIS, tiamo™ ou le Touch Control.	
	Le Polytron PT 1300 D se compose d'un module de contrôle et d'un moteur. Le système d'accouplement au moteur permet un remplacement facile et rapide des agrégats sans outils supplémentaires. Les échantillons solides peuvent être fragmentés sans difficulté. Cet appareil est également idéal pour obtenir un bon mélange dans le cas d'échantillons visqueux.	

6.9012.000

Agrégat de dispersion pour Polytron, 125 mm

Agrégat de dispersion standard pour Polytron 1300 D



6.9012.010

Agrégat de dispersion pour Polytron, 157 mm

Agrégat de dispersion spécial (version Metrohm) avec couteaux saillants



6.2811.000

Tamis moléculaire

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



6.2811.010

Tamis moléculaire (US)

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

