



Metrosep A Supp 7 - 250/4.0

6.1006.630

Les produits secondaires du traitement de l'eau (disinfection by-products) sont soupçonnés d'être non seulement nocifs pour la santé, mais aussi cancérigènes. C'est la raison pour laquelle les oxyhalogénures sont devenus l'objet de nombreuses recherches et de normes (p. ex. EPA 300.1 partie B, EPA 317.0, EPA 326.0). Il s'agit en premier lieu du bromate, produit du bromure lors de l'ozonisation de l'eau potable. La colonne Metrosep A Supp 7 - 250/4.0 est une colonne de séparation haute performance pour la détermination en parallèle des anions standard, des oxyhalogénures et de l'acide dichloracétique. Avec cette colonne, ces ions peuvent être déterminés jusque dans la gamme inférieure des µg/L de manière sûre et précise. La sensibilité de détection élevée est atteinte par l'utilisation d'un polymère à base d'alcool polyvinylique de 5 µm, permettant d'obtenir un nombre de plateaux très élevé et, par conséquent, d'excellentes propriétés de séparation et de détection. En plus, par modification de la température, il est possible d'adapter la séparation aux exigences spécifiques de l'application.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protège la colonne CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 de manière fiable contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

Cette précolonne contient le même matériau de séparation que la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 Guard/4,0 est souvent recommandée.



La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 fournit une protection fiable des colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.




La Metrosep RP 2 Guard/3,5 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège efficacement la colonne analytique de séparation des contaminations. Les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 permet de faire des économies, étant donné que le disque à filtre se change en quelques gestes.



Ne pas l'utiliser avec la colonne 6.1011.030.



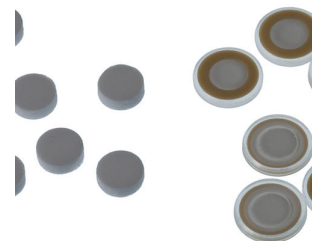

6.1031.500

Metrosep A Supp 16 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 16 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.



6.1031.510

Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0

La Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.

