



StabNet 2.x full

6.6068.202

Programme PC pour le contrôle et la gestion des données des appareils de mesure de stabilité. Le logiciel permet le contrôle, l'acquisition, l'évaluation et la surveillance des données ainsi que la génération de rapports des mesures de stabilité.

Interface utilisateur graphique pour les opérations de routine, programmes complets de base de données, développement de méthodes, configuration du système, administration des utilisateurs très flexible, opérations d'exportation de données étendues, générateur de rapports configurables individuellement.

StabNet Full est conforme aux directives de la FDA 21 CFR Part 11.

Langues de dialogue : allemand, anglais

Les appareils suivants sont pris en charge :

- 892 Professional Rancimat
- 893 Professional Biodiesel Rancimat
- 895 Professional PVC Thermomat

1 licence pour 4 appareils de mesure de stabilité max. raccordés à un PC.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.892.0010	892 Professional Rancimat

Le 892 Professional Rancimat est un système d'analyse moderne permettant une détermination simple et fiable de la stabilité à l'oxydation des graisses et huiles naturelles par application de la méthode Rancimat, bien établie depuis de nombreuses années. Doté de 8 positions de mesure réparties dans 2 blocs de chauffage. L'afficheur intégré indique l'état de l'appareil et de chacune des positions de mesure. Les touches de démarrage pour chaque position de mesure permettent le démarrage de la mesure sur l'appareil. Des récipients à réaction à usage unique et des accessoires lavables en machine réduisent les coûts et le travail de nettoyage à un minimum. Ceci fait économiser du temps et de l'argent tout en améliorant l'exactitude et la reproductibilité de manière considérable.


Tous les accessoires nécessaires aux déterminations sont fournis. Le logiciel StabNet est requis pour le contrôle de l'appareil, l'enregistrement des données et leur évaluation, ainsi que pour leur sauvegarde.




2.893.0010	893 Professional Biodiesel Rancimat
------------	-------------------------------------

Le 893 Professional Biodiesel Rancimat est un système d'analyse permettant une détermination simple et fiable de la stabilité à l'oxydation du biodiesel (ester méthylique d'acides gras, FAME) et des mélanges de biodiesel selon les normes EN 14112, EN 15751 et EN 16568. Doté de 8 positions de mesure réparties dans 2 blocs de chauffage. L'afficheur intégré indique l'état de l'appareil et de chacune des positions de mesure. Les touches de démarrage pour chaque position de mesure permettent le démarrage de la mesure sur l'appareil. Des récipients à réaction à usage unique et des accessoires lavables en machine réduisent les coûts et le travail de nettoyage à un minimum. Ceci fait économiser du temps et de l'argent tout en améliorant l'exactitude et la reproductibilité de manière considérable.

Tous les accessoires nécessaires aux déterminations sont fournis. Le logiciel StabNet est requis pour le contrôle de l'appareil, l'enregistrement des données et leur évaluation, ainsi que pour leur sauvegarde.

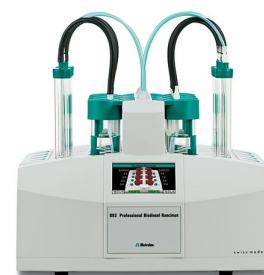

Le 895 Professional PVC Thermomat est un système d'analyse permettant une détermination automatique de la stabilité thermique du polychlorure de vinyle (PVC) et des copolymères apparentés. Doté de 8 positions de mesure réparties dans 2 blocs de chauffage. L'afficheur intégré indique l'état de l'appareil et de chacune des positions de mesure. Les touches de démarrage pour chaque position de mesure permettent le démarrage de la mesure sur l'appareil. Des récipients à réaction à usage unique et des accessoires lavables en machine réduisent les coûts et le travail de nettoyage à un minimum. Ceci fait économiser du temps et de l'argent tout en améliorant l'exactitude et la reproductibilité de manière considérable.

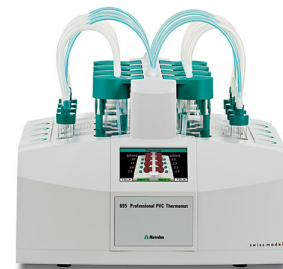

Tous les accessoires nécessaires aux déterminations sont fournis. Le logiciel StabNet est requis pour le contrôle de l'appareil, l'enregistrement des données et leur évaluation, ainsi que pour leur sauvegarde.

Mise à niveau de StabNet 1.0 ou 1.1 (Full) vers StabNet 2.X Full.

