


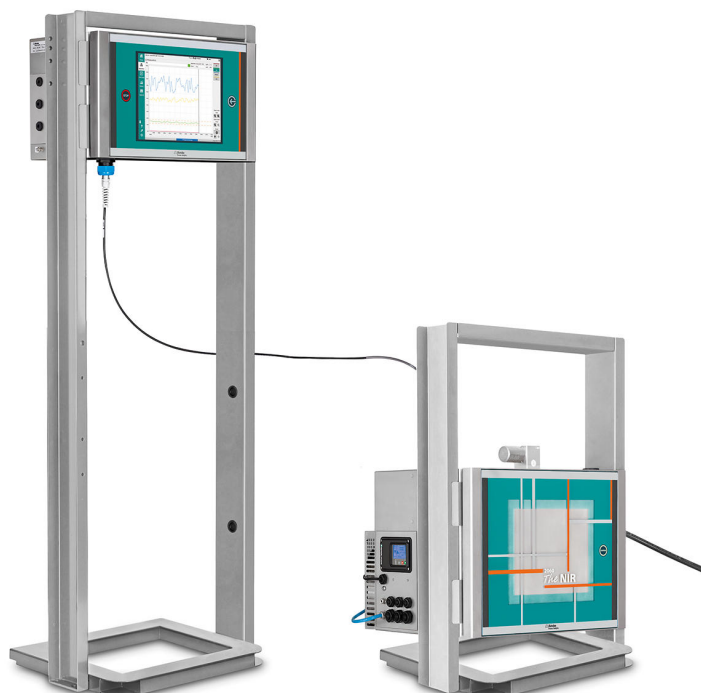

2060 The NIR-REx Analyzer

A472060040C

Le 2060 *The NIR-REx Analyzer* est la nouvelle génération d'instruments de spectroscopie de processus de Metrohm Process Analytics. Avec sa conception unique et éprouvée de l'intérieur vers l'extérieur, il fournit des résultats précis toutes les *10 secondes*. Il peut fournir une analyse non destructive des liquides et des solides directement dans la ligne de traitement ou dans une cuve à réaction en utilisant des fibres optiques et des sondes de contact. Il a été conçu pour connecter jusqu'à cinq (5) sondes et/ou cellules à circulation. Chacun des cinq canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide de notre logiciel propriétaire embarqué polyvalent.

Dans le cadre de la plate-forme 2060, le 2060 *The NIR-REx Analyzer* permet la séparation unique de l'interface humaine (IH) et de l'armoire NIR par des fibres optiques. Cette configuration à distance permet de placer les deux armoires à différents endroits de l'usine en fonction des préférences du client et des classifications de zones.

De plus, cet appareil d'analyse est certifié IECEx et est conforme aux directives européennes ATEX. Il a été conçu avec un système de purge/pressurisation approuvé ainsi que des dispositifs intrinsèquement électroniques, empêchant toute fumée ou gaz potentiellement explosifs de l'air ambiant de pénétrer dans l'enceinte de l'appareil d'analyse. De plus, il est disponible en trois autres versions : le 2060 *The NIR Analyzer*, 2060 *The NIR-R Analyzer* et 2060 *The NIR-Ex Analyzer*.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
A472060020C	2060 The NIR Analyzer

Le 2060 *The NIR Analyzer* est la nouvelle génération d'appareils de spectroscopie de processus de Metrohm Process Analytics. Avec sa conception unique et éprouvée de l'intérieur vers l'extérieur, il fournit des résultats précis toutes les *10 secondes*. Il peut fournir une analyse non destructive des liquides et des solides directement dans la ligne de traitement ou dans une cuve à réaction en utilisant des fibres optiques et des sondes de contact. Il a été conçu pour connecter jusqu'à cinq (5) sondes et/ou cellules à circulation. Chacun des cinq canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide de notre logiciel propriétaire embarqué polyvalent.



Dans le cadre de la plate-forme 2060, le 2060 *The NIR Analyzer* a une conception modulaire et est disponible en trois autres versions : le 2060 *The NIR-R Analyzer*, 2060 *The NIR-Ex Analyzer* et 2060 *The NIR-REx Analyzer*.


A472060030C	2060 The NIR-Ex Analyzer
-------------	--------------------------

Le 2060 *The NIR-Ex Analyzer* est la nouvelle génération d'appareils de spectroscopie de processus de Metrohm Process Analytics. Avec sa conception unique et éprouvée de l'intérieur vers l'extérieur, il fournit des résultats précis toutes les *10 secondes*. Il peut fournir une analyse non destructive des liquides et des solides directement dans la ligne de traitement ou dans une cuve à réaction en utilisant des fibres optiques et des sondes de contact. Il a été conçu pour connecter jusqu'à cinq (5) sondes et/ou cellules à circulation. Chacun des cinq canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide de notre logiciel propriétaire embarqué polyvalent.



De plus, cet appareil d'analyse est certifié IECEx et est conforme aux directives européennes ATEX. Il a été conçu avec un système de purge /pressurisation approuvé ainsi que des dispositifs intrinsèquement électroniques, empêchant toute fumée ou gaz potentiellement explosifs de l'air ambiant de pénétrer dans l'enceinte de l'appareil d'analyse. De plus, il est disponible en trois autres versions : le 2060 *The NIR Analyzer*, 2060 *The NIR-R Analyzer* et 2060 *The NIR-REx Analyzer*.

Le 2060 *The* NIR-R Analyzer est la nouvelle génération d'instruments de spectroscopie de processus de Metrohm Process Analytics. Avec sa conception unique et éprouvée de l'intérieur vers l'extérieur, il fournit des résultats précis toutes les *10 secondes*. Il peut fournir une analyse non destructive des liquides et des solides directement dans la ligne de traitement ou dans une cuve à réaction en utilisant des fibres optiques et des sondes de contact. Il a été conçu pour connecter jusqu'à cinq (5) sondes et/ou cellules à circulation. Chacun des cinq canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide de notre logiciel propriétaire embarqué polyvalent.

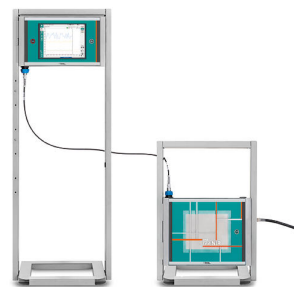

Dans le cadre de la plate-forme 2060, le 2060 *The* NIR-R Analyzer permet la séparation unique de l'interface humaine et de l'armoire NIR par des fibres optiques. Cette configuration à distance permet de placer les deux armoires à différents endroits de l'usine en fonction des préférences du client et des classifications de zone. En outre, il est disponible en trois autres versions : le 2060 *The* NIR Analyzer, 2060 *The* NIR-Ex Analyzer et 2060 *The* NIR-REx Analyzer.

Lampe de rechange pour 2060 *The* NIR Analyzer et OMNIS NIR Analyzer avec compteur d'heures intégré.

