



TacticID-1064 ST

BWT-840001134

Le TacticID®-1064 ST est un appareil d'analyse portable Raman 1 064 nm pour une identification rapide sur le terrain d'explosifs, de stupéfiants et d'autres matières suspecte. La capacité « See-through » (transparence) du TacticID-1064 ST peut analyser des échantillons de manière non destructive à travers un emballage opaque et transparent, avec un niveau de menace d'échantillon affiché en évidence pour les premiers intervenants, le personnel de sécurité, les forces de l'ordre, les démineurs, les douanes et la protection des frontières, et les équipes de gestion de matières dangereuses pour leur permettre d'agir rapidement avec un minimum de contact avec l'échantillon.

Le TacticID-1064 ST utilise la spectroscopie Raman éprouvée, en combinaison avec la technologie brevetée STRaman®, permettant aux utilisateurs d'obtenir une identification exploitable en temps réel de produits chimiques inconnus, de stupéfiants, de médicaments, d'explosifs et de nombreuses autres substances, même à travers des barrières opaques, réduisant considérablement l'incertitude opérationnelle et le temps de réponse.

Le TacticID-1064 ST, avec une excitation laser à 1 064 nm et un adaptateur ST pour les applications « see-through » (transparence), exploite une vaste gamme d'échantillons, délivrant un spectre sans fluorescence, sans brûlure d'échantillon, permettant aux utilisateurs d'identifier les matériaux sombres et colorés, les échantillons de rue difficiles, les mélanges et les matériaux hétérogènes directement à travers l'emballage.

Ce système IP68 dispose d'un écran haute luminosité avec écran tactile et/ou interface matérielle par boutons pour faciliter l'utilisation, même à travers un équipement de protection.


Contenu de la livraison BWT-840001134

Qt.	Order no.	Description	
1 STK	BWT-840000295	Flacons pour fluides de 15 mm de diamètre Lot de 6 flacons en verre borosilicate (diamètre 15 mm) avec sachet.	
1 STK	BWT-840000344	Adaptateur de support de flacon Adaptateur pour support de flacon, compatible avec des flacons de 15 mm de diamètre.	
1 STK	BWT-840000345	Spectromètre Raman portable: adaptateur de flacon Accessoire pour spectromètre Raman portable : adaptateur de flacon. NR2-BSA	
1 STK	BWT-840000348	Capuchon de validation en polystyrène Capuchon de validation en polystyrène, avec polystyrène intégré selon la norme ASTM.	

1 STK

BWT-840000353 Capuchon protecteur de la tige

Capuchon protecteur de la tige des appareils Raman portables, lot de 10 unités.

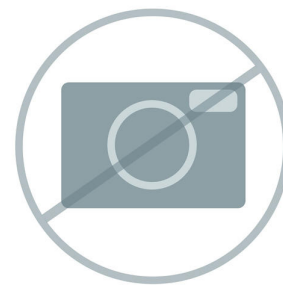

1 STK

BWT-840000329 Sachet pour flacons de 15 mm

Sachet pour flacons de 15 mm.



1 STK

BWT-840000419 Stylet/stylobille pour TacticID

Combinaison de stylet et stylobille pour écran tactile (lot de 5 unités).

TID-STY



1 STK

BWT-840000858 Câble USB

Câble USB compatible avec le port micro-USB jusqu'au type A USB 2.0.



1 STK

BWT-840000948 Câble host USB OTG

Câble host USB OTG pour le transfert des données entre une clé USB et un système à main.



1 STK

BWT-840000949 Adaptateur à large spot

L'adaptateur d'échantillonnage à large spot est conçu pour une utilisation avec des systèmes Raman portables de Metrohm, offrant une taille de spot plus grande et une profondeur d'échantillonnage accrue afin de réduire le risque de combustion des échantillons, en particulier d'échantillons sensibles ou de couleur foncée. De plus, cet adaptateur prend en charge les fonctions de transparence («°see-through°») lorsqu'il est utilisé avec des appareils compatibles avec le logiciel de transparence.



TID-STA

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

BWT-840000294	Station de recharge de batterie
---------------	---------------------------------

Station de recharge de la batterie au lithium-ion (pour une recharge de NR-BAT et TID-BAT uniquement).



BWT-840000361	Appareil de mesure manuel de la puissance laser
---------------	---

Appareil de mesure de la puissance laser, modèle à tige, étalonné. Plage : 5 microwatts à 1 watt. Utilisation pour QO/QP et la certification annuelle de l'appareil de mesure de la puissance laser.



BWT-840000428	Routeur WLAN
---------------	--------------

Routeur WLAN portable fonctionnant sur pile, connexion 3G/4G.



BWT-840000969	Sonde d'immersion Raman portatif 1064
---------------	---------------------------------------

Accessoire pour spectromètre Raman 1064 portatif : sonde à immersion par contact, longueur 6", distance de travail env. 1 mm, pression de service jusqu'à 2 bars à température ambiante.

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 Spectromètre Raman portable : adaptateur pour grands flacons (1064)

Accessoires pour spectromètre Raman portable 1064 : adaptateur pour grands flacons avec une distance de travail de 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840000498 Cassette pour piles non rechargeables

Cassette pour piles TacticID pour six piles non rechargeables de type 123A (p. ex. Surefire). Sans piles.



BWT-840001154 Sacoche pour série HH Raman

Sacoche pour série TacticID. Fabriquée dans un tissu résistant 1000d, de nombreuses poches ergonomiques et un compartiment conçu pour une utilisation intensive et résistant à l'usure. Compatible avec tous les produits TacticID et les produits NanoRam. Destiné au transport uniquement.

TID-SBG



BWT-840000414 Adaptateur secteur 18 V

Adaptateur secteur pour 18 V CC, 1,67 A. Les fiches pour USA, EU, UK et AU sont fournies.

TID-PWA

