



Cellule à écoulement pour essais magnétiques avec électrodes à film épais

DRP-CFLWCL-MAGN

Cellule à écoulement à géométrie wall-jet au méthacrylate associée à un puissant aimant conçu pour réaliser les analyses FIA avec des billes magnétiques. À utiliser avec les électrodes à film épais de format standard comportant une cellule électrochimique au centre de la bande. Raccords inclus.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
DRP-110STR-U50	Électrode en carbone à film épais modifié à la streptavidine


Les électrodes en carbone à film épais modifié à la streptavidine procurent une surface à haute affinité stable pour un grand nombre de molécules biotinylées.



DRP-CAC

Connecteur de câble pour électrodes à film épais

Pour connecter des électrodes DropSens à film épais à toute sorte de potentiostat. Recommandé pour les analyses de lots ou d'écoulement.

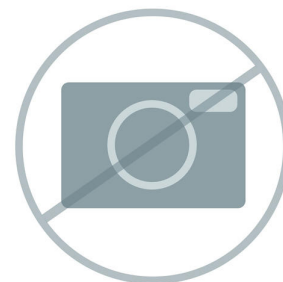

DRP-C013-U75

Électrode à film épais en argent (aux. : C ; réf. : Ag)

Électrode à film épais en argent (aux. : C ; réf. : Ag). Électrode de travail de 1,6 mm de diamètre.



DRP-CAST

Connecteur de câble μ Stat pour électrodes à film épais

Pour connecter tout équipement DropSens à des électrodes DropSens à film épais



DRP-F10-U75

Électrode à film épais en ferrocyanure/carbone

Électrode à film épais en ferrocyanure/carbone. Idéale pour la détermination du peroxyde d'hydrogène à faible potentiel de détection.

