


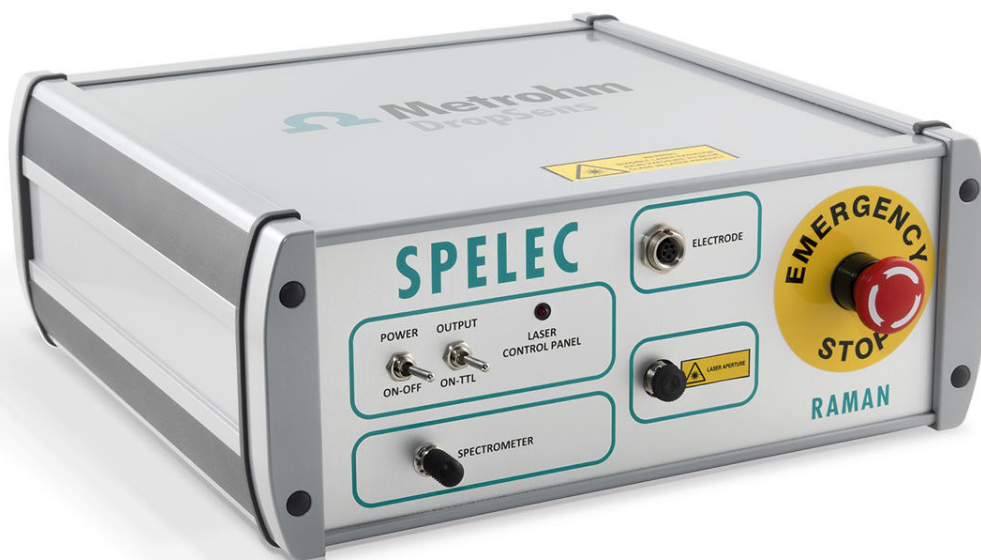

Appareil de mesure spectroscopique et électrochimique Raman (532 nm laser)

DRP-SPELECRAMAN532

SPELECRAMAN 532 est un appareil permettant d'effectuer des mesures spectroélectrochimiques Raman. Il combine dans un seul boîtier un laser de classe 3B (532 nm $\pm$ 0,5), un bipotentiostat /galvanostat et un spectromètre (gamme de longueur d'onde : 534 à 700 nm et un décalage Raman de 75 à 4 520 cm⁻¹), fourni avec un logiciel dédié à la spectroscopie et à l'électrochimie permettant une synchronisation des expériences optiques et électrochimiques.

Contenu de la livraison DRP-SPELECRAMAN532

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

DropView
SPELEC

Logiciel DropView SPELEC

DropView SPELEC est un logiciel de spectroélectrochimie qui pilote l'appareil SPELEC en offrant une synchronisation parfaite des mesures optiques et électrochimiques et des outils avancés pour le traitement de données.



1 STK

DRP-
RAMANPROBE

Sonde Raman

Sonde de réflexion conçue pour une mise en œuvre avec une seule longueur d'onde d'excitation de 785 nm (jusqu'à 500 mW). Adaptée au travail avec la cellule DropSens Raman pour électrodes à film épais ou toute autre configuration Raman conventionnelle.



1 STK


DRP-CABSTAT1

Connecteur de câble un nœud μ Stat 8000(P)/4000
(P) pour électrodes conventionnelles

Pour connecter des nœuds individuels du μ Stat 8000(P)/4000(P) aux électrodes conventionnelles



Accessoires optionnels

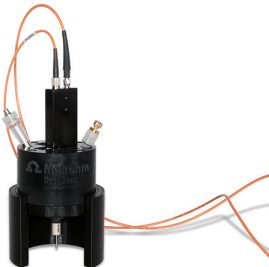Order no.	Description	
DRP-RAMANCELL	Cellule Raman pour électrodes à film épais	
	Cellule de réflexion en téflon noir pour effectuer une spectroélectrochimie Raman à l'aide d'électrodes à film épais en combinaison avec la réf. RAMANPROBE.	
DRP-RAMANCELL-C	Cellule spectro-électrochimique Raman pour électrodes conventionnelles	
	Cellule en PEEK pour mesures spectro-électrochimiques Raman. Conçue pour une utilisation avec la réf. RAMANPROBE et les électrodes Metrohm conventionnelles.	