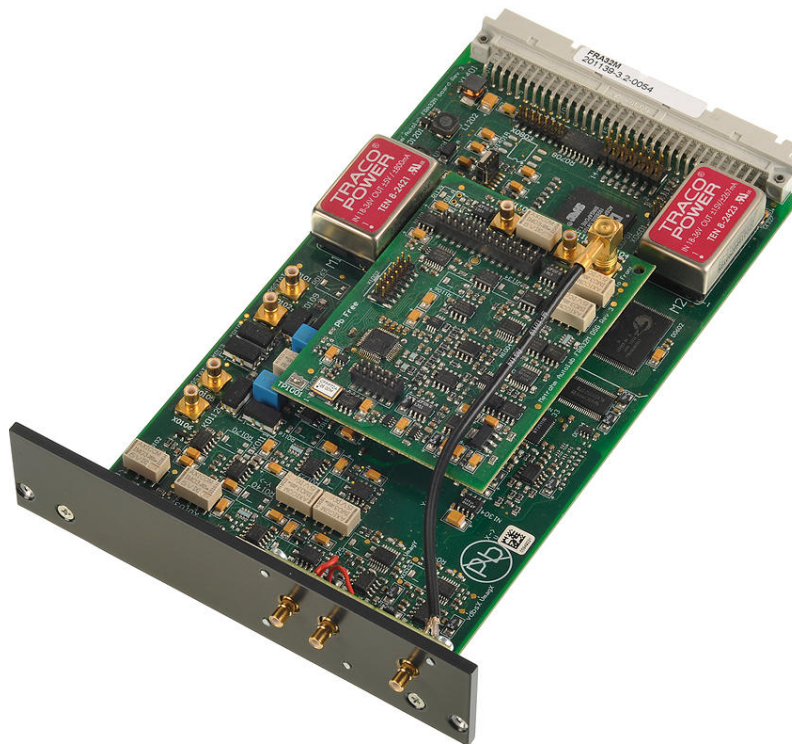




Module bipotentiostat bi-mode

MBA.S

Le MBA.S est un module bipotentiostat supplémentaire qui peut être installé dans un MultiBA (MBA) Autolab potentiostat/galvanostat ajout une électrode de travail complémentaire à l'appareil MBA. Un maximum de 5 modules MBA.S et un module FRA32M.S peuvent être installés dans un appareil MBA.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
RRDE.AUPT.S	Électrode tournante à disque et à anneau, disque en or, anneau en platine

La pointe de l'électrode RRDE est constituée d'un disque en or de 5 mm avec un anneau concentrique en platine à une distance de 375 μm dont l'efficacité de collecte théorique est de 24,9 %.



La pointe de l'électrode RRDE est constituée d'un disque en carbone vitreux de 5 mm avec un anneau concentrique en platine à une distance de 375 μm dont l'efficacité de collecte théorique est de 24,9 %.

