



797 VA Computrace avec addition standard automatique pour l'analyse de traces

MVA-02

MVA-02 est un système d'analyse semi-automatisé et facile à commander destiné à l'analyse de traces par voltampérométrie et à la formation. Il est par exemple facile de déterminer des métaux lourds dans des échantillons individuels sans passeur d'échantillons. Ce système comprend le 797 VA Computrace avec deux 800 Dosino pour l'addition automatique de solution standard et de l'électrolyte de base.

Le système est fourni avec un jeu d'accessoires complet permettant d'installer un poste de mesure complet et comprend aussi le logiciel VA Computrace et les électrodes suivantes : l'électrode multi-mode pro (MME pro), l'électrode de référence Ag/AgCl et l'électrode auxiliaire en platine.

Contenu de la livraison MVA-02

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

2.800.0010

800 Dosino

Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attachant (150 cm).



1 STK

6.1608.050

Four flacon sécheur / 100 mL / GL 45



1 STK

6.1608.090

Flacon / 250 mL / GL 45



2 STK

6.1618.060

Adaptateur de filetage GL 45 auf GL 45

Adaptateur de filetage (GL 45 à GL 45); entre autres pour les flacons à réactifs avec bride surélevée



1 STK

6.1805.020

Tuyau en FEP / M6 / 52 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.120

Tuyau en FEP / M6 / 100 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1819.010

Tuyau en PTFE

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA



1 STK

6.2055.100

Support de flacon double

Support pour 2 flacons à 1 L. Pour l'équipement d'aspiration 6.5617.000



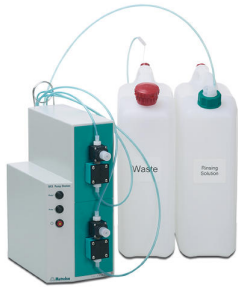
807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station pour les systèmes Compact VA	
	La 843 Membrane Pump Station dispose de deux pompes à membrane intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du bécher de mesure dans des systèmes VA et CVS semi-automatisés ou entièrement automatisés à l'aide du 797 VA Computrace. La variante pour la voltampérométrie dispose de tous les accessoires nécessaires au rinçage automatique et au vidage du bécher de mesure.	
2.846.0010	846 Dosing Interface	