



797 VA Computrace entièrement automatisé pour la CVS

MVA-13

MVA-13 est un système d'analyse pour la détermination entièrement automatisée d'additifs organiques dans des séries d'échantillons de bains galvaniques par voltampérométrie cyclique inverse (Cyclic Voltammetric Stripping, CVS) dans le laboratoire de routine. Avec le 838 Advanced VA Sample Processor, jusqu'à 56 échantillons peuvent être analysés afin de déterminer leur teneur en supprimeurs. Pour la détermination de la teneur en brillanceurs, il est possible d'analyser jusqu'à 28 échantillons automatiquement. La possibilité de recalibrer des méthodes pendant une série d'échantillons garantit une exactitude extrêmement élevée. Ce système comprend un 797 VA Computrace pour la CVS, un 838 Advanced VA Sample Processor, trois 800 Dosino et un équipement de rinçage.

Le système est fourni avec un jeu d'accessoires complet permettant d'installer un poste de mesure complet et comprend aussi le logiciel VA Computrace et les électrodes suivantes : l'électrode à disque tournante (RDE), l'électrode de référence Ag/AgCl et l'électrode auxiliaire en platine.

Contenu de la livraison MVA-13

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

3 STK

2.800.0010

800 Dosino

Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attenant (150 cm).



1 STK

2.843.0040

843 VA Membrane Pump Station pour les systèmes Compact VA

La 843 Membrane Pump Station dispose de deux pompes à membrane intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du b cher de mesure dans des syst mes VA et CVS semi-automatis s ou enti rement automatis s   l'aide du 797 VA Computrace.

La variante pour la voltamp rom trie dispose de tous les accessoires n cessaires au rin age automatique et au vidage du b cher de mesure.



2 STK

6.1608.050

Four flacon s cheur / 100 mL / GL 45



1 STK

6.1608.070

Flacon pour  luants / 2 L / GL 45



2 STK

6.1618.060

Adaptateur de filetage GL 45 auf GL 45

Adaptateur de filetage (GL 45 à GL 45); entre autres pour les flacons à réactifs avec bride surélevée



1 STK

6.1805.020

Tuyau en FEP / M6 / 52 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.120

Tuyau en FEP / M6 / 100 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



3 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1819.010

Tuyau en PTFE

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA




1 STK

6.2055.100

Support de flacon double

Support pour 2 flacons à 1 L. Pour l'équipement d'aspiration 6.5617.000

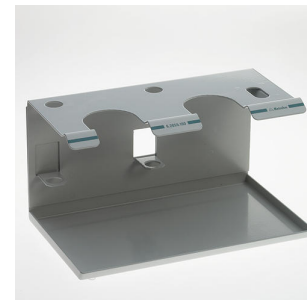

3 STK

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



1 STK


6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Accessoires optionnels

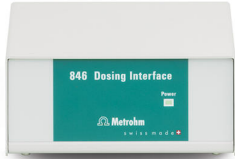Order no.	Description	
2.846.0010	846 Dosing Interface	
	Unité de commande compatible USB pour le raccordement de quatre 800 Dosino ou 805 Dosimat maximum pour les tâches de distribution et de manipulation des liquides (LQH). Pour la manier, il est nécessaire d'utiliser un Touch Control ou de la connecter à un ordinateur avec logiciel OMNIS, tiamo™, MagIC Net, viva ou 797 VA Computrace installé.	
6.1204.170	Pointe d'électrode en platine de 3 mm pour CVS	
	Pointe d'électrode métallique en platine (Pt), diamètre du disque d'électrode 3 mm, surface polie, raccord fileté M3. Gamme de température : 0 à 40 °C.	
6.1204.190	Pointe d'électrode en platine de 1 mm pour CVS	
	Pointe d'électrode métallique en platine (Pt), diamètre du disque d'électrode 1 mm $\pm 0,02$ mm, surface polie, tige en verre, raccord fileté M3. Erreur de concentricité : 0,2 mm. Gamme de température : 0 à 50 °C.	