


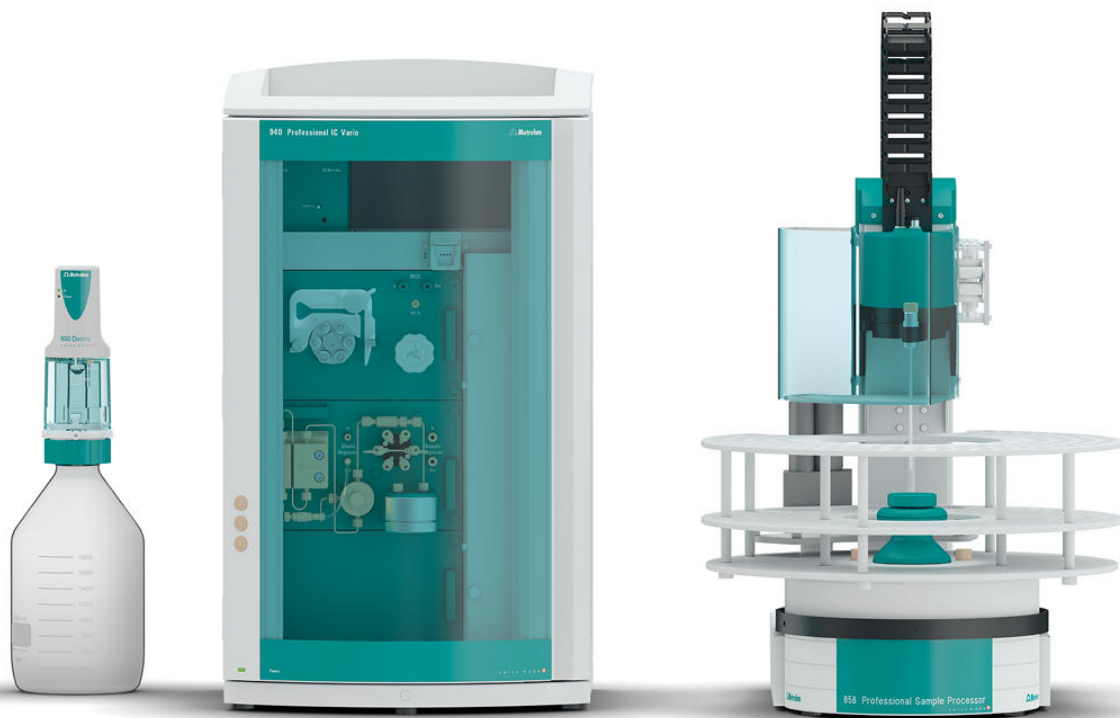

« ProfIC Vario 14 Anion » – système Professional IC Vario avec technique intelligente d'injection pick-up de Metrohm (MiPuT)

ProfIC-Vario-14-Anion

Le système Professional IC Vario doté de la technique intelligente d'injection pick-up de Metrohm (MiPuT), de la suppression séquentielle et de la détection de conductivité permet de déterminer des anions ou des cations à partir de volumes d'échantillon extrêmement faibles.


Domaines d'application typiques :

- Utilisation universelle pour tous les types d'échantillons, si seuls de faibles volumes d'échantillon sont disponibles
- Analyse de processus biochimiques
- Extraits d'échantillons d'environnement

Représentation schématique

Instructions d'installation

Contenu de la livraison ProfIC-Vario-14-Anion

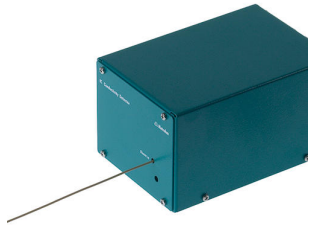Qt.	Order no.	Description
1 STK	2.940.1500	940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP
Le 940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP est l'appareil CI intelligent avec suppression séquentielle et pompe péristaltique pour la régénération du supprimeur. L'appareil peut être utilisé avec n'importe quelles méthodes de séparation et de détection. Domaines d'application typiques : • Déterminations d'anions ou de cations avec suppression séquentielle et détection de conductivité • Analyse de traces pour les anions ou les cations • Surveillance en ligne pour les anions ou les cations		
		
1 STK	2.850.9010	IC Conductivity Detector
Détecteur de conductivité haute performance compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Excellente constance de la température, tout le traitement du signal au sein du bloc de détecteur protégé et DSP – Digital Signal Processing – de la dernière génération garantissent une précision de mesure optimale. Grâce à la plage de travail dynamique, aucun changement de plage n'est nécessaire (même automatique).		
		
1 STK	2.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump
Le 858 Professional Sample Processor – Pump traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique bidirectionnelle à deux voies intégrée soit par un 800 Dosino.		
		

1 STK

2.800.0010

800 Dosino

Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attachant (150 cm).



1 STK

6.5330.170

Équipement CI : MiPuT

Jeu d'accessoires pour le montage d'un Dosino pour le prélèvement d'échantillons (technique intelligente d'injection pick-up de Metrohm).



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2041.480	Rack d'échantillons, 159 x 2 mL et 3 x 300 mL (PVC) Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor pour 159 récipients d'échantillon et 3 flacons de rinçage. Les récipients d'échantillon de 2 mL d'Eppendorf suivants conviennent : 6.1608.080, 6.1627.000. Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)	
6.2842.000	Rotor MSM-HC A Rotor de supprimeur pour tous les instruments CI avec MSM-HC (Metrohm Suppressor Module à haute capacité)	
6.2844.000	Rotor MSM-LC A Rotor de supprimeur pour utilisation avec colonnes de séparation de 2 mm.	
6.2832.000	Rotor MSM A Rotor pour supprimeur pour tous les appareils CI avec MSM (Module Supprimeur Metrohm)	

6.2842.020 Manchon adaptateur, MSM

Grâce au manchon adaptateur, il est possible d'installer dans le boîtier de rotor aussi bien le rotor MSM A que le rotor MSM-LC A.



2.941.0010 941 Eluent Production Module

Le 941 Eluent Production Module fabrique automatiquement un éluant. Il permet de travailler en continu sans aucune intervention manuelle et garantit des temps de rétention stables. Il se combine avec tous les appareils CI de Metrohm et est contrôlé par MagIC Net.



6.2842.200 Rotor MSM-HC C

Rotor de supprimeur pour tous les instruments CI avec moteur MSM-HC (Metrohm Suppressor Module à haute capacité) pour la suppression des cations.



Logiciel professionnel de chromatographie de Metrohm pour le contrôle de tous les systèmes Professional IC intelligents, des appareils Compact IC et leurs périphériques, de tous les détecteurs et des différents passeurs d'échantillons, du 800 Dosino, du 771 Compact Interface, etc. Le logiciel assure le contrôle, permet d'enregistrer, d'évaluer et de contrôler les données, ainsi que de générer les rapports d'analyses par chromatographie ionique.



Interface utilisateur graphique pour les opérations de routine, logiciels complets de base de données, développement de méthodes, configuration et commande de système manuelle ; administration des utilisateurs très flexible, opérations de bases de données performantes, fonctions d'exportation de données complètes, générateur de rapports configurable individuellement, commande et contrôle des différents composants du système et des résultats de chromatographie ionique.

MagIC Net Professional satisfait totalement à la directive FDA 21 CFR Part 11 ainsi qu'aux BPL.

MagIC Net est disponible dans 15 langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, chinois traditionnel, français, italien, espagnol, portugais, bulgare, tchèque, hongrois, japonais, coréen, russe, slovaque

Dans cette version, l'interface utilisateur graphique a été modernisée, ce qui améliore entre autres la mise à l'échelle et la netteté de l'interface utilisateur sur les écrans 4K.

1 licence

L'installation et les documents sont fournis sur une clé USB.



Logiciel de chromatographie compatible client/serveur de Metrohm pour le contrôle de tous les systèmes Professional IC intelligents, des appareils Compact IC et leurs périphériques, de tous les détecteurs et des différents passeurs d'échantillons, du 800 Dosino, du 771 Compact Interface, etc.

Le logiciel assure le contrôle, permet d'enregistrer, d'évaluer et de contrôler les données, ainsi que de générer les rapports d'analyses par chromatographie ionique.

Les données et méthodes sont sauvegardées de manière centralisée sur le serveur.

Interface utilisateur graphique pour les opérations de routine, logiciels complets de base de données, développement de méthodes, configuration et commande de système manuelle ; administration des utilisateurs très flexible, opérations de bases de données performantes, fonctions d'exportation de données complètes, générateur de rapports configurable individuellement, commande et contrôle des différents composants du système et des résultats de chromatographie ionique.

MagIC Net Multi satisfait totalement à la directive FDA 21 CFR Part 11 ainsi qu'aux BPL.

MagIC Net est disponible dans 15 langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, chinois traditionnel, français, italien, espagnol, portugais, bulgare, tchèque, hongrois, japonais, coréen, russe, slovaque

Dans cette version, l'interface utilisateur graphique a été modernisée, ce qui améliore entre autres la mise à l'échelle et la netteté de l'interface utilisateur sur les écrans 4K.

La performance des systèmes client-serveur avec serveurs hors du réseau interne de l'entreprise a été améliorée.

Version client/serveur avec 3 licences
