



OMNIS Titration Module con agitatore magnetico

2.1002.0110

Modulo di titolazione con agitatore magnetico per il collegamento a un OMNIS Titrator per l'ampliamento di un'ulteriore stand di titolazione, una buretta per titolazione/dosaggio e fino a due moduli di misura (analogici e digitali). Unità cilindriche a scelta libera da 5, 10, 20 o 50 mL.

Parti incluse 2.1002.0110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.01600.010	OMNIS Liquid Adapter

Adattatore per il collegamento di bottiglie di reagente con tecnologia 3S a un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS.



1 PCS

6.01601.000

Sifone per bottiglia multiuso

Sifone per bottiglia riutilizzabile con tecnologia 3S per il collegamento di bottiglie di reagente a un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS.



1 PCS

6.1608.020

Bottiglia / 1000 mL / GL 45

Bottiglia per soluzioni ausiliarie.



1 PCS

6.1903.020

Barra di agitazione / 16 mm

Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



1 PCS

6.02005.000

Supporto per elettrodo OMNIS

Supporto per elettrodo per un sistema di titolazione OMNIS.



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.050

Asta di supporto / 300 mm



1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



Supporto per bottiglia per titolatore, modulo di titolazione e Dosing Module OMNIS.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.02100.010	Modulo di misurazione digitale Canale di misurazione digitale per un titolatore, modulo di titolazione OMNIS per il collegamento di elettrodi digitali "dTrodes".	
6.02102.010	Cavo MDL CM/CF 0,5 m Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (0,5 m)	
6.02102.020	Cavo MDL CM/CF 1 m Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (1 m)	
6.02102.030	Cavo MDL CM/CF 2 m Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (2 m)	

6.02102.040 Cavo MDL CM/CF 5 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (5 m)



6.02102.050 Cavo MDL CM/CF 10 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (10 m)



6.03001.120 Unità cilindro OMNIS da 2 mL

Unità cilindro intelligente da 2 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Include tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03001.150 Unità cilindro OMNIS da 5 mL

Unità cilindro intelligente da 5 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Include tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03001.210 Unità cilindro OMNIS da 10 mL

Unità cilindro intelligente da 10 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Include tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03001.220 Unità cilindro OMNIS da 20 mL

Unità cilindro intelligente da 20 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Include tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03001.250 Unità cilindro OMNIS da 50 mL

Unità cilindro intelligente da 50 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Include tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.01503.120 Unità cilindro OMNIS da 2 mL senza accessori

Unità cilindro intelligente da 2 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.01503.150 Unità cilindro OMNIS da 5 mL senza accessori

Unità cilindro intelligente da 5 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.01503.210 Unità cilindro OMNIS da 10 mL senza accessori

Unità cilindro intelligente da 10 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.01503.220 Unità cilindro OMNIS da 20 mL senza accessori

Unità cilindro intelligente da 20 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.01503.250 Unità cilindro OMNIS da 50 mL senza accessori

Unità cilindro intelligente da 50 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



Elettrodo per pH combinato digitale per OMNIS con sensore di temperatura Pt1000 integrato. È adatto in particolare a:

- misure del pH e titolazioni in campioni difficili, viscosi o alcalini
- temperature elevate
- misure lunghe

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità.

Elettrolita di riferimento: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservazione in una soluzione di conservazione.

In alternativa: elettrolita di riferimento per misure a $T > 80^\circ\text{C}$: Idrolyte, conservazione in Idrolyte.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.



Elettrodo per pH combinato digitale per OMNIS.

L'elettrodo è adatto a titolazioni acido/basiche acquose.

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità.

Elettrolita di riferimento: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservazione in una soluzione di conservazione.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.



Elettrodo per pH combinato digitale per OMNIS con rilevatore di temperatura Pt1000 integrato per misure del pH/titolazione in mezzi acquosi poveri di ioni (ad es. acqua potabile, acqua di processo). Questo elettrodo presenta un tempo di risposta particolarmente rapido anche in questi campioni.

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità.

In caso di utilizzo di $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ come elettrolita intermedio si raccomanda la conservazione in una soluzione di conservazione.

L'elettrolita intermedio può essere sostituito con un elettrolita privo di cloruro (ad es. nitrato di potassio $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)).

Conservazione nell'elettrolita utilizzato.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.



Elettrodo per pH combinato digitale per OMNIS per tutte le titolazioni acido/basiche non acquose. La membrana di vetro è ottimizzata per le soluzioni cattive conduttrici e, grazie al diaframma flessibile a smeriglio, l'elettrodo è adatto anche a campioni sporchi.

L'elettrodo può essere usato con elettroliti di riferimento non acquosi (cloruro di litio o bromuro di tetraetilammonio).

Conservazione nel relativo elettrolita di riferimento.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.



Elettrodo per pH combinato, digitale per OMNIS con Double Junction System. Questo elettrodo è adatto per titolazioni/misure del pH di campioni

- che sporcano il sistema di riferimento del sensore (ad es. bagni, campioni contenenti solfuri)
- per i quali non è possibile utilizzare il cloruro di potassio $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ come elettrolita di riferimento (ad es. reazione tra potassio o cloruro e campione)

L'elettrodo è dotato di diaframma a smeriglio flessibile insensibile alle impurità, sostituibile all'occorrenza.

In caso di utilizzo di $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ come elettrolita intermedio si raccomanda la conservazione in una soluzione di conservazione.

L'elettrolita intermedio può essere sostituito con un elettrolita adatto (ad es. nitrato di potassio $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)). Conservazione nell'elettrolita utilizzato.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.



Elettrodo ad anello di platino combinato digitale per OMNIS con una membrana di vetro per pH come elettrodo di riferimento.

Questo elettrodo privo di manutenzione è adatto alle titolazioni redox con valore di pH costante, ad es.

- iodometria
- cromatometria
- cerimetria
- permanganometria

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.



Elettrodo ad anello d'argento combinato digitale per OMNIS con un diaframma fisso a smeriglio.

Questo elettrodo è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH variabile (titolante nitrato di argento) ad es. di:

- cloruro, bromuro, ioduro
- solfuri
- idrogeno solforato
- mercaptano
- cianuro

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità. Come elettrolita di riferimento e per la conservazione viene utilizzato $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.



Elettrodo ad anello di platino combinato digitale per OMNIS con un diaframma fisso a smeriglio.

Questo elettrodo è adatto alle titolazioni redox con valore di pH variabile ad es.

- tenore di ossigeno secondo il metodo di Winkler
- determinazione di perossido di idrogeno con KMnO_4
- titolazioni per diazotazione

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità. Come elettrolita di riferimento e per la conservazione viene utilizzato $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.



Elettrodo calcio-selettivo combinato digitale per OMNIS.

Questo elettrodo iono-selettivo è adatto per:

- misure di ioni di Ca^{2+} ($1 \cdot 10^{-7}$ fino a 1 mol/L) in soluzioni acquose
- titolazioni (di ritorno) complessometriche (ad es. determinazione della durezza dell'acqua)

Grazie allo stelo di plastica in PP robusto/a prova di rottura e alla protezione antiurto per la membrana polimerica, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico.

Come elettrolita di riferimento viene utilizzato $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$.

Gli elettrodi dTrodes possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.



Cavo di prolungamento (lunghezza 0,55 m) per il collegamento di un OMNIS Liquid Adapter a un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS.



6.02106.010 Cavo di prolungamento Liquid Adapter 2m

Cavo di prolungamento (lunghezza 2 m) per il collegamento di un OMNIS Liquid Adapter a un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS.



6.02104.300 Cavo dell'elettrodo testa a spina Q / spina P, 0,55 m

Cavo per il collegamento di una dTrode (testa a spina Q) a un modulo di misura digitale di OMNIS.



6.02104.310 Cavo dell'elettrodo testa a spina Q / spina P, 1,5 m

Cavo per il collegamento di una dTrode (testa a spina Q) a un modulo di misura digitale di OMNIS.



6.02104.600 Cavo dell'elettrodo testa a spina U / spina P, 0,55 m

Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico con testa a spina U a un modulo di misura analogico di OMNIS.




6.02104.610 Cavo dell'elettrodo testa a spina U / spina P, 1,5 m

Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico con testa a spina U a un modulo di misura analogico di OMNIS.



6.02104.000 Cavo dell'elettrodo testa a spina G / spina P, 0,55 m

Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.

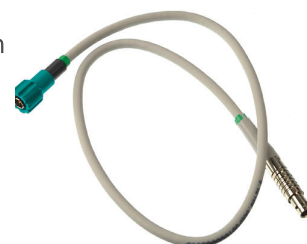

6.02104.010 Cavo dell'elettrodo testa a spina G / spina P, 1,5 m

Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.



6.02104.020 Cavo dell'elettrodo testa a spina G (temp.) / spina P, 0,55 m

Cavo per il collegamento di un sensore di temperatura (testa G) a un modulo di misura di OMNIS.



6.02104.030 Cavo dell'elettrodo testa a spina G (temp.) / spina P, 1,5 m

Cavo per il collegamento di un sensore di temperatura (testa G) a un modulo di misura di OMNIS.



6.02104.040 Cavo dell'elettrodo testa a spina G (pol.) / spina P, 0,55 m

Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico polarizzabile (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.



6.02104.050 Cavo dell'elettrodo testa a spina G (pol.) / spina P, 1,5 m

Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico polarizzabile (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.



6.02005.010 Stazione di parcheggio per elettrodi

Stazione di parcheggio per elettrodi per lo stoccaggio di elettrodi su di un sistema di titolazione OMNIS.



6.05609.010 Attrezzatura KFT per titolatore OMNIS con Polytron

Seti di accessori completo per la titolazione Karl Fischer volumetrica con Polytron.



6.05609.000 Attrezzatura KFT per titolatore OMNIS

Set di accessori completo per la titolazione Karl Fischer volumetrica.



6.02101.011 Modulo di misurazione analogico

Canale di misurazione analogico per un OMNIS Titrator o Titration Module per il collegamento di elettrodi analogici. Compatibile con OMNIS Software versione 2.18 o successiva.

