



Modulo Pick&Place con agitatore

2.1014.0110

Modulo per l'installazione nel supporto moduli dell'OMNIS Sample Robots Pick&Place. Questa stazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. L'agitatore magnetico integrato consente che i campioni preparati su un agitatore magnetico esterno vengano analizzati direttamente nel Sample Robot senza rimuovere prima l'agitatore. Tra le analisi, i sensori utilizzati vengono puliti o parcheggiati nel beaker di stoccaggio del modulo Pick&Place.

Parti incluse 2.1014.0110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1014.0110	Modulo Pick&Place con agitatore

Modulo per l'installazione nel supporto moduli dell'OMNIS Sample Robots Pick&Place. Questa stazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. L'agitatore magnetico integrato consente che i campioni preparati su un agitatore magnetico esterno vengano analizzati direttamente nel Sample Robot senza rimuovere prima l'agitatore. Tra le analisi, i sensori utilizzati vengono puliti o parcheggiati nel beaker di stoccaggio del modulo Pick&Place.



1 PCS

6.01803.000

Tubo in silicone 8/12 2,5 m

Tubo in silicone per il collegamento allo scarico del modulo Pick&Place o del modulo pompa per portare l'eventuale soluzione in eccesso nella bottiglia di scarto.



1 PCS

6.02704.000

Clip del tubo per stazione di lavoro (10 pz.)

Per il fissaggio di tubi in PVC o PTFE che portano alla stazione di lavoro.




1 PCS

6.02705.000

Guida del tubo e del cavo

Per l'organizzazione di tubi e cavi tra modulo Pick&Place e titolatore

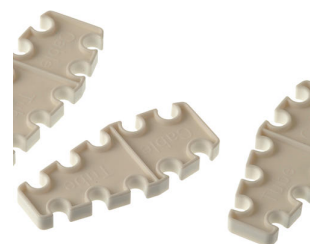

1 PCS

6.02700.000

Protezione dagli schizzi per moduli Pick&Place


Protezione dagli schizzi per moduli Pick&Place



Adattatore per tubo di scarico su moduli Pick&Place e moduli pompa nel
OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Accessori opzionali

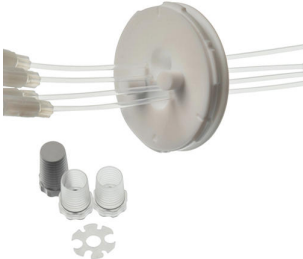Order no.	Descrizione	
6.01403.000	Testa di titolazione 6xNS14/ 3xNS9 (P&P) Testa di titolazione con 6 aperture NS14 e 3 NS 9 per l'utilizzo in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.010	Testa di titolazione 4xM10 (P&P) Testa di titolazione con 4 aperture M10 per l'utilizzo in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.020	Testa di titolazione 4xM10 per KFT (P&P) Testa di titolazione con 4 aperture M10 per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 4 raccordi a vite M10 e tappo.	
6.01403.040	Testa di titolazione 2xNS14 (P&P) Testa di titolazione con 2 aperture NS14 per l'utilizzo nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 3 punte di dosaggio ritratte. Preparata per l'equipaggiamento con ugelli di lavaggio. Un tubo di aspirazione è già inserito nella testa di titolazione.	

6.01403.030 Testa di titolazione 3xNS14/ 4x6,4mm (P&P)

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 mm per l'utilizzo di beaker da 120 mL in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 2 punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.




6.01404.030 Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 120 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 120 mL sulla slitta del modulo Pick&Place



6.01404.040 Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 75 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 75 mL sulla slitta del modulo Pick&Place

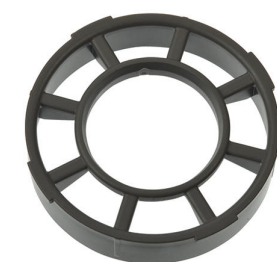

6.01403.060 Testa di titolazione 3xNS14/4x6,4 mm per beaker monouso da 200 mL (P&P)

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 per l'impiego dei beaker monouso in PP da 200 mL (6.1459.310) o dei beaker in vetro da 150 mL (alti, senza beccuccio) nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con due punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.



6.01404.020 Adattatore per beaker per campioni da 200 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 200 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.



6.01403.050 Testa di titolazione per KFT con punte rinforzate (P&P)

Testa di titolazione per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place. Oltre a 2 punte antidiffusione rinforzate, la testa di titolazione presenta un'apertura per l'utilizzo di un omogeneizzatore (Polytron 1300D) o un agitatore ad asta.



6.01404.050 Adattatore per beaker per campioni da 150 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 150 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.

