



852 Titrando con elettrodo generatore con diaframma

2.852.0050

Coulombometro comprensivo di elettrodo generatore a diaframma, agitatore magnetico 801 Stirrer e cella di titolazione volumetrica completa.

Per la determinazione della presenza d'acqua in tracce (da 10 µg a 10 mg di acqua assoluta), la coulometria è il metodo ideale per la determinazione della quantità d'acqua in liquidi, solidi e gas. Inoltre la coulometria è un metodo assoluto e pertanto consente di fare a meno della determinazione del titolo.

Intervallo di misura consigliato per la coulombometria: da 10 µg a 200 mg acqua assoluta

L'852 Titrando, oltre alla titolazione coulometrica, è in grado di effettuare anche la titolazione volumetrica Karl Fischer.

Utilizzo con OMNIS Software, software tiamo o Touch Control. Conforme ai requisiti GMP/GLP e FDA, nonché 21 CFR Parte 11, se necessario.

Parti incluse 2.852.0050

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS	1.852.0010	852 Titrand
-------	------------	-------------



1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer
-------	------------	-------------

Agitatore magnetico senza stand per il completamento dei Titrino plus, Dosimat plus, Titrand, Sample Processor, 805 Dosimat e 780/781 pH Meter. Con cavo fisso per MSB (Metrohm Serial Bus).



1 PCS	6.00346.100	Doppio elettrodo ad anello Pt per volumetria
-------	-------------	--

Elettrodo indicatore per la titolazione Karl Fischer, più robusto e più facile da pulire rispetto al tradizionale elettrodo a barra di platino (6.0338.100) grazie ai due anelli di platino fusi.



1 PCS	6.0341.100	Elettrodo a doppio filo di platino per coulometria
-------	------------	--

Elettrodo indicatore utilizzato per la titolazione Karl Fischer coulometrica.



1 PCS

6.0344.100

Elettrodo generatore con diaframma

Elettrodo generatore con diaframma per titolazione Karl Fischer coulometrica, giunto conico 29/22.

Questo elettrodo generatore è indicato in particolare per:

- Campioni con contenuto assoluto di acqua molto basso < 50 ppm
- Determinazione coulometrica del contenuto d'acqua in campioni di olio
- Applicazioni per cui vengono utilizzati reagenti chetonici
- Applicazioni per cui vengono utilizzati reagenti cattivi conduttori (aggiunta di cloroformio, xilene >10%)



1 PCS

6.1244.040

Set di guarnizioni

Set di guarnizioni per 6.1414.030. Il set è composta da una guarnizione e da diversi O-Ring.



1 PCS

6.1403.030

Tubo di essiccazione KF per cella coulometrica

Per KF-Coulometer.



1 PCS

6.1403.040

Tubo di essiccazione per KF

Da usare con KF



1 PCS 6.1414.030 Parte superiore della cella di titolazione KF con 5 aperture

Per titolazioni KF volumetriche.



1 PCS 6.1415.220 Cella di titolazione / 20-90 mL



1 PCS 6.1415.250 Cella di titolazione / 50-150 mL



1 PCS 6.1437.000 Stopper SGJ SGJ 14



1 PCS

6.1446.060

Tappo / B-14/15 / M10



2 PCS

6.1448.010

Setto da 12 mm, 5 pezzi

Set di 5 unità.



2 PCS

6.1448.020

Setti da 16 mm, 5 pezzi

Set di 5 unità.



1 PCS

6.1464.320

Cella di titolazione KF / 80-250 mL / coulometrico



2 PCS

6.1903.020

Barra di agitazione / 16 mm

Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm



3 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.




1 PCS

6.2001.090

Piastra per due posti di titolazione

Doppio stand per l'attacco di 2 x 801, 803, 804 ad un Titrando

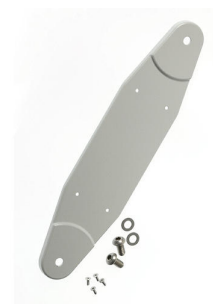

2 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



2 PCS

6.2016.030

Asta di supporto /250 mm



2 PCS

6.2043.005

Clip di tenuta per bottiglie

Clip per bottiglie di reagente nelle unità Intercambiabili



1 PCS

6.2047.020

Supporto per cella di titolazione

Supporto per cella di titolazione per celle conduttimetriche.



2 PCS

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



1 PCS

6.2104.120

Cavo per elettrodo 1 m, H

Con spina H. Per collegare elettrodo generatore - KF Coulometer.



1 PCS

6.2412.000

Navetta pesatrice

Navetta pesatrice in vetro per coperchio cella di titolazione 6.1414.030 o cella di titolazione 6.1455.31X, 6.1464.32X, 6.1465.320. Per determinazioni in acqua KF. Include tubo di protezione.



1 PCS

6.2701.040

Tappo a vite GL 18 con foro

In PBT. Con foro per il setto 6.1448.020. Per la cella senza diaframma 6.5405.000 e recipienti di titolazione 6.1464.32X e 6.1465.320.



3 PCS

6.2713.000

Manicotto in PTFE NS14

Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 14.



1 PCS

6.2713.010

Manicotto in PTFE NS29

Manicotto per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 29.



1 PCS

6.2713.020

Manicotto in PTFE NS19

Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 19.



2 PCS

6.2730.010

Vite

In PP. Insieme con i setti 6.1448.010 o per montare il tubo di essiccazione 6.1403.040 o l'elettrodo 6.0338.100 nei coperchi delle celle di titolazione di KF 6.1414.030 e 6.1414.040. Da usare per le titolazioni KF



1 PCS

6.2730.020

Tappo con setto

Con O-ring E.301.0041. Per i setti 6.1448.010 e il coperchio della cella di titolazione 6.1414.030. Da usare per le applicazioni KF



4 PCS

6.2730.030

Tappo

Completo di ugello e o-ring. Per i coperchi della cella di titolazione 6.1414.030. Da usare con strumenti KF, VA-Stand, VA Computrace e IC Dilution.



1 PCS

6.2738.000

Imbuto

Da usare con KF Coulometer.



2 PCS

6.2816.030

Ago con raccordo Luer

Ago per il riempimento del mercurio nel Multi Mode Electrode e per l'aggiunta di campione nella titolazione Karl Fischer.



2 PCS

6.2816.090

Siringa 5 mL

Siringa 5 mL in PP, con raccordo Luer



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
2.860.0010	860 KF Thermoprep L'860 KF Thermoprep serve per la preparazione termica dei campioni nella titolazione Karl Fischer. Molte sostanze non sono adatte per la titolazione Karl-Fischer diretta perché non sono solubili, reagiscono con il reagente KF oppure perché cedono l'acqua in essi contenuta solo molto lentamente o solo ad alte temperature. I campioni vengono inseriti nel forno in fiale per campioni chiuse ermeticamente e in seguito possono essere determinati con qualsiasi titolatore KF volumetrico o coulometrico.
6.2148.020	RS-232/USB Box Permette di ampliare il Titrand, gli USB Sample Processor, la Dosing Interface e il Titrosampler con due interfacce RS 232 per il collegamento di bilance, PC, LIMS. È necessario il cavo 6.2151.030.
2.136.0100	Polytron PT 1300 D Polytron PT 1300 D - versione Metrohm Omogenizzatore che può essere comandato direttamente tramite OMNIS Software, tiamo™ o Touch Control. Il Polytron PT 1300 D è composto da uno strumento di controllo e da un azionamento. Il sistema di accoppiamento sull'azionamento consente il semplice e veloce scambio degli aggregati senza attrezzi supplementari. I campioni solidi possono essere ridotti senza fatica. Lo strumento è perfettamente adatto per una buona miscelazione dei campioni viscosi.



2.800.0010

800 Dosino

800 Dosino è un drive con hardware di scrittura/lettura per Unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (150 cm).



2.803.0010

803 Ti Stand con agitatore e pompa

Stand di titolazione compatto con agitatore magnetico e pompa integrata per l'aggiunta di solventi e per aspirare via il contenuto della cella di titolazione. Adatto per titolazioni Karl Fischer con i Titrando. Connessione MSB.

Inclusi accessori, bottiglie per solventi e bottiglie per lo scarico.



6.2148.010

Remote Box MSB

Interfaccia remote aggiuntiva per la connessione di strumenti che possono essere controllati tramite linee remote. Con cavi fissi permanenti.



6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.




6.5406.000 Kit per KF coulometrico incluso elettrodo generatore con diaframma

Kit completo di accessori per KF Coulometer.



6.5406.010 Equipaggiamento coulometrico KF comprensivo di elettrodo generatore senza diaframma

Set completo di accessori per KF-Coulometer.

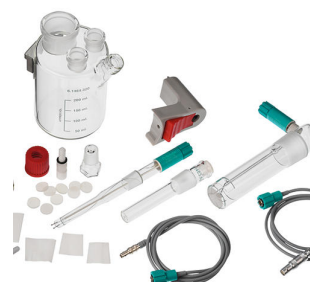


6.5617.000 Accessori per il cambio del reagente

Accessori per cambio automatico del reagente con KF Coulometer e Dosino collegato.



2.900.0010 900 Touch Control

Elemento di comando per i Titrandi, USB Sample Processor, 856 Conductivity Module, 867 pH Module e 846 Dosing Interface. Display a colori sensibile al contatto, ad alta risoluzione, comando semplice ed intuitivo grazie ai preferiti per l'accesso diretto ai metodi. Con interfaccia Ethernet integrata per il collegamento diretto a Internet e all'interfaccia USB per il collegamento di stampanti USB o di una chiave di memoria USB.

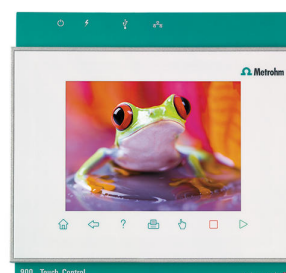

Lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, francese, spagnolo, portoghese, russo, coreano, polacco e italiano.

6.2103.140

Adattatore nero spina da 2 mm / presa B da 4 mm

Per collegare spine B (4 mm) a prese da 2 mm.



6.2103.130

Adattatore rosso spina 2 mm / presa 4 mm

Per connettere la spina B (4 mm) alla presa da 2 mm.



6.2811.000

Setacci molecolari

Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.



6.2811.010

Setaccio molecolare (US)

Setaccio molecolare. Bottiglia da 250 g. Grandezza dei pori: 0,3 nm. Senza indicatore di umidità. Per Rancimat e strumenti Karl-Fischer.

Questo prodotto è destinato a tutti gli utenti residenti negli Stati Uniti. Il materiale è classificato come pericoloso negli Stati Uniti secondo lo standard OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

