



870 KF Titrino plus e 860 KF Thermoprep

2.870.2010

Questo sistema di titolazione è composto da un 870 KF Titrino plus e un 860 KF Thermoprep. È possibile analizzare campioni non adatti per la titolazione diretta Karl Fischer. I campioni vengono inseriti nel forno dell'860 KF Thermoprep in fiale per campioni chiuse ermeticamente. Il campione viene riscaldato e l'acqua contenuta viene vaporizzata e condotta nella cella di titolazione. Con l'870 KF Titrino plus viene poi determinato il contenuto d'acqua del campione.

Parti incluse 2.870.2010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

L'economico 870 KF Titrino plus è un titolatore Karl Fischer per la determinazione volumetrica del contenuto d'acqua. Può essere utilizzato per determinare in modo economico e preciso contenuti d'acqua di pochi ppm fino al 100% in campioni solidi, liquidi e gassosi.

Con la sua nuova interfaccia utente progettata per utenti di routine, l'870 KF Titrino plus è tanto semplice da usare che richiede solo brevi tempi di familiarizzazione. Anche grazie alla sua robustezza, è il titolatore ideale per determinazioni di routine.

Cella di titolazione ed elettrodo sono compresi nel volume di fornitura.



Stand di titolazione compatto con agitatore magnetico e pompa integrata per l'aggiunta di solventi e per aspirare via il contenuto della cella di titolazione. Adatto per titolazioni Karl Fischer con i Titrando. Connessione MSB.

Inclusi accessori, bottiglie per solventi e bottiglie per lo scarico.



L'860 KF Thermoprep serve per la preparazione termica dei campioni nella titolazione Karl Fischer.

Molte sostanze non sono adatte per la titolazione Karl-Fischer diretta perché non sono solubili, reagiscono con il reagente KF oppure perché cedono l'acqua in essi contenuta solo molto lentamente o solo ad alte temperature. I campioni vengono inseriti nel forno in fiale per campioni chiuse ermeticamente e in seguito possono essere determinati con qualsiasi titolatore KF volumetrico o coulometrico.



1 PCS

6.0338.100

Elettrodo a doppio filo di platino per volumetria

Elettrodo indicatore utilizzato per la titolazione Karl Fischer volumetrica.



1 PCS

6.1244.040

Set di guarnizioni

Set di guarnizioni per 6.1414.030. Il set è composta da una guarnizione e da diversi O-Ring.



1 PCS

6.1403.040

Tubo di essiccazione per KF

Da usare con KF



1 PCS

6.1414.030

Parte superiore della cella di titolazione KF con 5 aperture

Per titolazioni KF volumetriche.



1 PCS

6.1415.220

Cella di titolazione / 20-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Cella di titolazione / 50-150 mL



2 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1446.060

Tappo / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1446.170

Tappo per tubi riscaldabili

per celle di KF colometriche connesse ai tuni riscaldabili 6.1830.000,
6.1830.010, 6.1830.020



2 PCS

6.1448.010

Setto da 12 mm, 5 pezzi

Set di 5 unità.



1 PCS

6.1448.057

Tappi con setto in alluminio / 100 pezzi

Inclusa chiusura in Al.



1 PCS

6.1543.110

Punta di dosaggio / filettatura M8

Da usare con 676 Sample Changer insieme con tubi 6.1805.200 e 703 Ti Stand



1 PCS

6.1543.120

Punta di aspirazione / filettatura M8

Da usare con 703 Ti Stand e 681 Pump Unit, se si utilizza il sifone 6.1805.200



2 PCS

6.1602.105

Sifone per bottiglia / GL 45 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura GL 45.



2 PCS

6.1602.145

Sifone per bottiglia di essiccazione

Tappo a vite con filettatura GL 45 per bottiglia di essiccazione 6.1608.050.



1 PCS

6.1608.023

Bottiglia / 1000 mL / GL 45

Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione per l' MSM.



1 PCS

6.1608.030

Bottiglia / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1608.050

Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Tubo di assorbimento con connessione per tubi

Tappo con connessione per tubi



1 PCS

6.1623.000

Protezione antifurioscita per sifone per bottiglia

Protezione antifurioscita per sifone per bottiglia per una bottiglia di scarico; impedisce il traboccamento della bottiglia di scarico in caso di impiego di una pompa di aspirazione



1 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1805.010

Tubo in FEP / M6 / 13 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



2 PCS

6.1805.080

Tubi in FEP / M6 / 25 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1805.100 Tubo in FEP / M6 / 40 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



2 PCS 6.1805.200 Tubo in PTFE / M8 / 0.5 m



1 PCS 6.1808.040 Adattatore da filettatura M6 esterna / M8 interna
Filettatura M6 esterna, M8 interna.



2 PCS 6.1808.050 Tubo di connessione ad oliva M8
1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica
delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



1 PCS

6.1819.030

Tubi

Per fori filettati M8. Per attacchi della bottiglia 6.1602.1XX e bottiglie 6.1608.0XX



1 PCS

6.1819.050

Tubi

Per fori con filettatura M8 degli attacchi delle bottiglie 6.1602.10X con bottiglia d'aspirazione 6.1608.030. Per 703 e 803 Ti Stand, 681 Pump Unit e 679 Rancimat



2 PCS

6.1821.040

Tubo con filtro

Tubi di filtrazione per 6.1608.050 bottiglie di essiccazione, 768 KF Oven, 832 KF-Thermoprep, Rancimat



1 PCS

6.1830.030

Tubo di uscita riscaldabile

Tubo di uscita riscaldabile con filettatura M6 per 860 KF Thermoprep, 885 Compact Oven Sample Processor e 874 USB Oven Sample Processor.



2 PCS

6.1903.020

Barra di agitazione / 16 mm

Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm



2 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.




1 PCS

6.2001.060

Stand di supporto senza asta di supporto

Per collegare un agitatore 801, 804, 803 ad un Titrand o ad un 805 Dosimat

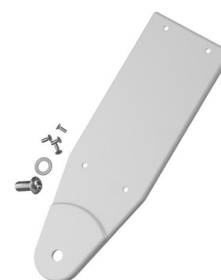

1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.070

Asta di supporto / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



1 PCS

6.2049.040

Supporto per aghi con Luer-Lock

Supporto per aghi (58 mm) con Luer-Lock per forni Karl Fischer 860, 874 e 885.



1 PCS

6.2060.010

Supporto cavi

Utilizzo con KF Thermoprep 860.





Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



Tastiera numerica USB per Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titrosampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler e 899 Coulometer. Con due connessioni USB integrate.



Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2412.000

Navetta pesatrice

Navetta pesatrice in vetro per coperchio cella di titolazione 6.1414.030 o cella di titolazione 6.1455.31X, 6.1464.32X, 6.1465.320. Per determinazioni in acqua KF. Include tubo di protezione.



1 PCS

6.2419.007

Vial da 6 mL, 100 pezzi

Vial per campioni fino a 6 mL, adatto a setto 6.1448.057, 100 pezzi



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.110

Pinza

Pinza per la chiusura delle vial del campione da 6 mL. Da usare con il 774 Oven Sample Processor.



1 PCS

6.2621.120

Chiave esagonale 1.5 mm



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2627.000

Inserto per forno

Utilizzo con 860 KF Thermoprep 860.



1 PCS

6.2723.310

Copertura protettiva per Titrino Plus

Copertura protettiva per display e keypad per tutti gli strumenti della famiglia Titrino plus.

Adatta per: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



1 PCS

6.2724.010

Filtro antipolvere

Filtro antipolvere per Rancimat e per Karl Fischer Oven



2 PCS

6.2730.010

Vite

In PP. Insieme con i setti 6.1448.010 o per montare il tubo di essiccazione 6.1403.040 o l'elettrodo 6.0338.100 nei coperchi delle celle di titolazione di KF 6.1414.030 e 6.1414.040. Da usare per le titolazioni KF



1 PCS

6.2730.020

Tappo con setto

Con O-ring E.301.0041. Per i setti 6.1448.010 e il coperchio della cella di titolazione 6.1414.030. Da usare per le applicazioni KF



3 PCS

6.2730.030

Tappo

Completo di ugello e o-ring. Per i coperchi della cella di titolazione 6.1414.030. Da usare con strumenti KF, VA-Stand, VA Computrace e IC Dilution.



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2739.010

Chiave inglese

Per unità intercambiabili



1 PCS

6.2811.000

Setacci molecolari

Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.070

Ago d'iniezione

Utilizzato con forni Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.080

Uscita dell'ago

Da usare con KF Thermoprep.



1 PCS

6.3026.210

Unità Intercambiabile da 10 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



1 PCS

6.2048.030

Guidance rod

Guidance rod for 860 KF Thermoprep.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
2.142.0100	Stampante termica Custom Q3X

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cavo 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.
