



899 Coulometer con elettrodo generatore senza diaframma e 885 Compact Oven SC

2.899.3110

Questo sistema di titolazione è composto da un 899 Coulometer e da un 885 Compact Oven Sample Changer. Offre una preparazione termica del campione automatizzata con successiva determinazione del contenuto d'acqua in uno spazio minimo.

È possibile analizzare campioni non adatti per la titolazione diretta Karl Fischer. I campioni vengono inseriti nel forno dell'885 Compact Oven Sample Changer in fiale per campioni chiuse ermeticamente. Il campione viene riscaldato e l'acqua contenuta viene vaporizzata e condotta nella cella di titolazione. Con l'899 Coulometer viene poi determinato il contenuto d'acqua del campione.

Parti incluse 2.899.3110

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.899.0010

899 Coulometer



1 PCS

1.885.0010

885 Compact Oven Sample Changer

L'885 Compact Oven Sample Changer serve per la preparazione termica dei campioni nella titolazione Karl Fischer. Nel forno i campioni vengono riscaldati fino a 250°C. In tal caso l'acqua evapora e viene trasportata con un gas di trasporto asciutto in una cella di titolazione, nella quale avviene l'analisi.



1 PCS

6.0341.100

Elettrodo a doppio filo di platino per coulometria

Elettrodo indicatore utilizzato per la titolazione Karl Fischer coulometrica.



1 PCS

6.0345.100

Elettrodo generatore senza diaframma

Elettrodo generatore senza diaframma per titolazione Karl Fischer coulometrica, giunto conico 29/22. Questo elettrodo generatore è adatto alla maggior parte delle applicazioni nelle quali il campione è ben solubile in alcol.



1 PCS

6.1403.030

Tubo di essiccazione KF per cella coulometrica

Per KF-Coulometer.



1 PCS

6.1437.000

Stopper SGJ SGJ 14



1 PCS

6.1446.170

Tappo per tubi riscaldabili

per celle di KF colometriche connesse ai tuni riscaldabili 6.1830.000,
6.1830.010, 6.1830.020



2 PCS

6.1448.020

Setti da 16 mm, 5 pezzi

Set di 5 unità.



1 PCS

6.1448.067

Tappo a vite con setto, 100 pz.

Tappo a vite con setto, adatto per vial da 8 mL 6.2420.007, 100 pezzi



1 PCS

6.1464.320

Cella di titolazione KF / 80-250 mL / coulometrico



2 PCS

6.1602.145

Sifone per bottiglia di essiccazione

Tappo a vite con filettatura GL 45 per bottiglia di essiccazione 6.1608.050.



2 PCS

6.1608.050

Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45



1 PCS 6.1805.010 Tubo in FEP / M6 / 13 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1805.060 Tubo in FEP / M6 / 60 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



2 PCS 6.1805.080 Tubi in FEP / M6 / 25 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1808.040 Adattatore da filettatura M6 esterna / M8 interna
Filettatura M6 esterna, M8 interna.



1 PCS

6.1808.050

Tubo di connessione ad oliva M8

1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



2 PCS

6.1821.040

Tubo con filtro

Tubi di filtrazione per 6.1608.050 bottiglie di essiccazione, 768 KF Oven, 832 KF-Thermoprep, Rancimat



1 PCS

6.1830.030

Tubo di uscita riscaldabile

Tubo di uscita riscaldabile con filettatura M6 per 860 KF Thermoprep, 885 Compact Oven Sample Processor e 874 USB Oven Sample Processor.



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



2 PCS

6.2043.005

Clip di tenuta per bottiglie

Clip per bottiglie di reagente nelle unità Intercambiabili



1 PCS

6.2049.050

Supporto per aghi con Luer-Lock

Supporto per aghi (73 mm) con Luer-Lock per forni Karl Fischer 860, 874 e 885.



1 PCS

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



1 PCS

6.2104.120

Cavo per elettrodo 1 m, H

Con spina H. Per collegare elettrodo generatore - KF Coulometer.



1 PCS

6.2141.390

Cavo remoto 885 - 899

Cavo remoto per il collegamento di un 885 Compact Oven Sample Changer al 899 Coulometer.



2 PCS

6.2151.100

Adattatore USB Mini (OTG) - USB A

Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2151.120

Cavo USB MINI (OTG) - USB B, 1,8 m

Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2164.010

Alimentatore di rete da tavolo 100 - 240 V/24 V DC

Alimentatore di rete da tavolo per 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer e tutti gli Eco Titrator/Eco Dosimat.



1 PCS

6.2420.007

Vial con filettatura da 8 mL, 100 pezzi

Vial con filettatura da 8 mL, adatto per tappo a vite 6.1448.067, 100 pezzi



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2701.040

Tappo a vite GL 18 con foro

In PBT. Con foro per il setto 6.1448.020. Per la cella senza diaframma 6.5405.000 e recipienti di titolazione 6.1464.32X e 6.1465.320.



3 PCS

6.2713.000

Manicotto in PTFE NS14

Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 14.



1 PCS

6.2713.010

Manicotto in PTFE NS29

Manicotto per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 29.



1 PCS

6.2713.020

Manicotto in PTFE NS19

Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 19.



1 PCS

6.2723.310

Copertura protettiva per Titrino Plus

Copertura protettiva per display e keypad per tutti gli strumenti della famiglia Titrino plus.

Adatta per: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



1 PCS

6.2724.010

Filtro antipolvere

Filtro antipolvere per Rancimat e per Karl Fischer Oven



1 PCS

6.2738.000

Imbuto

Da usare con KF Coulometer.



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2811.000

Setacci molecolari

Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.



2 PCS

6.2816.030

Ago con raccordo Luer

Ago per il riempimento del mercurio nel Multi Mode Electrode e per l'aggiunta di campione nella titolazione Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.070

Ago d'iniezione

Utilizzato con forni Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.080

Uscita dell'ago

Da usare con KF Thermoprep.



2 PCS

6.2816.090

Siringa 5 mL

Siringa 5 mL in PP, con raccordo Luer



4 PCS

6.9001.050

Carta termica per Custom Neos-N / Q3X

Carta termica 60 mm / 25 m per Custom Neos-N / Q3X.
Novità: 25 anni di leggibilità se stoccata a regola d'arte.

1 rotolo



1 PCS

6.2147.000

Tastiera numerica USB

Tastiera numerica USB per Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titrosampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler e 899 Coulometer. Con due connessioni USB integrate.



1 PCS

6.2047.040

Supporto per cella di titolazione per 899/917

Supporto per cella di titolazione per celle coulometriche per 899 Coulometer e 917 Ti-Touch



1 PCS

1.142.0100

Stampante termica Custom Q3X

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.


Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.801.0010	801 Stirrer Agitatore magnetico senza stand per il completamento dei Titrino plus, Dosimat plus, Titrand, Sample Processor, 805 Dosimat e 780/781 pH Meter. Con cavo fisso per MSB (Metrohm Serial Bus).	
2.803.0010	803 Ti Stand con agitatore e pompa Stand di titolazione compatto con agitatore magnetico e pompa integrata per l'aggiunta di solventi e per aspirare via il contenuto della cella di titolazione. Adatto per titolazioni Karl Fischer con i Titrand. Connessione MSB. Inclusi accessori, bottiglie per solventi e bottiglie per lo scarico.	
6.2148.030	RS-232/USB Box Amplia il Titrino plus con due interfacce RS-232 per il collegamento per es. di balance, PC (tiBase software), LIMS. È necessario il cavo 6.2151.030.	
6.5406.000	Kit per KF coulometrico incluso elettrodo generatore con diaframma Kit completo di accessori per KF Coulometer.	

6.5406.010

Equipaggiamento coulometrico KF comprensivo di elettrodo generatore senza diaframma

Set completo di accessori per KF-Coulometer.

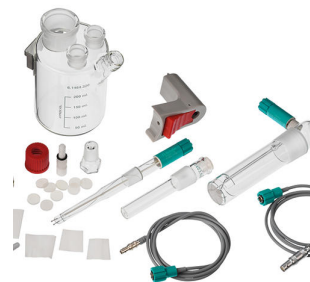

6.2164.500

Power Box per 899

La Power Box offre la possibilità di impiegare il 899 Coulometer indipendentemente dalla rete elettrica.



6.2103.140

Adattatore nero spina da 2 mm / presa B da 4 mm

Per collegare spine B (4 mm) a prese da 2 mm.



6.2103.130

Adattatore rosso spina 2 mm / presa 4 mm

Per connettere la spina B (4 mm) alla presa da 2 mm.

