



NIRS XDS MasterLab Module

2.921.0310

Analisi veloce e non distruttiva di compresse, capsule e altre forme di dosaggio solide

Il NIRS XDS MasterLab Analyzer consente ai produttori dell'industria farmaceutica l'analisi veloce e non distruttiva di forme di dosaggio solide come compresse, capsule, compresse rivestite, compresse gel e capsule gel. Con il NIRS XDS MasterLab Analyzer, anche i solidi possono essere analizzati direttamente nei vial. L'analisi avviene nella modalità di riflessione o trasmissione. Il campionamento avviene tramite una slitta di campionamento che si muove in direzione x e y provvista di supporti con più vassoi o vial. Le analisi dei campioni singoli vengono ottimizzate tramite un adattatore Iris. Una cella di campionamento disponibile opzionalmente per le sostanze a grana grossa estende l'analisi praticamente a tutte le forme solide, dalle polveri fini fino al materiale a grana grossa come pellet e fiocchi.

Parti incluse 2.921.0310

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Analisi veloce e non distruttiva di compresse, capsule e altre forme di dosaggio solide

Il NIRS XDS MasterLab Analyzer consente ai produttori dell'industria farmaceutica l'analisi veloce e non distruttiva di forme di dosaggio solide come compresse, capsule, compresse rivestite, compresse gel e capsule gel. Con il NIRS XDS MasterLab Analyzer, anche i solidi possono essere analizzati direttamente nei vial. L'analisi avviene nella modalità di riflessione o trasmissione. Il campionamento avviene tramite una slitta di campionamento che si muove in direzione x e y provvista di supporti con più vassoi o vial. Le analisi dei campioni singoli vengono ottimizzate tramite un adattatore Iris. Una cella di campionamento disponibile opzionalmente per le sostanze a grana grossa estende l'analisi praticamente a tutte le forme solide, dalle polveri fini fino al materiale a grana grossa come pellet e fiocchi.



Adattatore Iris per la focalizzazione di piccoli recipienti del campione, standard di riflessione, vial diversi o recipienti per transflessione nel NIRS XDS RCA Analyzer, NIRS XDS MasterLab Analyzer e NIRS XDS MultiVial Analyzer



Per la calibrazione del monocromatore con il modulo di campionamento è richiesto uno standard di riflessione.

Per il fissaggio dello standard di calibrazione viene utilizzato un supporto in cui viene posizionato lo standard.

È necessario uno standard di riflessione e il relativo supporto per:

- NIRS XDS MultiVial Analyzer (numero ordine d'acquisto: 29211210)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (numero ordine d'acquisto: 2.921.1310)




1 PCS

6.7404.000

Piastra di apertura

Piastra di apertura per la riduzione della grandezza spot a 4,5 mm, prevalentemente per l'analisi di compresse con l'ausilio del XDS MasterLab Analyzer.

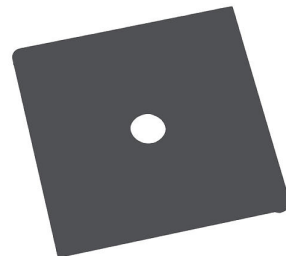

1 PCS

6.7440.580

Standard di trasmissione per MasterLab

Riferimento di trasmissione per la calibrazione dell'XDS MasterLab per misurazioni della trasmissione.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.7402.200	Tappi di chiusura per 6.7402.110 123 tappi di chiusura per provette monouso da 15 mm per riflessione.	
6.7402.210	Tappi di chiusura per 6.7402.120 225 tappi di chiusura per provette monouso da 19 mm per riflessione.	
6.7402.220	Tappi di chiusura per 6.7402.130 172 tappi di chiusura per provette monouso da 22 mm per riflessione.	
6.7402.230	Tappi di chiusura per 6.7402.140 216 tappi di chiusura per provette monouso da 28 mm per riflessione.	

6.7402.110

Vial monouso, 15 mm, riflessione

123 vial monouso in vetro richiudibili con diametro di 15 mm per l'analisi di solidi in riflessione. Adatti per l'analizzatore di solidi NIR delle famiglie di prodotti XDS, DS2500 e OMNIS.



6.7402.120

Vial monouso, 19 mm, riflessione

225 vial monouso in vetro richiudibili con diametro di 19 mm per l'analisi di solidi in riflessione. Adatti per l'analizzatore di solidi NIR delle famiglie di prodotti XDS, DS2500 e OMNIS.



6.7402.130

Vial monouso, 22 mm, riflessione

172 vial monouso in vetro richiudibili con diametro di 22 mm per l'analisi di solidi in riflessione. Adatti per l'analizzatore di solidi NIR delle famiglie di prodotti XDS, DS2500 e OMNIS.



6.7402.140

Vial monouso, 28 mm, riflessione

216 vial monouso in vetro richiudibili con diametro di 28 mm per l'analisi di solidi in riflessione. Adatti ai seguenti analizzatori:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



Il NIRS FlexiTray consente di ottenere la massima flessibilità durante l'analisi di compresse e capsule. Grazie al meccanismo a molla, è possibile posizionare varie forme in modo riproducibile, così da poter garantire sempre misure accurate e precise.

