



NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer

2.921.1520

Sistema di misura robusto per il monitoraggio di reazione di liquidi in impianti di ricerca e pilota

Il NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer consente una determinazione efficiente della composizione di prodotti acquosi, liquidi chiari e solventi, nonché di campioni viscosi. Lo strumento è ugualmente adatto sia all'utilizzo in impianti di ricerca, sia per applicazioni at-line nell'ambito dello scale-up dei processi produttivi. Per i campioni viscosi sono disponibili vial monouso NIRS in vetro che limitano la pulizia al minimo. Il NIRS Vial Heater, disponibile come opzione, consente l'analisi di campioni fino a una temperatura di 200 °C.

Parti incluse 2.921.1520

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Il risultato di 50 anni di esperienza nel campo della spettroscopia sono confluiti nello sviluppo di questo spettrometro NIRSystem. La tecnologia unica migliora il rapporto segnale-rumore ad alta risoluzione e aumenta l'accuratezza e la precisione. Il monocromatore brevettato e il sistema modulare di misura rendono gli strumenti NIRSystem essenziali per la misurazione spettrale di tutti i tipi di campioni immaginabili nella gamma di lunghezza d'onda visibile e nel vicino infrarosso (400 - 2500 nm). I moduli di misura possono essere sostituiti facilmente anche durante il funzionamento. Quindi l'utente può beneficiare dell'elevata flessibilità in tutti i campi di applicazione.



Sistema di misura robusto per il monitoraggio di reazione di liquidi in impianti di ricerca e pilota

Il NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer consente una determinazione efficiente della composizione di prodotti acquosi, liquidi chiari e solventi, nonché di campioni viscosi. Lo strumento è ugualmente adatto sia all'utilizzo in impianti di ricerca, sia per applicazioni at-line nell'ambito dello scale-up dei processi produttivi. Per i campioni viscosi sono disponibili vial monouso NIRS in vetro che limitano la pulizia al minimo. Il NIRS Vial Heater, disponibile come opzione, consente l'analisi di campioni fino a una temperatura di 200 °C.



Kit di accessori per monocromatori da laboratorio NIRS XDS




1 PCS

6.7430.030

Dispositivo di calibrazione NIRS per sonda di
trasmissione

Dispositivo di calibrazione NIRS per sonda di trasmissione

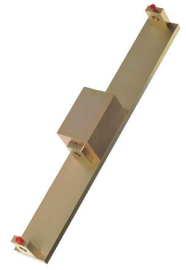

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.7430.010	Parti di ricambio NIRS XDS per strumenti da laboratorio Parti di ricambio NIRS XDS per strumenti da laboratorio composte da due lampade di ricambio, due filtri per ventilatore e quattro fusibili. 
6.7430.000	Lampada di ricambio per NIRS XDS Lampada di ricambio con 12 V e 50 W per il monocromatore degli strumenti da laboratorio NIRS XDS 
6.7450.040	Standard di trasmissione e di lunghezza d'onda NIRS Standard di trasmissione e di lunghezza d'onda per NIRS XDS RLA Analyzer e NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer 

Vision Air - Software universale per la spettroscopia.

Vision Air Complete è una soluzione software moderna e facile da utilizzare per l'impiego in ambiente regolamentato.



Panoramica dei vantaggi di Vision Air:

- le applicazioni software individuali con interfacce utente personalizzate garantiscono un funzionamento intuitivo e semplice
- semplice creazione e manutenzione dei protocolli
- banca dati SQL per una gestione dei dati sicura e semplice

La versione Vision Air Complete (66072208) include tutte le applicazioni per la garanzia della qualità tramite spettroscopia Vis-NIR:

- applicazione per la gestione degli strumenti e dei dati
- applicazione per lo sviluppo di metodi
- applicazione per l'analisi di routine

Altre soluzioni Vision Air Complete:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - Software universale per la spettroscopia.

Vision Air Network è una soluzione software moderna e facile da utilizzare. La versione in rete consente la creazione di una rete globale server-client con banca dati centrale.



Panoramica dei vantaggi di Vision Air:

- le applicazioni software individuali con interfacce utente personalizzate garantiscono un funzionamento intuitivo e semplice
- gestione centralizzata dei dati e degli strumenti
- Semplice configurazione e aggiornamento di più apparecchi in pochi passi

La versione Vision Air Network Complete (66072207) include tutte le applicazioni per la garanzia della qualità tramite spettroscopia Vis-NIR:

- applicazione per la gestione globale degli strumenti e dei dati
- applicazione per lo sviluppo di metodi
- applicazione per l'analisi di routine

Vision Air - Software universale per la spettroscopia.

Vision Air Pharma Complete è una soluzione software moderna e facile da utilizzare per l'impiego in ambiente regolamentato.



Panoramica dei vantaggi di Vision Air:

- le applicazioni software individuali con interfacce utente personalizzate garantiscono un funzionamento intuitivo e semplice
- semplice creazione e manutenzione dei protocolli
- banca dati SQL per una gestione dei dati sicura e semplice
- Soddisfa tutti i requisiti secondo il Title 21 CFR Part 11

La versione Vision Air Pharma Complete (66072209) include tutte le applicazioni per la garanzia della qualità tramite spettroscopia Vis-NIR:

- applicazione per la gestione degli strumenti e dei dati
- applicazione per lo sviluppo di metodi
- applicazione per l'analisi di routine

Vision Air - Software universale per la spettroscopia.

Vision Air Pharma Network Complete è una soluzione software moderna e facile da utilizzare. La versione in rete consente la creazione di una rete globale server-client con banca dati centrale.



Panoramica dei vantaggi di Vision Air:

- le applicazioni software individuali con interfacce utente personalizzate garantiscono un funzionamento intuitivo e semplice
- gestione centralizzata dei dati e degli strumenti
- Semplice configurazione e aggiornamento di più apparecchi in pochi passi
- Soddisfa tutti i requisiti secondo il Title 21 CFR Part 11

La versione Vision Air Pharma Network Complete (66072210) include tutte le applicazioni per la garanzia della qualità tramite spettroscopia Vis-NIR:

- applicazione per la gestione globale degli strumenti e dei dati
- applicazione per lo sviluppo di metodi
- applicazione per l'analisi di routine

Standard di lunghezza d'onda e di trasmissione certificato (set da 6).

Standard di lunghezza d'onda e trasmissione certificato (0,25AU, 0,5AU, 1AU, 1,5AU e 2,0AU) per NIRS XDS RapidLiquid Analyzer e NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer in un ambiente regolato.



6.7430.060

Panno di pulizia in microfibra

Panno di pulizia per schermi e ottiche.

