



Porotrode con PT1000 (spina U)

6.00235.600

Elettrodo per pH combinato con sensore di temperatura Pt1000 integrato per titolazione/misura del pH in:

campioni contenenti proteine (alimenti, campioni biologici)

campioni molto sporchi

campioni viscosi

Il diaframma capillare sviluppato appositamente e l'elettrolita di riferimento Porolyte (6.2318.010) consentono prestazioni ottimali nelle soluzioni contenenti proteine. Conservazione in soluzione di conservazione.

Parti incluse 6.00235.600

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



100 Stk

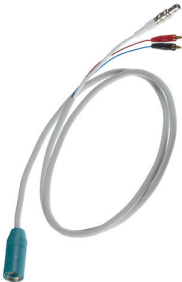
6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.600	Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/ spina F 2x2 mm B, 1m Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti Metrohm (connettore F)	
6.2104.610	Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/spina F + 2x2 mm B, 2m Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti Metrohm (connettore F)	
6.2318.010	Porolyte 50 mL Elettrolita di riferimento Porolyte per elettrodi 6.0235.200 Porotrode e 6.00235.600 Porotrode con Pt1000. Sostituisce 6.2318.000 Porolyte 50 mL.	

Solo la cura regolare e preventiva della membrana di vetro pH e del diaframma possono garantire misure affidabili nel lungo termine. La pulizia mediante cauterizzazione con sostanze chimiche tossiche o un trattamento meccanico del diaframma non solo è complicata e costosa, ma accelera anche l'invecchiamento dell'elettrodo di vetro per pH.

La soluzione detergente è stata sviluppata per una pulizia semplice e delicata degli elettrodi di vetro per pH. Con l'applicazione regolare è possibile prolungare notevolmente la loro durata.

Questa soluzione detergente fa parte anche del pHit kit.

