



Titrode in Ag con rivestimento in AgBr

6.00430.100BR

Elettrodo ad anello d'argento combinato con una membrana di vetro per pH come elettrodo di riferimento.

L'anello d'argento è rivestito con bromuro (AgBr) a garanzia di una maggiore sensibilità e migliori limiti di prova.

Questo elettrodo, privo di manutenzione, è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH costante (titolante nitrato di argento) ad es. di:

- cloruro, bromuro, ioduro
- solfuri
- idrogeno solforato
- mercaptano
- cianuro

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.

Parti incluse 6.00430.100BR

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



100 Stk

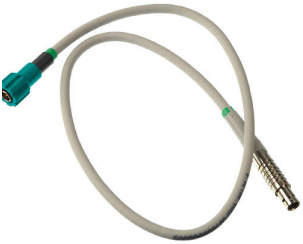
6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)	
6.02104.000	Cavo dell'elettrodo testa a spina G / spina P, 0,55 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.	
6.02104.010	Cavo dell'elettrodo testa a spina G / spina P, 1,5 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.	