



Titrode in Ag con rivestimento in Ag₂S

6.00430.100S

Elettrodo ad anello d'argento combinato con una membrana di vetro per pH come elettrodo di riferimento.

L'anello d'argento è rivestito con solfuro (Ag₂S) a garanzia di una maggiore sensibilità e migliori limiti di prova.

Questo elettrodo, privo di manutenzione, è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH costante (titolante nitrato di argento) ad es. di:

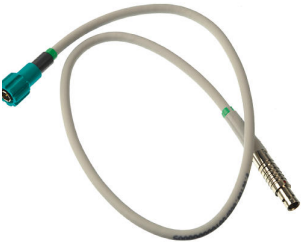
- cloruro, bromuro, ioduro
- solfuri
- idrogeno solforato
- mercaptano
- cianuro

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.

Parti incluse 6.00430.100S

Qt.	Order no.	Descrizione
100 Stk	6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene
		
100 Stk	6.2008.040	Porta punta Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.
		

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)	
6.02104.000	Cavo dell'elettrodo testa a spina G / spina P, 0,55 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.	
6.02104.010	Cavo dell'elettrodo testa a spina G / spina P, 1,5 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.	