



Elettrodo ad anello in Ag combinato con rivestimento in AgBr

6.00450.100BR

Elettrodo ad anello in argento combinato con un diaframma fisso a smeriglio.

L'anello d'argento a fusione solida è resistente a soluzioni saline e acidi ad elevate concentrazioni ed è rivestito con bromuro (AgBr), a garanzia di una maggiore sensibilità e migliori limiti di prova.

Questo elettrodo è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH variabile (titolante nitrato di argento) ad es. di:

- cloruro, bromuro, ioduro
- solfuri
- idrogeno solforato
- mercaptano
- cianuro

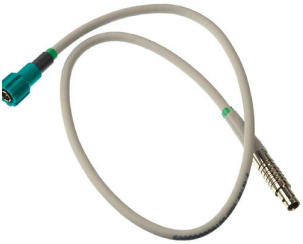
Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità.

Come elettrolita di riferimento e per lo stoccaggio viene usato $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$.

Parti incluse 6.00450.100BR

Qt.	Order no.	Descrizione
100 Stk	6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene
		
100 Stk	6.2008.040	Porta punta Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.
		

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)	
6.02104.000	Cavo dell'elettrodo testa a spina G / spina P, 0,55 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.	
6.2310.010	Elettrolita KNO ₃ 1 mol/L 250 mL Soluzione elettrolitica KNO ₃ 1 M (elettrolita di riferimento per elettrodi d'argento combinati)	