



Elettrodo ad anello in Ag combinato con rivestimento in Ag_2S

6.00450.100S

Elettrodo ad anello in argento combinato con un diaframma fisso a smeriglio.

L'anello d'argento a fusione solida è resistente a soluzioni saline e acidi a concentrazioni più elevate ed è rivestito con solfuro (Ag_2S) a garanzia di una maggiore sensibilità e migliori limiti di prova.

Questo elettrodo è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH variabile (titolante nitrato di argento) ad es. di:

- cloruro, bromuro, ioduro
- solfuri
- idrogeno solforato
- mercaptano
- cianuro

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità.

Come elettrolita di riferimento e per lo stoccaggio viene usato $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$.

Parti incluse 6.00450.100S

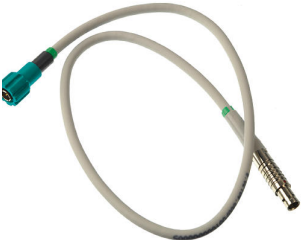
Qt.	Order no.	Descrizione
100 Stk	6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



100 Stk	6.2008.040	Porta punta
		Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)	
6.2310.010	Elettrolita KNO ₃ 1 mol/L 250 mL Soluzione elettrolitica KNO ₃ 1 M (elettrolita di riferimento per elettrodi d'argento combinati)	
6.02104.000	Cavo dell'elettrodo testa a spina G / spina P, 0,55 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.	
6.02104.010	Cavo dell'elettrodo testa a spina G / spina P, 1,5 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.	