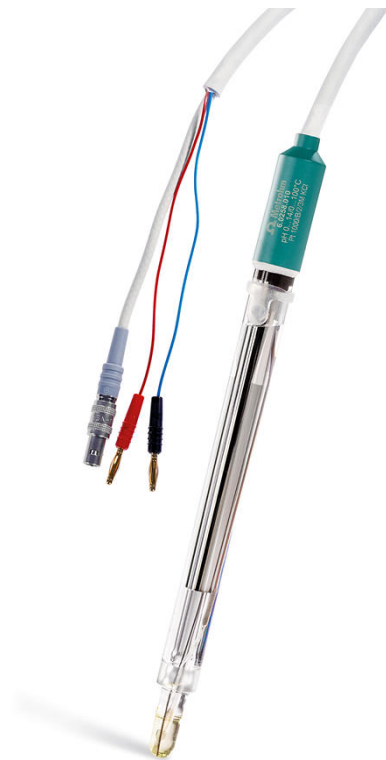




## Unitrode con Pt1000 (cavo fisso 1,2 m, 2 mm)

6.0258.010

Elettrodo per pH combinato con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (1,2 m, diametro connettore a banana 2 mm). Questo elettrodo è particolarmente indicato:

- per titolazioni e misure del pH in campioni difficili, viscosi o alcalini
- a temperatura elevata
- per misure a lungo termine

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile allo sporco.

Elettrolita di riferimento:  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ , conservazione in soluzione di conservazione.

In alternativa: elettrolita di riferimento per misure a  $T > 80^\circ\text{C}$ : Idrolyte, conservazione in Idrolyte.

Parti incluse 6.0258.010

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



---

1 PCS

6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2308.020 | Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)<br><br>Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ , 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)                                                                                                                                                                        |    |
| 6.2308.040 | Idrolyte(250 mL)<br><br>Idrolyte (per elettrodo 6.0224.100 e Unitrode a T 80°C)                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 6.2323.000 | Aufbewahrungslösung<br><br>Aufbewahrungslösung für alle kombinierten pH-Glaselektroden mit Bezugselektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$                                                                                                                                                                          |  |
| 6.2325.000 | pHit kit<br><br>Kit di manutenzione per elettrodi pH<br><br>Il kit contiene: <ul style="list-style-type: none"><li>• soluzione detergente 50 mL</li><li>• soluzione KCl 50 mL 3M KCl</li><li>• soluzione di conservazione, 50 mL</li><li>• 2 contenitori per la conservazione</li><li>• Istruzioni per l'uso</li></ul> |  |

6.2325.100

Soluzione detergente 3 x 50 mL

Solo la cura regolare e preventiva della membrana di vetro pH e del diaframma possono garantire misure affidabili nel lungo termine. La pulizia mediante cauterizzazione con sostanze chimiche tossiche o un trattamento meccanico del diaframma non solo è complicata e costosa, ma accelera anche l'invecchiamento dell'elettrodo di vetro per pH.

La soluzione detergente è stata sviluppata per una pulizia semplice e delicata degli elettrodi di vetro per pH. Con l'applicazione regolare è possibile prolungare notevolmente la loro durata.



Questa soluzione detergente fa parte anche del pHit kit.

---

6.2103.150

Adattatore rosso spina 4 mm / presa 2 mm

Adattatore per collegare gli elettrodi con spina da 2 mm a strumenti con presa da 4 mm (banana)

