


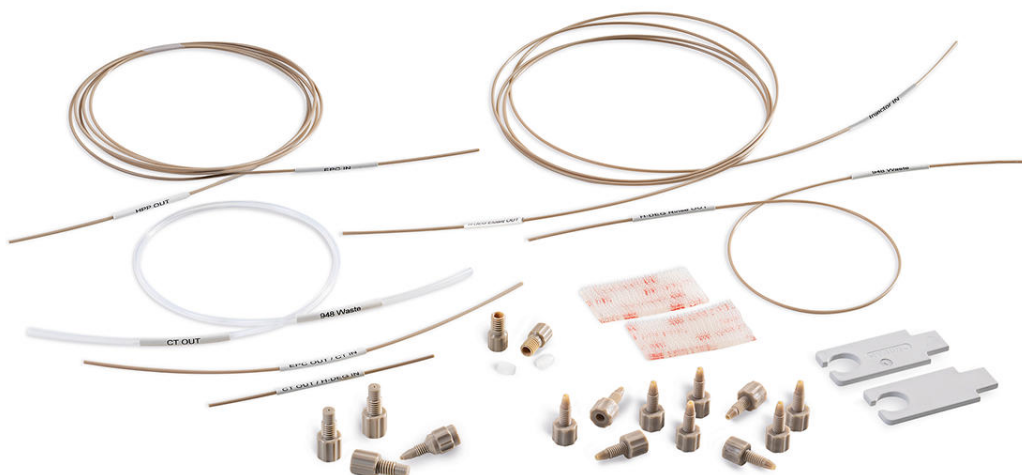

Kit di accessori: CEP

6.05000.300

Kit di accessori per l'installazione del 948 Continuous IC Module, CEP

Parti incluse 6.05000.300

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.01805.470	Tubo in FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 500 mm, CT OUT

Un tubo in FEP che collega l'uscita Continuous Anion Trap con il Waste Collector del cromatografo ionico.




1 PCS

6.01831.010

Capillare in PEEK, 0,25 mm, HPP OUT

Un capillare in PEEK che collega la pompa ad alta pressione del cromatografo ionico con l'Eluent Producer Cartridge (EPC) del 948 Continuous IC Module, CEP.

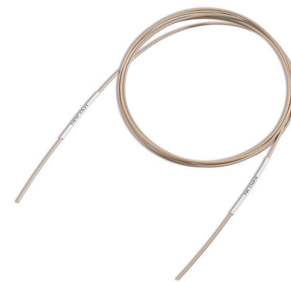

1 PCS

6.01831.020

Capillare in PEEK, 0,25 mm, EPC OUT

Un capillare in PEEK che collega l'Eluent Producer Cartridge (EPC) con il Continuous Trap (CT) del 948 Continuous IC Module, CEP.



1 PCS

6.01831.030

Capillare in PEEK, 0,25 mm, CT OUT

Un capillare in PEEK che collega il Continuous Trap (CT) con l'High-Pressure Degasser (H-DEG) del 948 Continuous IC Module, CEP.




1 PCS

6.01831.040

Capillare in PEEK, 0,25 mm, H-DEG OUT

Un capillare in PEEK che collega l'High-Pressure Degasser (H-DEG) del 948 Continuous IC Module, CEP con l'iniettore del cromatografo ionico.

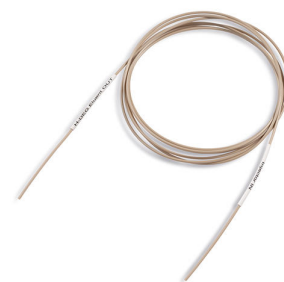

1 PCS

6.01831.050

Capillare in PEEK, 0,25 mm, H-DEG Rinse

Un capillare in PEEK che collega l'High-Pressure Degasser (H-DEG) del 948 Continuous IC Module, CEP con il Waste Collector del cromatografo ionico.



1 PCS

6.2053.030

Nastro di fissaggio per 6.2744.340, 25 x 50 mm

Nastro di fissaggio per equipaggiamento IC per gradiente Dosino



2 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



2 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



1 PCS

6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna
M6

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di
trasferimento (M6)

