



Equipaggiamento IC: MiPT, 889 Basic

6.05330.230

Kit di accessori per il montaggio di un Dosino per l'iniezione a loop parziale in combinazione con 889 Basic (28890030 e 28890040)

Parti incluse 6.05330.230

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1841.000	Capillari di trasferimento in PEEK 2 mL, 5 m



1 PCS

6.1819.110

Tubo di aspirazione in FEP per tanica

Tubo di aspirazione per sifone su tanica con connettore M6. Per la produzione di eluenti.




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

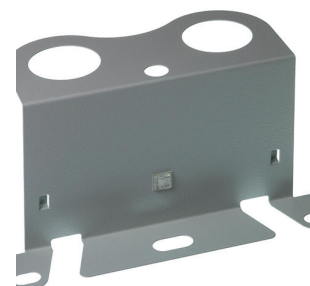

1 PCS

6.1825.290

Loop di campionamento in PEEK 250 µL

Loop di campionamento per «Metrohm intelligent Partial Loop Technique (MiPT)» e per PILS (particle into liquied sampler). Mit 2 viti a pressione in PEEK.



1 PCS

6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit da 2 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45




1 PCS

6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.

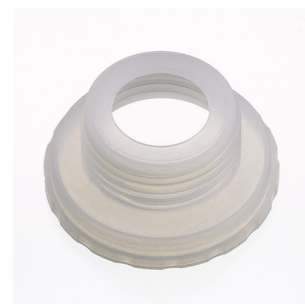

1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



1 PCS

6.1805.120

Tubo in FEP / M6 / 100 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1624.000

Adattatore SGJ 14 per l'assorbitore 6.1619.XXX

Adattatore SGJ 14. Parte del 6.1619.010 del Dilution Sample Processor.



1 PCS

6.1619.000

Tubo di assorbimento per 807 Dosing Unit



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.889.0010	889 IC Sample Center	
	L'889 IC Sample Center è un robusto Autosampler per un elevato passaggio di campioni, ottimizzato per le sfide del moderno laboratorio analitico. Lavora secondo il principio x-y-z con un controllo per siringhe con un'elevata risoluzione per il campionamento preciso. Un sistema a doppio ago consente la perforazione dei tappi e coperchi dei recipienti. Una valvola di iniezione in PEEK completa il sistema di automazione dell'889 IC Sample Center. È la soluzione di automazione idonea quando disponete solo di una quantità molto ridotta di campione.	
2.889.0020	889 IC Sample Center – cool	
	L'889 IC Sample Center – cool è la soluzione di automazione idonea quando disponete solo di una quantità molto ridotta di campione. Rispetto all'889 IC Sample Center dispone inoltre di una funzione di raffreddamento e pertanto è il campionatore ideale per campioni rilevanti dal punto di vista biochimico o per campioni termicamente instabili.	
2.889.0030	889 IC Sample Center Basic	
	L'889 IC Sample Center Basic è un campionatore automatico ad ambiente controllato per un'elevata produttività nella gestione dei campioni, ottimizzato per analisi complesse in laboratori avanzati. Funziona secondo il principio x-y-z e un sistema a doppio ago consente la perforazione di setti e membrane. Il trasferimento del campione ha luogo mediante una pompa peristaltica sul sistema IC o con un Dosino 800 per applicare, ad esempio, la tecnica di Partial-Loop Metrohm. Supportato da MagIC Net 4.1 e versioni successive.	

Lo strumento 889 IC Sample Center Basic – cool è la soluzione di automazione idonea quando si dispone solo di una quantità molto ridotta di campione. Rispetto all'889 IC Sample Center Basic dispone anche di una funzione di raffreddamento ed è quindi il campionatore ideale per campioni biochimicamente rilevanti o termicamente instabili.

Il trasferimento del campione avviene con una pompa peristaltica nel sistema IC o con un 800 Dosino, per esempio utilizzando la tecnica di iniezione intelligente Partial-Loop.

Supportato da MagIC Net 4.1 e versioni successive.

