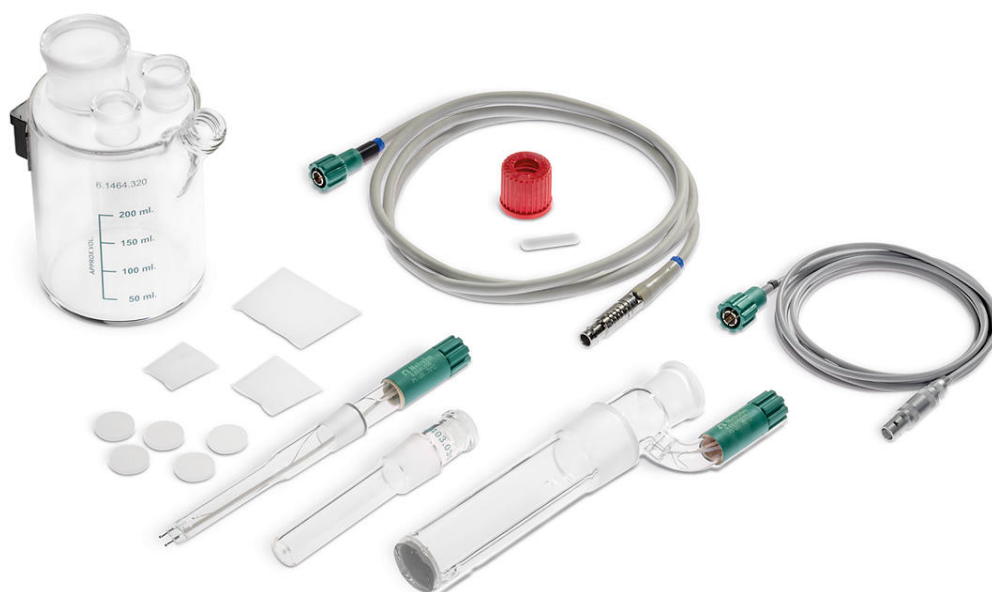




Equipaggiamento KFC per OMNIS Oven Module con elettrodo generatore con diaframma

6.05406.060

Set completo di accessori per le titolazioni coulometriche Karl Fischer con un elettrodo generatore con diaframma su un OMNIS Oven Module

Parti incluse 6.05406.060

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Elettrodo generatore con diaframma per titolazioni Karl Fischer coulometriche, giunto conico 29/22. Questo elettrodo prevede un attacco del cavo piegato verso l'alto che facilita la copertura cavo e il comando quando utilizzato con OMNIS Sample Robot Oven.

Questo elettrodo generatore è indicato in particolare per:

- Campioni con contenuto assoluto di acqua molto basso 50 ppm
- Determinazione coulometrica del contenuto d'acqua in campioni di olio
- Applicazioni per cui vengono utilizzati reagenti chetonici
- Applicazioni per cui vengono utilizzati reagenti cattivi conduttori (aggiunta di cloroformio, xilene >10%)



Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico polarizzabile (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.



Elettrodo indicatore utilizzato per la titolazione Karl Fischer coulometrica.



Per KF-Coulometer.



1 PCS

6.1448.020

Setti da 16 mm, 5 pezzi

Set di 5 unità.



1 PCS

6.1464.320

Cella di titolazione KF / 80-250 mL / coulometrico



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



1 PCS

6.2104.630

Cavo dell'elettrodo/1,5 m/H

Con spina H, per il collegamento elettrodo generatore - coulometro



1 PCS

6.2701.040

Tappo a vite GL 18 con foro

In PBT. Con foro per il setto 6.1448.020. Per la cella senza diaframma 6.5405.000 e recipienti di titolazione 6.1464.32X e 6.1465.320.



1 PCS

6.2713.000

Manicotto in PTFE NS14

Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 14.



1 PCS

6.2713.010

Manicotto in PTFE NS29

Manicotto per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 29.



1 PCS

6.2713.020

Manicotto in PTFE NS19

Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 19.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2811.000	Setacci molecolari Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.	
6.2811.010	Setaccio molecolare (US) Setaccio molecolare. Bottiglia da 250 g. Grandezza dei pori: 0,3 nm. Senza indicatore di umidità. Per Rancimat e strumenti Karl-Fischer. Questo prodotto è destinato a tutti gli utenti residenti negli Stati Uniti. Il materiale è classificato come pericoloso negli Stati Uniti secondo lo standard OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).	