



Dotazione di elettrodi VA con scTRACE Gold pro per VA Computrace

6.5340.000

Set completo di accessori per la determinazione di arsenico o mercurio con lo scTRACE Gold. Contiene supporto dell'elettrodo, scTRACE Gold (4 pezzi), recipiente di misura, agitatore e altri accessori.

Parti incluse 6.5340.000


Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1204.200	Agitatore per VA Stand
		Agitatore per VA Stand, completo, esente da metalli



Supporto per scTRACE Gold con connettori a spina per il collegamento dei cavi degli elettrodi per gli elettrodi di lavoro, di riferimento e ausiliari. Insieme a scTRACE Gold 6.1258.000, il corpo dell'elettrodo costituisce un sensore completo per la voltammetria da utilizzare con gli strumenti VA professionali. Per l'impiego con i supporti VA e con VA Computrace sono necessari tre adattatori 6.2112.130. scTRACE Gold deve essere semplicemente innestato sul corpo. Mentre scTRACE Gold va sostituito a intervalli regolari, il corpo dell'elettrodo è riutilizzabile.



Per elettrodo a disco rotante e agitatore nei VA Stand (3 pezzi).

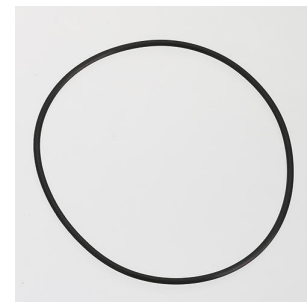

Elettrodo a microfilo in oro a base di una pellicola sottile per la determinazione di arsenico nei campioni di acqua. Lo scTRACE Gold è un sensore voltammetrico combinato per la voltammetria. Elettrodo da lavoro in microfilo d'oro, elettrodo di riferimento Ag/AgCl ed elettrodo ausiliario in carbonio si trovano su di un unico sensore. Facile da usare e praticamente esente da manutenzione, con lo scTRACE Gold può essere determinato per es. l'arsenico nell'acqua a livello di tracce. Assieme al corpo dell'elettrodo 6.1241.080 può essere utilizzato in ogni strumento di misura voltammetrico Metrohm.



1 PCS

6.1446.000

Stopper SGJ / B-14/(15)



1 PCS

6.1808.000

Giunto di connessione M6



3 PCS

6.2112.130

Adattatore spina di contatto 5,5 mm / contatto a vite, dorato

Per elettrodi VA



1 PCS

6.2753.210

Coperchio

Per separatore d'olio 62753200 e per applicazioni con scTRACE Gold.

