



Spettrometro Raman palmare TacticID-N Plus


BWT-840000994

Lo strumento TacticID[®]-N Plus è uno spettrometro Raman palmare pronto all'uso, progettato per l'analisi forense non a contatto di narcotici, farmaci, agenti di taglio e loro precursori da parte del personale delle forze dell'ordine.

Grazie a una sequenza di lavoro intuitiva e allo schermo tattile, è possibile analizzare i campioni in modo non distruttivo attraverso l'imballaggio opaco e trasparente. Gli utenti, ad esempio il personale di sicurezza e dei servizi di emergenza (quali forze dell'ordine), guardie doganali e di frontiera, nonché gli artificieri e le squadre addette alle sostanze pericolose, possono visualizzare molto chiaramente il livello di minaccia del campione, per un'azione rapida con un contatto minimo con il campione. Lo strumento TacticID-N Plus utilizza la spettroscopia Raman comprovata in laboratorio, che consente agli utenti di identificare le sostanze illecite in tempo reale senza mai compromettere l'integrità del campione o la catena delle evidenze.

Gli utenti TacticID-N Plus hanno accesso ad aggiornamenti regolari della libreria in modo da mantenere aggiornate le capacità di identificazione e stare al passo con i nuovi narcotici emergenti.

Parti incluse BWT-840000994

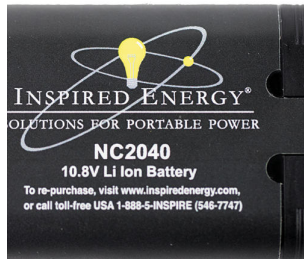Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	BWT-840000295	Vial per liquidi con diametro di 15 mm
		Confezione da 6 vial in vetro borosilicato (diametro di 15 mm) comprensiva di borsa.
		
1 PCS	BWT-840000403	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V
		Batteria ricaricabile agli ioni di litio: adatta a TacticID-N Plus, TacticID Mobile e NanoRam-1064.
		TID-BAT
		
1 PCS	BWT-840000406	Adattatore per supporto per vial TacticID
		Adattatore per supporto per vial TacticID, compatibile con vial con diametro di 15 mm.
		
1 PCS	BWT-840000414	Adattatore di rete da 18 V
		Adattatore di rete da 18 VCC, 1,67 A. Connettore per USA, UE, UK e AU incluso nel volume di fornitura.
		TID-PWA
		

1 PCS

BWT-840000416 Adattore point and shoot TacticID

Adattore point and shoot TacticID.



1 PCS

BWT-840000417 Coperchio di convalida TacticID

Coperchio di convalida TacticID con polistirolo integrato ai sensi della norma ASTM. Per l'impiego con TacticID-N Plus e TacticID-GP Plus.



1 PCS

BWT-840000419 Penna/Penna a sfera per TacticID

Combinazione di penna/penna a sfera per touchscreen (confezione da 5 pezzi).

TID-STY



1 PCS

BWT-840000422 Valigetta di trasporto per TacticID

Robusta valigetta di trasporto per TacticID in plastica dura.



1 PCS

BWT-840000429 Tappo di protezione per stelo TacticID-N (nero)

Tappo di protezione per stelo TacticID-N e TacticID-N Plus (nero).

TID-CAP-N



1 PCS

BWT-840000858 Cavo USB

Cavo USB compatibile con porta micro USB fino al tipo A USB 2.0.



1 PCS

BWT-840000948 Cavo OTG USB

Cavo OTG USB per la trasmissione dati tra una chiave USB e un dispositivo portatile.



1 PCS

BWT-840000981 Software TacticID Plus


Chiave USB con software TID TacticID Plus per PC, pacchetto per l'installazione di TID e manuali per l'uso del prodotto TacticID Plus.



1 PCS

BWT-840001251 Libreria delle sostanze chimiche generali e illecite
TacticID

Libreria TacticID N Plus dei materiali illeciti inclusi farmaci, sostanze chimiche industriali tossiche (TIC), materiali industriali tossici (TIM), precursori e sostanze chimiche generali.

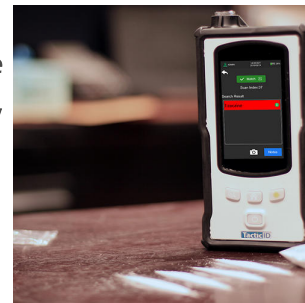

1 PCS

BWT-840000528 Kit TacPac™ per TacticID-N Plus

TAP-KIT-T è un kit per analisi SERS da utilizzare con TacticID-N Plus per l'amplificazione del segnale Raman e la riduzione della fluorescenza dei campioni difficili da misurare. Questo kit include un astuccio nero, pinzette, un adattatore per analisi SERS e 25 substrati SERS

Kit per analisi SERS per l'impiego con gli spettrometri Raman palmari di B&W Tek. Per l'amplificazione del segnale Raman e la riduzione della fluorescenza dei campioni difficili da misurare. Da usare con eccitazione laser da 785 nm. Include: pinzette, adattatore TacPac, 25 strisce SERS.

TAP-KIT-T



1 PCS

BWT-840000354 Borsa per adattatori (NR2-PCH-ADPT)

Borsa per adattatori per gli strumenti Raman palmari compatibili con NanoRam-1064, TacticID-N Plus e TacticID Mobile.

NR2-PCH-ADPT



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

BWT-840000294	Stazione di ricarica per la batteria ricaricabile
---------------	---

Stazione di ricarica per la batteria ricaricabile agli ioni di litio (per ricaricare solo NR-BAT e TID-BAT).




BWT-840000329	Borsa per vial da 15 mm
---------------	-------------------------

Borsa per vial da 15 mm.



BWT-840000353	Tappo di protezione per stelo
---------------	-------------------------------

Tappo di protezione per lo stelo degli apparecchi Raman portatili, confezione da 10 pezzi.

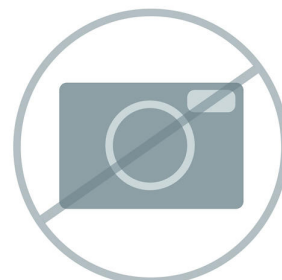

BWT-840000361	Misuratore manuale di potenza del laser
---------------	---

Misuratore di potenza del laser, ad asta, calibrato. Intervallo: 5 microwatt fino a 1 Watt. Impiego per OQ/PQ e certificazione annuale del misuratore di potenza del laser.



BWT-840000912 Kit di sostituzione dell'O-ring strumenti Raman palmari

Kit di sostituzione dell'O-ring per strumenti Raman palmari – (solo per stelo).

Il kit include: O-ring n. 1 DI 9,00 mm x 15 e O-ring n. 2 DI 10,00 mm x 15 (TacticID-N Plus, TacticID Mobile e NanoRam-1064).

TID-ORK



BWT-840000491 Adattatore rettangolare per TacticID

Adattatore rettangolare per TacticID.



BWT-840000498 Cassetta per batterie monouso

Cassetta per batterie TaticID per l'impiego con sei batterie monouso del tipo 123A (ad es. Surefire). Senza batterie.



BWT-840000524 Adattatore TacPac™


Adattatore per analisi SERS per l'impiego con substrati P SERS TacPac™.



Borsa per adattatori TactiClD (785 nm)



Caricabatteria da auto per TactiClD-N Plus.

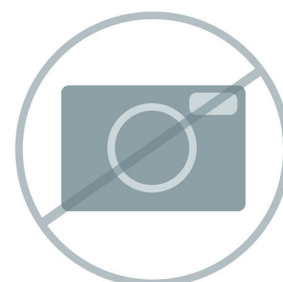

Libreria spettrale Raman per TactiClD Plus con oltre 1.180 spettri di sostanze chimiche, stupefacenti, solventi e plastiche comuni. Include le avvertenze per la sicurezza NFPA704 e GHS.



Kit per la preparazione del campione per l'analisi SERS da utilizzare con gli spettrometri Raman palmari di B&W Tek. Per l'amplificazione del segnale Raman e la riduzione della fluorescenza dei campioni difficili da misurare. Da usare con eccitazione laser da 785 nm. Spatola da laboratorio usa e getta in plastica per uso singolo, pipette e tubi per microcentrifuga graduati in PP (2 ml) usati per la preparazione del campione per l'analisi con TacPac™ SERS. Inclusa confezione da 25 substrati SERS.

TAP-SAM25



BWT-840001125 Kit per la preparazione del campione TacPac (confezione da 50)

Kit per la preparazione del campione per l'analisi SERS da utilizzare con gli spettrometri Raman palmari di B&W Tek. Per l'amplificazione del segnale Raman e la riduzione della fluorescenza dei campioni difficili da misurare. Da usare con eccitazione laser da 785 nm. Spatola da laboratorio usa e getta in plastica per uso singolo, pipette e tubi per microcentrifuga graduati in PP (2 ml) usati per la preparazione del campione per l'analisi con TacPac™ SERS. Inclusa confezione da 50 substrati SERS.

TAP-SAM50



607506480

Kit SERS Discovery

Il kit introduttivo per l'analisi SERS contenente strisce P-SERS oro e argento e oro e argento colloidale.

