



Sonda Raman 638


DRP-RAMANPROBE638

Sonda di riflessione progettata per essere utilizzata con una lunghezza d'onda di eccitazione singola da 638 nm (fino a 300 mW). Idonea per il funzionamento con la cella Raman DropSens per elettrodi a membrana (rif. CELLA RAMAN), cella Raman per elettrodi convenzionali (rif. CELLA RAMAN-C) o con qualsiasi configurazione Raman convenzionale.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
DRP-RAMANCELL-C	Cella spettroelettrochimica Raman per elettrodi convenzionali

Cella in PEEK per misure spettroelettrochimiche Raman. Progettata per l'uso con rif. SONDA RAMAN e con gli elettrodi Metrohm convenzionali.

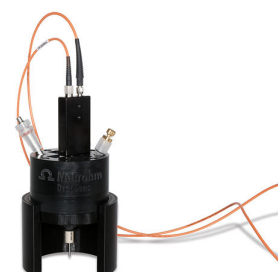

DRP-
SPELECRAMAN638

Strumento spettroelettrochimico Raman (laser 638 nm)

SPELECRAMAN638 è uno strumento per l'esecuzione di misure spettroelettrochimiche Raman. In un'unica scatola combina un laser classe 3B ($638 \text{ nm} \pm 0,5$), un bipotenzziostato/galvanostato e uno spettrometro (intervallo di lunghezza d'onda 640-885 nm e shift Raman 50-4.370 cm^{-1}) e include un software spettroelettrochimico dedicato che permette la sincronizzazione degli esperimenti ottici ed elettrochimici.



DRP-RAMANCELL Cella Raman per elettrodi a membrana

Cella di riflessione in teflon nera per l'esecuzione della spettroelettrochimica Raman con elettrodi a membrana in combinazione con rif. SONDA RAMAN.

