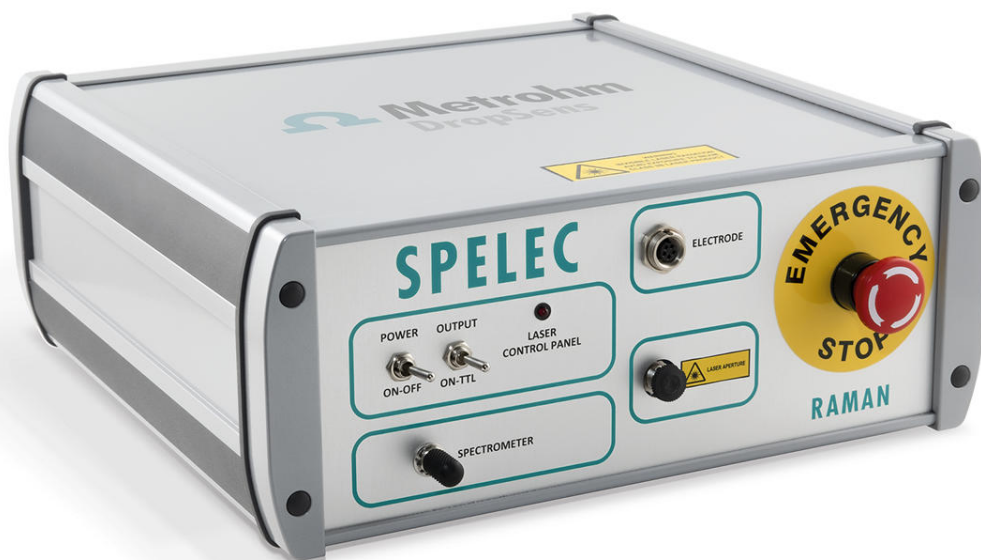




Strumento spettroelettrochimico Raman (laser 532 nm)

DRP-SPELECRAMAN532

SPELECRAMAN532 è uno strumento per l'esecuzione di misure spettroelettrochimiche Raman. In un'unica scatola combina un laser classe 3B (532 nm $\pm$ 0,5), un bipotenziostrato/galvanostato e uno spettrometro (intervallo di lunghezza d'onda 534-700 nm e shift Raman 75-4.520 cm⁻¹) e include un software spettroelettrochimico dedicato che permette la sincronizzazione degli esperimenti ottici ed elettrochimici.

Parti incluse DRP-SPELECRAMAN532

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

DropView SPELEC è un software spettroelettrochimico che controlla strumenti SPELEC, offrendo una perfetta sincronizzazione delle misure ottiche ed elettrochimiche, nonché strumenti avanzati per il trattamento dei dati.



Sonda di riflessione progettata per essere utilizzata con una lunghezza d'onda di eccitazione singola da 785 nm (fino a 500 mW). Idonea per il funzionamento con la cella Raman DropSens per elettrodi a membrana o con qualsiasi configurazione Raman convenzionale.



Collega i singoli nodi del μ Stat 8000(P)/4000(P) agli elettrodi convenzionali



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
DRP-RAMANCELL	Cella Raman per elettrodi a membrana

Cella di riflessione in teflon nera per l'esecuzione della spettroelettrochimica Raman con elettrodi a membrana in combinazione con rif. SONDA RAMAN.



DRP-RAMANCELL-C	Cella spettroelettrochimica Raman per elettrodi convenzionali
-----------------	---

Cella in PEEK per misure spettroelettrochimiche Raman. Progettata per l'uso con rif. SONDA RAMAN e con gli elettrodi Metrohm convenzionali.

