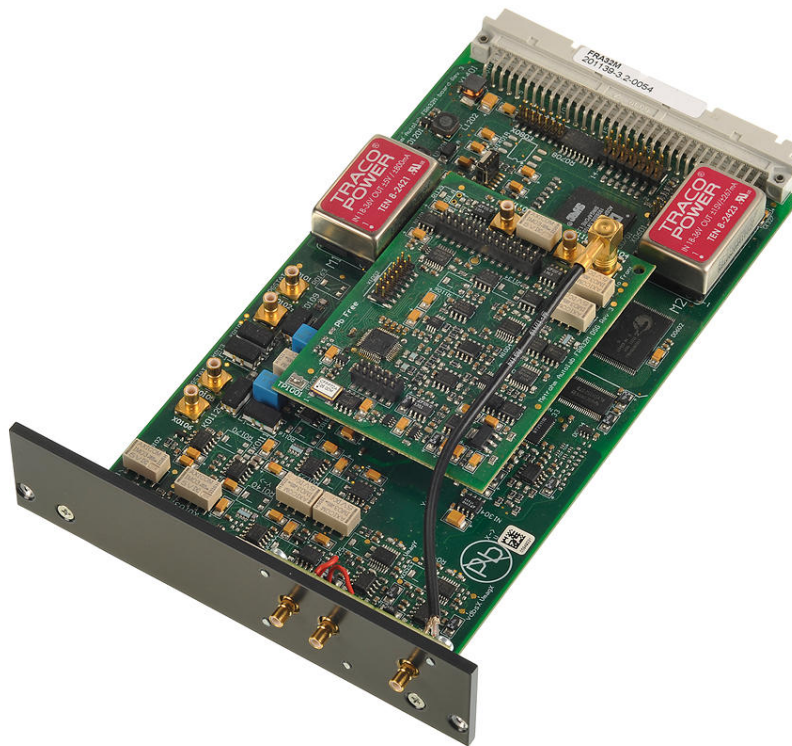




Modulo Electrochemical Quartz Crystal Microbalance

EQCM.S

Il modulo EQCM fornisce i mezzi per eseguire esperimenti Electrochemical Quartz Crystal Microbalance. Il modulo EQCM misura una variazione di massa per area unitaria registrando la variazione nella frequenza di risonanza di un oscillatore a cristallo di quarzo.

Sono possibili misurazioni al di sotto di mg/cm^2 . L'EQCM può essere dotato di cristalli con taglio AT da 6 MHz.

Il modulo EQCM viene fornito con una cella elettrochimica adatta, elettrodo e contro elettrodo di riferimento e due cristalli rivestiti in oro da 6 MHz.

Parti incluse EQCM.S

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

EQCM.AU

EQCM 6 MHz Au/Elettrodo di lavoro cristalli di TiO_2

EQCM 6 MHz Au/Elettrodo di lavoro cristalli di TiO_2



1 PCS

EQCM.CE

Controelettrodo EQCM

Controelettrodo a spirale in oro per cella EQCM Autolab.



1 PCS

EQCM.REF.EL.S

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl 3M KCl

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl 3M KCl



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
EQCM.AU	EQCM 6 MHz Au/Elettrodo di lavoro cristalli di TiO2	
	EQCM 6 MHz Au/Elettrodo di lavoro cristalli di TiO2	
EQCM.PT	EQCM 6 MHz Elettrodo di lavoro cristalli rivestito in Pt	
	EQCM 6 MHz Elettrodo di lavoro cristalli rivestito in Pt	