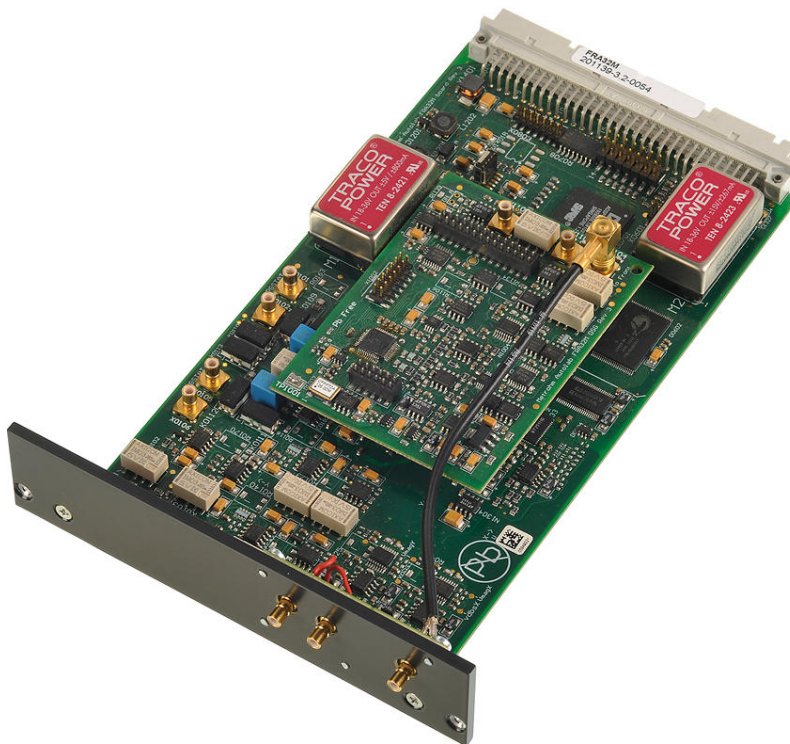




Modulo bipotenziostato a modalità duale

MBA.S

MBA.S è un modulo bipotenziostato aggiuntivo, che può essere installato sul potenziostato /galvanostato MultiBA (MBA), permettendo l'aggiunta di un ulteriore elettrodo di lavoro allo strumento MBA. Su uno strumento MBA è possibile installare un massimo di 5 moduli MBA.S insieme a un modulo FRA32M.S.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
RRDE.AUPT.S	Elettrodo ad anello-disco rotante, disco in oro, anello in platino
	La punta dell'elettrodo RRDE consiste di un disco in oro da 5 mm con un anello concentrico in platino a una distanza di 375 μm , portando l'efficienza di raccolta teorica a 24,9%.



La punta dell'elettrodo RRDE consiste di un disco Glassy Carbon da 5 mm con un anello concentrico in platino a una distanza di 375 μm , portando l'efficienza di raccolta teorica a 24,9%.

