



797 VA Computrace completamente automatizzato per CVS

MVA-13

L'MVA-13 è un sistema di analisi per la determinazione completamente automatica degli additivi organici in serie di campioni nei bagni galvanici con la tecnica CVS («Cyclic Voltammetric Stripping») nel laboratorio di routine. Con l'838 Advanced VA Sample Processor può essere analizzato il contenuto di soppressore in massimo 56 campioni. Nella determinazione di brillantanti possono essere analizzati automaticamente fino a 28 campioni. La possibilità di ricalibrare metodi durante una serie di campioni garantisce la massima precisione. Composto da 797 VA Computrace per la CVS, 838 Advanced VA Sample Processor, tre 800 Dosino ed equipaggiamento di lavaggio.

Il sistema viene fornito completo di accessori con VA per la costruzione di un sistema di misura completo, incluso il VA Computrace Software e gli elettrodi: elettrodo di platino a disco rotante (RDE), elettrodo di riferimento Ag/AgCl ed elettrodo ausiliario in platino.

Parti incluse MVA-13

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

3 PCS

2.800.0010

800 Dosino

800 Dosino è un drive con hardware di scrittura/lettura per Unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (150 cm).



1 PCS

2.843.0040

843 VA Membrane Pump Station per sistemi compatti VA

L'843 Membrane Pump Station dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace.

La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.



2 PCS

6.1608.050

Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Adattatore con filettatura / GL 45 su GL 45

Adattatore con filettatura (GL 45 su GL 45); anche per bottiglie per reagenti con flangia più alta.



1 PCS

6.1805.020

Tubo in FEP / M6 / 52 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.120

Tubo in FEP / M6 / 100 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



3 PCS

6.1805.530

Tubo in FEP / M6 / 2 m

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1819.010

Tubo in PTFE

Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand



1 PCS

6.2055.100

Supporto per bottiglia, doppio

Supporto per bottiglia per 2 bottiglie da 1 L. Per kit di aspirazione 6.5617.000



3 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



1 PCS

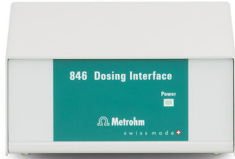
6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.846.0010	846 Dosing Interface	
	Unità di comando compatibile USB per il collegamento di max quattro 800 Dosino od 805 Dosimat per compiti di dosaggio e di Liquid Handling. Per il comando è necessario un Touch Control o il collegamento a un PC con OMNIS Software, tiamo™, MagIC Net, viva o 797 VA Computrace.	
6.1204.170	Punta dell'elettrodo in platino 3 mm per CVS	
	Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo 3 mm, superficie lucidata, adattatore con filettatura M3. Campo di temperatura: da 0 a 40 °C.	
6.1204.190	Punta dell'elettrodo in platino 1 mm per CVS	
	Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo 1 mm $\pm$ 0,02 mm, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3. Errore di oscillazione radiale: 0,2 mm. Campo di temperatura da 0 a 50 °C.	