



VoltIC pro I: il sistema combinato di IC e voltammetria per la determinazione parallela di anioni, cationi e metalli pesanti

VoltIC pro I

VoltIC pro I è la combinazione perfetta di IC e voltammetria per la determinazione simultanea di anioni, cationi e metalli pesanti. MagIC Net™ gestisce il comando degli strumenti IC e l'avvio della determinazione voltammetrica. Nonché la sintesi di tutti i risultati di IC e voltammetria.

Parti incluse VoltIC pro I

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Rilevatore della conducibilità ad alte prestazioni compatto e intelligente per gli strumenti IC intelligenti. Eccellente stabilità di temperatura, la completa elaborazione del segnale all'interno del blocco del rivelatore protetto e DSP – Digital Signal Processing – di ultima generazione garantiscono la massima precisione della misura. Grazie al range dinamico di lavoro non sono necessari cambiamenti (anche non automatici) del range di misura.



800 Dosino è un drive con hardware di scrittura/lettura per Unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (150 cm).



L'843 Peristaltic Pump Station dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace.

La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.



L'858 Professional Sample Processor – Pump per il trattamento di campioni con volumi compresi tra 500 µL e 500 mL. Il trasferimento del campione avviene o attraverso la pompa peristaltica bidirezionale a doppio canale integrata o tramite un 800 Dosino.



1 PCS

6.1602.150

Sifone per bottiglia / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Per collegare capillari 1/16". Da usare per le soluzioni ausiliarie dell'MSM e nella MISP.



1 PCS

6.1608.030

Bottiglia / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1608.050

Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Adattatore con filettatura / GL 45 su GL 45

Adattatore con filettatura (GL 45 su GL 45); anche per bottiglie per reagenti con flangia più alta.



1 PCS

6.1803.030

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m

Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS

6.1803.150

PTFE Capillary i.d. 0.25 mm / 1 m



1 PCS

6.1805.530

Tubo in FEP / M6 / 2 m

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.280

Adattatore per la porta 4 dell'807 Dosing Unit, M6
interno

Adattatore per l'utilizzo della porta 4 dell'807 Dosing Unit per il
collegamento con un tubo in FEP/M6.



2 PCS

6.1819.010

Tubo in PTFE

Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand




1 PCS

6.1822.410

Capillare di connessione in PEEK

Capillare di connessione per il trasferimento del campione con lo
scambiatore di campioni, 1 x M6, diametro interno 0.5 mm, per analisi in
tracce

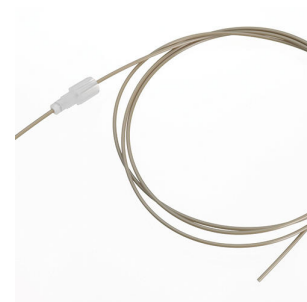


1 PCS

6.1826.020

Tubo di pompaggio in PVC (blu/blu)

Per gli strumenti online IC e l'automazione in voltammetria.

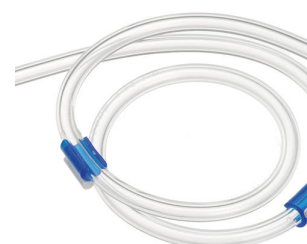

1 PCS

6.1831.070

Capillare in PEEK 0.75 mm i.d., 70 cm

For Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.2041.450

Rack dei campioni, 56 x 11 mL e 56 x 50 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL adatto a 112 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, provette Sarstedt da 50 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2055.100

Supporto per bottiglia, doppio

Supporto per bottiglia per 2 bottiglie da 1 L. Per kit di aspirazione 6.5617.000



1 PCS

6.2057.040

Supporto per dosino per 838 Advanced Sample Processor

Supporto per Dosino per l' 838 Advanced IC Dilution Sample Processor e l' 838 Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.2134.100

Cavo / 5 m / RS232 DB9 - IBM-PC (DB9)

Per collegare interfacce Metrohm RS232 - Titrino, 756 KF Coulometer, 762 o 771 IC Interfaces, 790 Personal IC



1 PCS

6.2148.010

Remote Box MSB

Interfaccia remote aggiuntiva per la connessione di strumenti che possono essere controllati tramite linee remote. Con cavi fissi permanenti.




2 PCS

6.2148.050

USB/RS-232 Converter per 900 Touch Control

Se il 900 Touch Control viene ampliato di un'interfaccia RS 232 per la connessione per es. di bilance

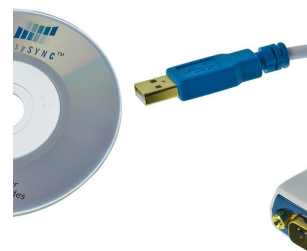

1 PCS

6.2743.057

Recipiente per campioni 11 mL

200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



1 PCS

6.2743.077

Tappo con foro

200 pezzi. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



3 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



1 PCS

6.2747.010

Recipiente per campioni 50 mL

Con tappo a vite blu e graduazione mL. Set da 25 pezzi.



2 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



2 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.




1 PCS

6.5620.000

Set di collegamento all'807 Dosing Unit: porta 4

Per il collegamento di un tubo flessibile M6 alla porta 4 di un 807 Dosing Unit (passaggio da Luer a M6), incl. fissaggio del supporto

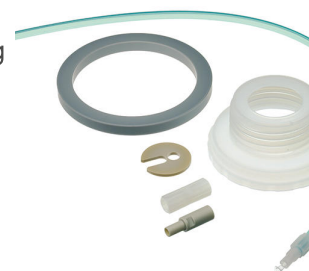

Cavo per il collegamento remoto tra 843 Pump Station e 838 Advanced Sample Processor.

