


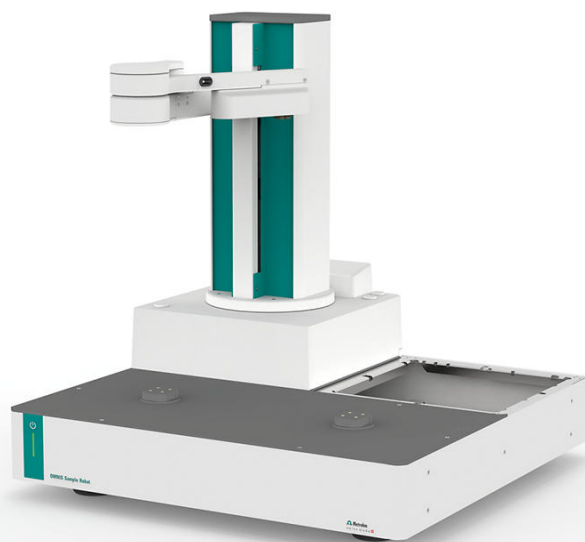


OMNIS Main Module S – WSM

2.1010.0120

サイズ S の OMNIS Sample Robot WSM を組み立てるためのメインモジュールです。このモジュールには、サンプルラック 2 つまでと OMNIS Workstation Module 1 台のためのモジュールプレートおよびラックプレートが含まれます。これには既にメインリフトとグリッパーが装備されています。完全に動作するサンプルロボットに拡張するには、サンプルラックとグリッパーフインガーに加え、サンプル処理のために OMNIS Workstation Module も必要です。このコンポーネントの選択はアプリケーションに合わせて行われます。

納品範囲 2.1010.0120

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1010.0120	OMNIS Main Module S - WSM

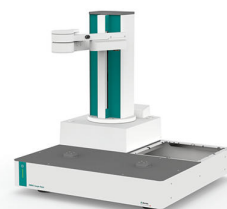

1 PCS

6.01803.000

シリコンチューブ 8/12 2.5 m

こぼれ出た溶液が排出物用容器に安全に流れるよう、Pick&Place モジュールもしくはポンプモジュールの排出口と接続するためのシリコンチューブ。



1 PCS

6.1602.115

Bottle attachment / S 40 / green



1 PCS

6.1624.000

Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.02601.010	グリッパーフィンガー 43 ～ 65 mm 外径が 43 ～ 65 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー。
6.02601.020	グリッパーフィンガー 50 ～72 mm 外径が 50 ～72 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー
6.02601.030	グリッパーフィンガー 48～64 mm 外径が 48 ～ 64 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー。
6.02601.040	グリッパーフィンガー 28～48 mm 外径が 28 ～ 48 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー。



OMNIS Sample Robot WSM に取り付けるためのモジュールです。このモジュールには、サンプル容器を自動処理するためのワークステーション 1 台が含まれます。ポンプはありません。ワークステーションには分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の合間に、使用されたセンサーをワークステーションの保管用ビーカーにて洗浄、または保管できます。分析中に攪拌が必要な場合は、このワークステーションに別個のロッドスターラまたはマグネチックスターラを装備することができます。



OMNIS Sample Robot WSM に取り付けるためのモジュールです。このモジュールには、サンプル容器を自動処理するためのワークステーション 1 台と、サンプル容器とセンサーを自動クリーニング (リンスと吸引) するためのポンプ 2 台が含まれます。ワークステーションには分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の合間に、使用されたセンサーをワークステーションの保管用ビーカーにて洗浄、または保管できます。分析中に攪拌が必要な場合は、このワークステーションに別個のロッドスターラまたはマグネチックスターラを取り付けることができます。



OMNIS Sample Robot WSM に取り付けるためのモジュールです。このモジュールには、サンプル容器を自動処理するためのワークステーション 2 台と、両方のワークステーションでサンプル容器とセンサーを自動クリーニング (リンスと吸引) するためのポンプ 4 台が含まれます。ワークステーションには、分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の合間に、使用されたセンサーをワークステーションの保管用ビーカーにて洗浄、または保管できます。分析中に攪拌が必要な場合は、どのワークステーションにも別個のロッドスターラまたはマグネチックスターラを取り付けることができます。



9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.01400.000、6.01400.003、6.01400.100。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.02041.030 OMNISサンプルラック、16 x 120 mL、(PP)

16個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.01400.200、6.01400.300、6.01400.303。


合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.02041.020 OMNISサンプルラック、9 x 200 mL、(PP)

9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。


合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

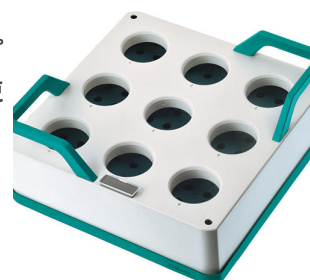

6.02041.040 OMNISサンプルラック、25 x 75 mL、(PP)

25個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.01402.000、6.01402.003、6.1459.400。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

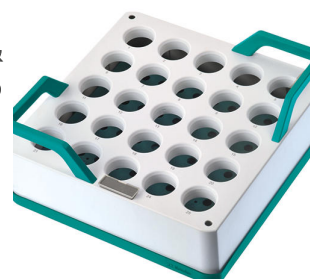

6.02041.050 OMNISサンプルラック、9 x 150 mL、(PP)

9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー、注ぎ口なし)。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)





6.05800.560 アップグレード スターラー WSM

このセットには、OMNIS Workstation Module のワークステーションにマグネチックスターラを装備するためのすべてのコンポーネントが含まれています。



6.05800.570 アップグレード ポンプモジュールペリスタリック WSM



6.05800.600 アップグレード OMNIS Sample Robot S-M WSM





6.05700.000 消耗品キット OMNIS グリッパー

OMNIS Sample Robot のグリッパーフィンガーの交換用スライドスリーブおよびゴム製グリッパーフィンガー、各4つ。



6.05700.250 6.02601.030 のための消耗品キット OMNIS グリッパー

OMNIS Sample Robot のグリッパーフィンガーの交換用ゴム製グリッパーフィンガー4つ。



6.02064.020 サンプルビーカー 200 mL 用ビーカーリテーナー

OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガーにサンプルビーカー 200 mLを固定するためのビーカーリテーナー



6.05001.210 付属品キット WSM (2T/4P)

この付属品キットには、OMNIS Workstation Module (2T/4P) のポンプモジュールの 2 台の洗浄ポンプと 2 台の吸引ポンプのホースのルーティングに必要なコンポーネントがすべて含まれています。ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポンプチューブも各 4 つずつ付属しています。ルアーコネクタを簡単に取り付けるためのツールもセットに含まれています。



6.05001.110 付属品キット WSM (1T/2P)

この付属品キットには、OMNIS Workstation Module (1T/2P) のポンプモジュールの洗浄ポンプと吸引ポンプのホースのルーティングに必要なコンポーネントがすべて含まれています。ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポンプチューブも各 2 つずつ付属しています。ルアーコネクタを簡単に取り付けるためのツールもセットに含まれています。



6.2841.020 OMNIS Sample Robot 用洗浄ステーション

このセットには、OMNIS Sample Robot のピペット装置を自動でクリーニングするための洗浄ステーションが含まれています。

洗浄ステーションは、OMNIS Workstation Moduleのポンプタワー前に取り付けることができます。

作動させるには、洗浄ステーションに溶液の供給と吸引を行うための 2 台のポンプが必要です。

