



OMNIS Workstation Module (1T/2P)

2.1024.0020

OMNIS Sample Robot WSM に取り付けるためのモジュールです。このモジュールには、サンプル容器を自動処理するためのワークステーション 1 台と、サンプル容器とセンサーを自動クリーニング (リンスと吸引) するためのポンプ 2 台が含まれます。ワークステーションには分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の合間に、使用されたセンサーをワークステーションの保管用ビーカーにて洗浄、または保管できます。分析中に攪拌が必要な場合は、このワークステーションに別個のロッドスターラまたはマグネチックスターラを取り付けることができます。

納品範囲 2.1024.0020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1024.0020	OMNIS Workstation Module (1T/2P)



1 PCS

6.01543.100

排液チップオートメーション



1 PCS

6.01804.500

排水チューブ用のチューブアダプター

Pick&Place モジュールの排水チューブ用チューブアダプター、および OMNIS Sample Robot Pick&Place のポンプモジュール。




3 PCS

6.01805.000

FEP チューブ接続部 / M6 / 66.5 cm

遮光および折れ曲がり防止付き。

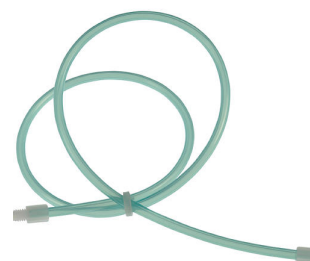

1 PCS

6.01805.010

PTFE チューブ接続部 / M8 / 66.5 cm

遮光および折れ曲がり防止付き。



1 PCS

6.02705.000

チューブ配管およびケーブル配線

Pick&Place モジュールと滴定装置間のチューブおよびケーブル管理のため



1 PCS

6.05001.110

付属品キット WSM (1T/2P)

この付属品キットには、OMNIS Workstation Module (1T/2P) のポンプモジュールの洗浄ポンプと吸引ポンプのホースのルーティングに必要なコンポーネントがすべて含まれています。ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポンプチューブも各 2 つずつ付属しています。ルアーコネクタを簡単に取り付けるためのツールもセットに含まれています。



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L



2 PCS

6.1621.100

Cap for 10-L container



1 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve



3 PCS

6.2740.020

Spray nozzle



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01403.000	滴定ヘッド 6 x NS14 / 3 x NS9 (P&P) OMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールで使用するための 6 x NS14 および 3 x NS9 の開口部を有する滴定ヘッド
6.01403.010	滴定ヘッド 4 x M10 (P&P) OMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールで使用するための 4 x M10 の開口部を有する滴定ヘッド
6.01403.020	KFTのための滴定ヘッド4xM10 (P&P) 4 M10のスクリーニップルとストッパーのついたOMNIS Sample Robot ピック&プレイスのピック&プレイスモジュールにおけるカールフィッシャー滴定のための4xM10の開口部を有する滴定ヘッド。
6.01403.030	滴定ヘッド 3xNS14/ 4x6.4mm (P&P) 2つのドージングチップの取り付けられたOMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールにおいて 120 mL のビーカーを使用するための 3 NS14 および 4 x 6.4 mm の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄用および吸引用チューブの装備の準備。



6.01403.040 滴定ヘッド 2 x NS14 (P&P)

3 つのドージングチップの取り付けられたOMNIS サンプルロボットピック&プレイスのピック&プレイスモジュールにおいて使用するための 2 つの NS14 の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄ノズルの装備の準備。吸引チューブは滴定ヘッドにすでに取り付けられています。



6.01403.050 強化チップ付きのKFT滴定ヘッド (P&P)

OMNIS Sample Robot Pick&PlaceのPick&Place モジュールでのカール フィッシャー滴定用の滴定ヘッド。2本の強化された反拡散チップに加え、滴定ヘッドにはホモジナイザー (Polytron 1300D) またはロッドスターラーを使用するための開口部が設けられています。



6.01403.060 使い捨てビーカー 200 mL のための滴定ヘッド 3xNS14/ 4x6.4 mm (P&P)

2つのドージングチップの取り付けられたOMNISサンプルロボット Pick&Place の ピック&プレイスモジュールにおける 200 mL のポリプロピレン製使い捨てビーカー (6.1459.310)、または 150 mL のガラス製ビーカー (縦型、注ぎ口無し) を使用するための 3 x NS14 および 4 x 6.4 mm の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄および吸引用チューブの装備の準備用。



6.01404.020 サンプルビーカー 200 mL 用ビーカーアダプター

サンプルビーカー 200 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター



6.01404.030 OMNISサンプルビーカー 120 mL 用ビーカーアダプター

サンプルビーカー 120 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター



6.01404.040 OMNISサンプルビーカー 75 mL 用ビーカーアダプター

サンプルビーカー 75 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター



6.01404.050 サンプルビーカー 150 mL 用ビーカーアダプター



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

固定取り付けケーブル (2.5 m) で OMNIS Sample Robot に直接接続するロッドスターラ。





6.05800.560 アップグレード スターラー WSM

このセットには、OMNIS Workstation Module のワークステーションにマグネチックスターラを装備するためのすべてのコンポーネントが含まれています。



6.05800.570 アップグレード ポンプモジュールペリスタリック WSM



6.02700.020 WSM 接続プレート



6.05700.010 消耗品キット OMNIS ポンプモジュール (2チャンネル)

OMNISポンプモジュールでの交換用ポンプチューブおよび付属の加圧クリップ、各2つ。消耗品キットにより、ポンプモジュールの2つのペリスタリックポンプを新たに装備することが可能です。



6.05001.110 付属品キット WSM (1T/2P)

この付属品キットには、OMNIS Workstation Module (1T/2P) のポンプモジュールの洗浄ポンプと吸引ポンプのホースのルーティングに必要なコンポーネントがすべて含まれています。ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポンプチューブも各 2 つずつ付属しています。ルアーコネクタを簡単に取り付けるためのツールもセットに含まれています。



6.01462.010 滴定ヘッドアダプター

