



Eco Coulometer (1液型電極付き)


2.1028.0110

マグネチックスターラおよびタッチセンサーディスプレイ内蔵のEco Coulometerは、10 µgから200 mgの範囲の絶対水分量の水分測定に理想的です。事前に定義されたメソッドにより、装置のスタートアップを円滑かつ簡潔に行うことが可能となります。GLPに適合した紙面またはPDFファイルへの出力の他、Eco Coulometerにより、天秤との接続、あるいはPC/LIMSレポートによる測定データのコンピュータへの送信が可能となります。1液型の指示電極ならびに発生電極が同梱されています。

クーロメトリーは液体、固体、気体のトレースレベルにおける水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは完全なメソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。

納品範囲 2.1028.0110

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

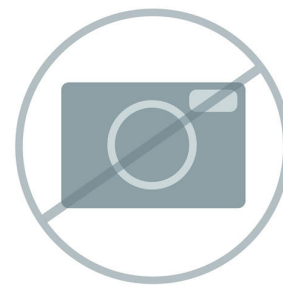

1 PCS

6.02104.040

電極ケーブル プラグヘッド G (Pol) / プラグ P、
0.55 m

アナログ分極性電極（プラグヘッド G）を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル



1 PCS

6.02712.000

Eco Dosimat / Eco Titrator のための保護カバー

Eco Dosimat / Eco Titrator のディスプレイのための保護カバー。



1 PCS

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS 6.0345.100 発生電極（1液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（1液型電極付き）、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどのに適しています。



1 PCS 6.1403.030 KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS 6.1437.000 SGJ stopper SGJ 14



2 PCS 6.1448.020 Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2047.040

滴定容器ホルダー 899/917

899 Coulometer および 917 Ti-Touch の電量測定セルのための滴定容器ホルダー



1 PCS

6.2104.120

Electrode cable / 1 m / H



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS

6.2713.000

PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2738.000

Funnel



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.860.0010	860 KF Thermoprep	
	860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、またはは高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。	
6.1464.323	KF 滴定容器 / 80 ~ 250 mL / クーロメトリック / 褐色ガラス	
6.1465.320	KF titration vessel with 2 lateral openings / 80-250 mL / coulometric	
2.143.0200	ドットインパクトプリンター TX-900MH	



6.1439.010 KF- 給液/排液チューブ

クーロメーターセル用の KF 給液/排液チューブ、ねじ接合 M8 6.1811.010 付き。



6.2811.000 Molecular sieve



6.2811.010 モレキュラーシープ (US)

モレキュラーシープ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

