



852 Titrando (Touch Controlおよび1液型電極付き)

2.852.0160

クーロメーター(1液型電極付き、完全な容量滴定セルおよびTouch Controlセルなし)。

トレースレベル (水の絶対量10 μg ~10 mg) の水分測定において、クーロメトリーは液体、固体、気体中での水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは絶対メソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。

クーロメトリーで推奨される測定範囲: 水の絶対量10 μg ~200 mg

852 Titrandoでは電量滴定の他に容量滴定によるカール フィッシャー滴定も可能です。

OMNISソフトウェア、*tiamo*ソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)。

納品範囲 2.852.0160

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.852.0010

852 Titrando




1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

タイトランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。

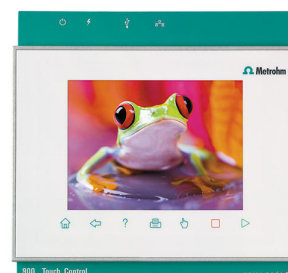

1 PCS

6.00346.100

容量滴定用ダブルPtリング電極

2つの溶融プラチナリングによって従来のプラチナピン電極 (6.0338.100) よりも頑丈で、かつ洗浄しやすくなったカール フィッシャー滴定用の指示電極。



1 PCS

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.0345.100

発生電極（1液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（1液型電極付き）、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどのに適しています。



1 PCS

6.1244.040

Set of seals



1 PCS

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS

6.1403.040

KF Adsorber tube



1 PCS 6.1414.030 KF滴定容器上部 開口部5つ
カールフィッシャー容量滴定向け。



1 PCS 6.1415.220 Titration vessel / 20-90 mL



1 PCS 6.1415.250 Titration vessel / 50-150 mL



1 PCS 6.1437.000 SGJ stopper SGJ 14



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



2 PCS

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



2 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



3 PCS

6.1903.030


Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.090

Base plate on both sides

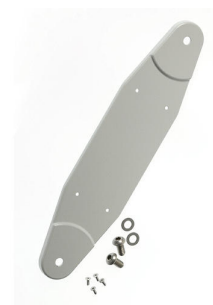

2 PCS

6.2013.010

Clamping ring



2 PCS

6.2016.030

Support rod / 250 mm



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2047.020

Titration vessel holder



2 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS 6.2104.120 Electrode cable / 1 m / H



1 PCS 6.2412.000 Weighing boats



1 PCS 6.2701.040 GL 18 screw cap with hole



3 PCS 6.2713.000 PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



2 PCS

6.2730.010

Screw nipple



1 PCS

6.2730.020

Septum stopper



4 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2738.000

Funnel



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL





オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.860.0010	860 KF Thermoprep 860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、またはは高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。  The image shows the 860 KF Thermoprep setup, which includes a heating unit, a sample vial, and a titration unit connected by a tube.
6.2148.020	RS-232/USB box  The image shows a white RS-232/USB box with two RS-232 ports (labeled RS-232/1 and RS-232/2) and a USB port. The Metrohm logo is visible on the bottom right.
6.2103.140	Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm  The image shows a black adapter with a 2 mm plug and a 4 mm B socket.
6.2103.130	Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket  The image shows a red adapter with a 2 mm plug and a 4 mm socket.

6.2811.000

Molecular sieve



6.2811.010

モレキュラーシープ (US)

モレキュラーシープ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

